


polaris

since 1995

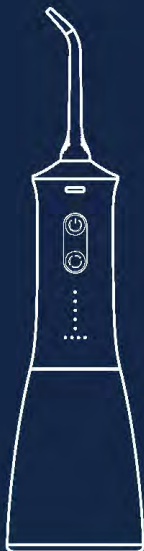

PWF 1005 T

Руководство по эксплуатации / Гарантия
Manual instruction / Guarantee

Ирригатор
Модель PWF 1005 T
Руководство по эксплуатации

Благодарим Вас за выбор продукции торговой марки POLARIS. Наши изделия разработаны в соответствии с высокими требованиями качества, функциональности и дизайна. Мы уверены, что Вы будете довольны приобретением нового изделия нашей фирмы.

Перед началом эксплуатации прибора внимательно прочитайте данное руководство, в котором содержится важная информация, касающаяся Вашей безопасности, а также рекомендации по правильному использованию прибора и уходу за ним.

Сохраните руководство вместе с гарантийным талоном, кассовым чеком, по возможности, картонной коробкой и упаковочным материалом.

Оглавление

1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ.....	3
2. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ.....	3
3. СПЕЦИАЛЬНЫЕ УКАЗАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ ДАННОГО ПРИБОРА.....	4
4. СФЕРА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ.....	5
5. КОМПЛЕКТАЦИЯ.....	5
6. ОПИСАНИЕ ПРИБОРА.....	5
7. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ.....	7
8. ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПРИБОРА.....	8
9. ЧИСТКА И УХОД.....	10
10. ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА.....	11
11. ЕСЛИ У ВАС ВОЗНИКЛА ПРОБЛЕМА.....	11
12. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ.....	12
13. ИНФОРМАЦИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ.....	12
14. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА.....	13

1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Настоящее руководство по эксплуатации предназначено для ознакомления с техническими данными, устройством, правилами эксплуатации и хранения ирригатора POLARIS, модель PWF 1005 T (далее по тексту – прибор).

2. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

- Эксплуатация прибора должна производиться в соответствии с «Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей».
- Прибор предназначен исключительно для использования в быту.
- Перед началом использования этого прибора тщательно прочитайте руководство по эксплуатации.
- Каждый раз перед включением прибора осмотрите его. При наличии повреждений прибора и адаптера питания ни в коем случае не включайте адаптер в розетку.
- Прибор и адаптер питания должны храниться так, чтобы они не попадали под воздействие жары, прямых солнечных лучей и влаги.
- Не оставляйте прибор на зарядке без надзора! Если Вы покидаете помещение, всегда отключайте адаптер питания от сети.
- Данный прибор не предназначен для использования людьми, у которых есть физические, нервные или психические отклонения или недостаток опыта и знаний, за исключением случаев, когда за такими лицами осуществляется надзор или проводится их инструктирование относительно использования данного прибора лицом, отвечающим за их безопасность. Необходимо осуществлять надзор за детьми (до 8 лет) с целью недопущения их игр с прибором.
- Не помещайте прибор в воду или любую другую жидкость.
- Внимание! Не осуществляйте зарядку прибора вблизи ванн, раковин или других емкостей, заполненных водой.
- После очистки устройства и перед подключением его к источнику питания, пожалуйста, убедитесь, что прибор полностью высох.
- Включайте сетевую вилку только в источник переменного тока (~). Перед включением убедитесь, что прибор рассчитан на напряжение, используемое в сети.
- **Любое ошибочное включение лишает Вас права на гарантийное обслуживание.**
- Предохраняйте прибор от ударов об острые углы. По окончании эксплуатации, чистке или поломке прибора всегда отключайте его от сети.
- Запрещается также отключать прибор от сети, держа его за сетевой провод. При отключении прибора от сети держитесь за сетевую вилку.
- Замену шнура можно производить только на аналогичный оригинальный шнур от такой же модели, проконсультируйтесь у квалифицированных специалистов - сотрудников сервисного центра. Неквалифицированный ремонт представляет прямую опасность для пользователя.
- После использования никогда не обматывайте провод электропитания вокруг прибора, так как со временем это может привести к излому провода. Всегда гладко расправляйте провод на время хранения.
- Для ремонта прибора могут быть использованы только оригинальные запасные части.
- Не следует использовать прибор после падения, если имеются видимые признаки повреждения. Перед использованием прибор должен быть проверен квалифицированным специалистом.
- Всегда отключайте прибор из сети, если вы не пользуетесь устройством.
- Не допускайте соприкосновения сетевого шнура с горячими и острыми поверхностями. Избегайте повреждения изоляции сетевого шнура.
- Прибор содержит батарею, которая не подлежит замене.
- Используйте только насадки, входящие в комплект.
- Использование аксессуаров, не входящих в комплект поставки лишает Вас права на гарантийное обслуживание.



	Внимание! После окончания срока службы не выбрасывайте прибор вместе с бытовыми отходами. Передайте его в специализированный пункт для дальнейшей утилизации. Этим Вы поможете защитить окружающую среду. Использованные аккумуляторные батареи не выбрасывайте с бытовым мусором. Не бросайте батареи в огонь, так как они могут взрываться. Использованные аккумуляторные батареи должны быть утилизированы. В данном приборе батарея не съёмная, поэтому требование относится ко всему прибору целиком. Внимание! При возникновении неисправностей любого характера обращайтесь в Авторизованный сервисный центр POLARIS.
--	---

3. СПЕЦИАЛЬНЫЕ УКАЗАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ ДАННОГО ПРИБОРА

- Данный прибор не является лечебным или медицинским инструментом. Это продукт бытового назначения. Обо всех показаниях, противопоказаниях и возможных осложнениях при его использовании, пожалуйста, проконсультируйтесь с медицинским персоналом до начала использования этого устройства.
- Ирригатор соответствует требованиям безопасности, стандартам для электромагнитного оборудования. Если у Вас есть какие-либо вопросы о кардиостимуляторах и других имплантированных устройствах, пожалуйста, проконсультируйтесь с Вашим врачом или производителем имплантированных устройств перед использованием ирригатора.
- Этот прибор предназначен для удаления зубного налета и тщательной чистки зубов ежедневно.
- Пожалуйста, не используйте его для других целей. Если Вы чувствуете себя не комфортно или болезненно, пожалуйста, прекратите использовать этот прибор и обратитесь к врачу.
- Если у вас есть какие-либо медицинские проблемы, пожалуйста, проконсультируйтесь с врачом перед использованием ирригатора.
- Пожалуйста, не мойте прибор в посудомоечной машине.
- Пожалуйста, не используйте не оригинальные наконечники ирригатора.
- Категорически не допускается хранить прибор при отрицательных температурах воздуха.
- Не выпускайте из рук включенный ирригатор и не кладите его на твердые поверхности, поскольку работающий прибор может упасть и получить повреждения
- Не направляйте струю прибора под язык, в ухо, в нос или другие деликатные зоны. Прибор генерирует мощную водную струю, которая может нарушить целостность кожи и слизистых оболочек.
- Перед использованием прибора удалите из полости рта все инородные предметы (пирсинг, ювелирные украшения и т.д.)
- Не используйте ирригатор, если у Вас есть открытые раны в полости рта.
- Перед проведением любых вмешательств у стоматолога, уточните у него о возможности до процедур использовать ирригатор.
- Во время применения ирригатора в первые несколько дней может наблюдаться незначительная кровоточивость десен. Если кровоточивость продолжится через 1 неделю применения на мягком режиме, прекратите пользоваться ирригатором и обратитесь за консультацией к стоматологу.
- Не заполняйте резервуар прибора никакими жидкостями, кроме чистой питьевой воды.
- После использования ирригатора слейте остатки жидкости из резервуара для воды.
- Бывший в использовании ирригатор запрещается хранить в неотапливаемом помещении при отрицательных температурах.

4. СФЕРА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ


- Прибор предназначен исключительно для бытового использования в соответствии с данным Руководством. Прибор не предназначен для промышленного и коммерческого использования.
- Производитель не несет ответственности за ущерб, возникший в результате неправильного или непредусмотренного настоящим руководством использования.

5. КОМПЛЕКТАЦИЯ

1. Прибор (корпус)	1 шт.
2. Сменные классические насадки	2 шт.
3. Сменная насадка ортодонтическая	1 шт.
4. Сменная насадка пародонтологическая	1 шт.
5. Сменная насадка для языка	1 шт.
6. USB провод	1 шт.
7. Адаптер зарядки	1 шт.
8. Дорожный чехол	1 шт.
9. Руководство по эксплуатации	1 шт.

6. ОПИСАНИЕ ПРИБОРА

- Ирригатор предназначен для ухода за полостью рта для чистки межзубных промежутков, удаления налета при помощи компактной струи воды, подаваемой под давлением. А также для соблюдения гигиены при наличии имплантов, брекетов, коронок, мостов; для оздоровления десен с помощью массажа.

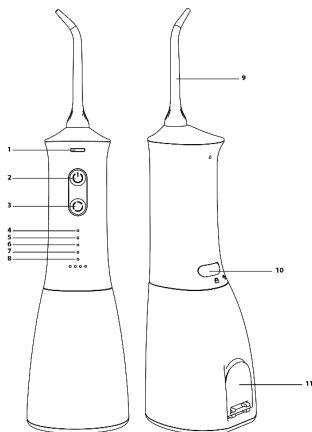

1. Кнопка фиксатора насадки
2. Кнопка вкл./выкл.
3. Кнопка переключения режимов и интенсивности подачи воды
4. Индикатор режима Soft
5. Индикатор режима Normal
6. Индикатор режима Strong
7. Индикатор режима Pulse
8. Индикатор уровня заряда
9. Насадка
10. USB порт
11. Заливное отверстие резервуара для воды

Насадки

В базовой комплектации 5 насадок:

- классические 2 шт.,
- ортодонтическая 1 шт.,
- пародонтологическая 1 шт.
- для чистки языка 1 шт.



**Классическая
насадка**



**Ортодонтическая
насадка**



**Пародонтологическая
насадка**




**Насадка для чистки
языка**

Классическая насадка

очищает межзубные промежутки от бактерий и частиц пищи; подходит для удаления остатков пищи при наличии искусственных конструкций.

Ортодонтическая насадка

подходит для чистки мостов, брекетов, коронок, для всех элементов искусственных конструкций.

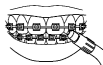

Пародонтологическая насадка

имеет мягкий наконечник, используется для очищения десневого края.

Насадка для чистки языка

удаляет бактерии, налет, освежает дыхание.



Внимание! Насадка должна быть строго индивидуальной для каждого пользователя. Рекомендуется менять насадки после 6 месяцев регулярного пользования.

Режимы работы и уровень интенсивности

Переключение режимов работы осуществляется последовательным нажатием кнопки переключения режимов. Выключение каждого выбранного режима происходит автоматически через определённое время. При необходимости, прибор можно выключить принудительно повторным нажатием кнопки вкл/выкл.

1. Режим Normal (нормальный) со средним давлением подачи воды для ежедневного ухода за зубами, чистки межзубных промежутков, массажа десен; для людей со здоровыми деснами.
2. Режим Soft (мягкий) – мягкое воздействие на зубы и десны, рекомендован для чувствительных зубов и десен; для начинающих пользователей.
3. Режим Strong (сильный) – интенсивная чистка зубов и десен.
4. Режим Pulse (импульсный) – для чистки линии десны и массажа десен.

Для переключения уровней интенсивности подачи воды, необходимо удерживать нажатой кнопку переключения режимов в течение нескольких секунд. Например, для переключения интенсивности на 4 уровень, удерживайте кнопку нажатой, не отпуская палец с кнопки. Таким образом, индикатор уровня интенсивности подачи воды, будет сдвигаться в правую сторону, при этом будет меняться напор воды.

Установить необходимый режим работы и интенсивность подачи воды, можно как во время работы прибора, так и до его включения. Прибор запоминает выбранный Вами режим работы, и при последующем включении он будет находиться в этом же режиме.

Внимание!

Прибор автоматически отключится по истечении ~ 120 сек.



7. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

1. Удалите весь упаковочный материал.
2. **Внимание!** Для первого использования, пожалуйста, полностью зарядите устройство (около 3,5 часов). Во время зарядки устройство НЕЛЬЗЯ использовать.
3. **Сборка ирригатора.** Установите наконечник на верхней части прибора до характерного щелчка.



4. **Выбор режима.** Нажмите кнопку «переключения режимов»
5. **Выбор интенсивности.** Нажмите и удерживайте кнопку «переключения режимов»
6. **Включение.** Поднесите устройство с насадкой ко рту и нажмите кнопку включения.
7. **Смена насадки.** Выключите устройство. Нажмите и, удерживая кнопку фиксатора насадки, потяните за насадку вверх из корпуса прибора.

Зарядка ирригатора.

Убедитесь, что напряжение, указанное на адаптере, соответствует напряжению сети.

- Подключите USB кабель к адаптеру и порту USB на корпусе прибора, а затем включите адаптер в сеть. Индикатор зарядки начнет плавно мигать.
- Зарядите устройство в течение 3-4 часов. При первом использовании полностью зарядите устройство.
- В процессе зарядки индикатор мигает красным светом. Когда устройство будет полностью заряжено – индикатор перестанет мигать и будет гореть непрерывным зеленым светом.
- Время работы прибора после полной зарядки батареи составляет примерно – 80 минут.
- Если во время работы прибора индикатор зарядки постоянно мигает красным светом, это указывает на то, что батарея требует зарядки. Пожалуйста, зарядите батарею снова.

При правильной эксплуатации прибора, Вы увеличите срок службы литиевой батареи.

8. ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПРИБОРА.

1. Залейте **воду в резервуар** через заливное отверстие:

- откройте крышку резервуара для воды
- держите резервуар для воды горизонтально и наполните резервуар водой
- закройте крышку резервуара для воды



Внимание! Убедитесь, что устройство выключено на данном этапе

Во время залива воды в резервуар, прибор должен быть выключен.

Для использования прибора рекомендуется чистая проточная прохладная или теплая вода (до 40°C). Если качество воды в вашем регионе плохое, то используйте отфильтрованную воду.



Во избежание поломки ирригатора запрещается использовать:

- Вещества и растворы, содержащие взвешенные частицы (отвары, суспензии и т.п.)
- Маслосодержащие растворы
- Антисептические и спиртовые растворы
- Солевые растворы
- Жидкости для полоскания рта, кроме специальных растворов и ополаскивателей для ирригатора.



2. Для **включения и выключения** прибора нажимайте кнопку включения вкл./выкл.

Поднесите устройство с насадкой ко рту и нажмите кнопку включения.



3. **Выбор и переключение режима работы** осуществляется коротким нажатием кнопку переключения режимов.

Ирригатор имеет 4 режима чистки. При первом использовании прибора рекомендуется выбирать режим **SOFT**. Это поможет адаптироваться к ирригационной чистке и избежать риска воспаления и кровоточивости десен.


Прибор запоминает последний использованный Вами режим работы и при последующем использовании он будет находиться в этом режиме. При необходимости, выберите другой режим работы.



4. Для смены **уровня интенсивности** подачи воды удерживайте кнопку «переключения режимов» в течение нескольких секунд. Если Вы хотите переключиться на следующий 4-й уровень, удерживайте кнопку, пока индикатор не начнет сдвигаться вправо.


5. **Смена насадки.** Выключите устройство. Нажмите и удерживая кнопку фиксатора насадки, потяните за насадку вверх из корпуса прибора

- Перед каждой чисткой зубов промывайте наконечник проточной водой.
- Во время использования, ирригатор должен находиться в вертикальном положении или с небольшим наклоном, чтобы предотвратить остановку потока воды.
- Не используйте заполненный водой ирригатор без насадки. Это может привести к его поломке.
- Не включайте устройство без воды в резервуаре, кроме тех случаев, когда нужно слить остатки воды и осушить резервуар. Работа устройства без воды может привести к его поломке или сокращению срока службы прибора.

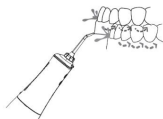


Процесс чистки полости рта:

- наклонитесь над раковиной и поместите наконечник прибора в рот
- включите прибор, когда насадка находится во рту
- частично прикройте губы, чтобы предотвратить брызги, но позвольте воде течь изо рта в раковину
- направьте кончик на линию десен под углом 90 градусов.
- начните с задних зубов, двигайтесь вдоль линии десен, задерживаясь у межзубных промежутков. Продолжайте до тех пор, пока все области вокруг и между зубами не будут очищены.

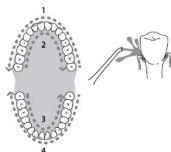

- Эргономичный дизайн и поворотный на 360 наконечник позволяют контролировать поток воды для легкого доступа ко всем зонам полости рта.
- Расстояние от насадки до зуба определяется пользователем самостоятельно, исходя из требуемой интенсивности воздействия
- Будьте особенно осторожны в области между зубов и вокруг брекетов.
- Не направляйте струю непосредственно в пародонтальный карман.

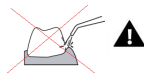


9. ЧИСТКА И УХОД

- Слейте остатки воды из резервуара. После этого кратковременно включите прибор и оставшиеся капли воды выйдут через наконечник. Рекомендуется хорошо промывать резервуар 1 раз в неделю водой с температурой не выше 50°C.



- Для того, чтобы снять резервуар для воды, левой рукой держите верхнюю часть ирригатора, как показано на рисунке ниже, а правой рукой поверните резервуар вправо, а потом потяните вниз.

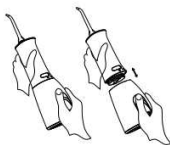

- Если требуется произвести замену наконечника, пожалуйста, используйте оригинальные насадки для данной модели. Рекомендуемое время использования 1 наконечника – 6 месяцев.
- После каждого использования необходимо промыть наконечник и корпус тёплой проточной водой. При необходимости можете использовать мягкую ткань и мыло для очистки поверхности.

Дезинфекцию насадок можно проводить путем помещения их на 5-10 минут в один из перечисленных растворов: 3% раствор перекиси водорода, 1% раствор хлоргексидина. После этого промойте насадки теплой водой.

Также дезинфекцию насадок можно проводить в ультрафиолетовом очистителе.

- Насадки могут храниться в резервуаре для воды, как показано на рисунке ниже.



- В случае если наконечник деформирован в процессе использования, то необходимо сразу произвести его замену.
- Запрещается использовать для чистки органические растворители и абразивные материалы, а также острые предметы, которые могут повредить покрытие ирригатора.
- Пожалуйста, не мойте прибор в посудомоечной машине.



10. ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА

- Электроприборы хранятся в закрытом сухом и чистом помещении при температуре окружающего воздуха не выше плюс 40°C с относительной влажностью не выше 70% и отсутствии в окружающей среде пыли, кислотных и других паров, отрицательно влияющих на материалы электроприборов.
- Если вы не будете использовать прибор в течение длительного времени, пожалуйста, зарядите батарею полностью, отключите ее от источника электропитания и храните ирригатор в закрытом сухом отапливаемом помещении без источника солнечного света.
- Если вы не планируете использовать прибор в течение недели и дольше, просушите емкость для воды изнутри и снаружи.

ТРАНСПОРТИРОВКА

- Электроприборы транспортируют всеми видами транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на транспорте конкретного вида. При перевозке прибора используйте оригинальную заводскую упаковку
- Транспортирование приборов должно исключать возможность непосредственного воздействия на них атмосферных осадков и агрессивных сред.

ТРЕБОВАНИЯ ПО УТИЛИЗАЦИИ

Примечание: По окончании срока эксплуатации электроприбора не выбрасывайте его вместе с обычными бытовыми отходами, а передайте в официальный пункт сбора на утилизацию. Таким образом, Вы поможете сохранить окружающую среду.

Отходы, образующиеся при утилизации изделий, подлежат обязательному сбору с последующей утилизацией в установленном порядке и в соответствии с действующими требованиями и нормами отраслевой нормативной документации, в том числе в соответствии с СанПиНом 2.1.7.1322-03 «Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления.»

11. ЕСЛИ У ВАС ВОЗНИКЛА ПРОБЛЕМА

Если возникает какая-либо небольшая проблема, она обычно может быть легко решена, когда найдена причина ее возникновения.

ПРОБЛЕМА	ВОЗМОЖНАЯ ПРИЧИНА	ВОЗМОЖНОЕ РЕШЕНИЕ
Вода не вытекает из прибора	Образовалась воздушная пробка	Втяните ртом воздух/воду из наконечника
	Засор подачи воды в насадке	Вытряхните воду из насадки и устройства
		Замените насадку на новую
Утечка воды из резервуара для воды	Ослаблено уплотнительное кольцо	Заменить кольцо, обратитесь в сервисный центр
Слабый напор воды при работе прибора	Сломана или забита насадка	Заменить насадку
	Низкий уровень заряда встроенной аккумуляторной батареи	Подключите зарядное устройство и полностью зарядите встроенный в прибор аккумулятор
Короткий период работы после полной зарядки	Недостаточное время зарядки	Полностью зарядить прибор
	Аккумулятор вышел из строя	Обратитесь в сервисный центр
Утечка воды между наконечником и корпусом прибора	Проблема с уплотнительным кольцом	Обратитесь в сервисный центр
	Насадка вставлена не до конца	Вытащите насадку и проверьте нет ли посторонних предметов в выходном отверстии прибора. Вставьте насадку до упора в корпус до характерного щелчка фиксатора.

Во избежание риска пожара, поражения электрическим током или получения травмы при использовании вашего прибора, а также его поломки, строго соблюдайте основные меры предосторожности при работе с данным прибором, а также общие указания по безопасности при работе с электрической бытовой техникой.



Внимание! Если с помощью описанных выше шагов Вы не можете устранить проблему своими силами, обратитесь, пожалуйста, в Авторизованный сервисный центр POLARIS.

12.ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

PWF 1005 T – Ирригатор торговой марки POLARIS

Сетевое напряжение адаптера: ~ 100– 240В, ~50/60 Гц

Напряжение: 5 В

Номинальная мощность: 2,8 Вт

Номинальное давление воды в приборе: 206-827 кПа

Максимальный объем резервуара для воды: 350 мл

Частота пульсации воды: 1400-1800 импульсов в минуту

Автоотключение: через 2 минуты работы

Время зарядки: 3-5 ч

Суммарное время работы прибора при полностью заряженном аккумуляторе до 80 мин

Литиевая батарея 1600 мАч

Влагостойкость IPX7

Класс защиты – II

Примечание: Вследствие постоянного процесса внесения изменений и улучшений, между руководством и изделием могут наблюдаться некоторые различия. Производитель надеется, что пользователь обратит на это внимание.

13.ИНФОРМАЦИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ

Продукция прошла процедуру подтверждения соответствия требованиям ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств», ТР ЕАЭС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники» и маркируется единым знаком обращения продукции на рынке государств-членов Таможенного Союза.

Информацию о номере сертификата/декларации соответствия и сроке его действия Вы можете получить в месте приобретения изделия POLARIS или у Уполномоченного представителя изготовителя.



Срок службы изделия: 3 года

Гарантийный срок: 3 года со дня покупки

Дата изготовления указана на паспортной идентификационной табличке, находящейся на задней стенке изделия

Аккумуляторная батарея (АКБ) является компонентом с ограниченным ресурсом и подверженным естественному износу.

Гарантийный срок на АКБ: 6 месяцев со дня покупки.

Правила реализации не установлены.

Изготовитель:

НИНБО ХЭНСФОРТ ОВЕРСИЗ ЭЙША ЛИМИТЕД

Адрес: № 158 Доншан Лю, Хушан Чжидо, Цыси, Провинция Чжэцзян, КНР

Manufacturer: NINGBO HANSFORT OVERSEAS ASIA LIMITED

No. 158 Dongshan Lu, Hushan Jiedao, Cixi City, Zhejiang Province, PRC

На заводе:

ГУАНДУН РОМАН ТЕХНОЛОДЖИ КО., ЛТД, №.8, Кыюфинг Роад, Боди Вилладж, Чжан Мутуо Таун,
Дунгуань Сити, Гуандун Провинсе, Китай
At factory:
Guangdong Roman Technology Co., Ltd, No.8, Qifeng Road, Bodi Village, Zhang Mutou Town, Dongguan
City, Guangdong Province, China

Произведено в Китае.

**Импортёр и Уполномоченный представитель изготовителя в РФ и государствах-членах
Таможенного Союза:** ООО "ЭйДжиАй Электроникс", Россия, 115419, г. Москва, улица
Орджоникидзе, д. 11, строение 3, этаж 4 помещение 1 комната 13, Тел. +7 (495) 419-11-78
Телефон единой справочной службы 8-800-700-11-78

14. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Изделие: Ирригатор

Модель: PWF 1005 T

Настоящая гарантия действует в течение 36 месяцев с подтвержденной даты приобретения изделия и подразумевает гарантийное обслуживание изделия в соответствии с Законами Государств – членов Таможенного Союза «О защите прав потребителей».

1. Гарантийные обязательства изготовителя распространяются на все модели, выпускаемые под торговой маркой «POLARIS» и приобретенные у уполномоченных изготовителем продавцов, в странах, где предоставляется гарантийное обслуживание (независимо от места покупки).
2. Изделие должно использоваться в строгом соответствии с руководством по эксплуатации и соблюдением правил и требований по безопасности.
3. Настоящая гарантия не распространяется на недостатки, возникшие после передачи товара потребителю вследствие:

- Химического, механического или иного воздействия, попадания посторонних предметов, жидкостей, насекомых и продуктов их жизнедеятельности внутрь изделия;
 - Неправильной эксплуатации, заключающейся в использовании изделия не по его прямому назначению, а также установки и эксплуатации изделия с нарушением требований Руководства по эксплуатации и правил техники безопасности;
 - Отложения известкового осадка, водного камня и накипи из-за использования воды с высоким содержанием минеральных веществ.
 - Использования изделия в целях, для которых оно не предназначено;
 - Нормальной эксплуатации, а также естественного износа, не влияющие на функциональные свойства: механические повреждения внешней или внутренней поверхности (вмятины, царапины, потертости), естественные изменения цвета металла, в т.ч. появление радужных и темных пятен, а также - коррозии на металле в местах повреждения покрытия и непокрытых участках металла;
 - Износа деталей отделки, насадок и аксессуаров, ламп, батарей, защитных экранов, фильтров, накопителей мусора, уплотнительных элементов, ремней, щеток и иных деталей с ограниченным сроком использования и подверженных естественному износу в процессе эксплуатации;
 - Ремонта изделия, произведенного лицами или организациями, не являющимися Авторизованными сервисными центрами*;
 - Повреждений изделия при транспортировке, некорректного его использования, а также в связи с непредусмотренной конструкцией изделия модификациями или самостоятельным ремонтом.
4. Изготовитель не несет гарантийные обязательства, если на изделии отсутствует паспортная идентификационная табличка, либо данные в ней стёрты или исправлены.
 5. Настоящая гарантия действительна только для изделий, используемых для личных бытовых нужд, и не распространяется на изделия, которые используются для коммерческих, промышленных или профессиональных целей.

Внимание!! Изготовитель не несет ответственности за возможный вред, прямо или косвенно причиненный изделием POLARIS людям, домашним животным, окружающей среде, или ущерб имуществу в случае, если это произошло в результате несоблюдения правил или условий эксплуатации и установки изделия, умышленных или неосторожных действий потребителя или третьих лиц.

По всем вопросам, связанным с техническим обслуживанием, проверкой качества, гарантийным и постгарантийным ремонтом изделий POLARIS обращайтесь в ближайший Авторизованный сервисный центр POLARIS или к продавцу – уполномоченному дилеру POLARIS

Гарантийный ремонт изделий POLARIS осуществляют только Авторизованные сервисные центры POLARIS.

*Адреса Авторизованных сервисных центров на сайте Компании: www.polaris.ru

Для подтверждения даты приобретения изделия при гарантийном ремонте или предъявления иных предусмотренных законом требований просим Вас сохранять документы о покупке.

Таковыми документами могут являться заполненный гарантийный талон POLARIS, кассовый чек или квитанция Продавца, иные документы, подтверждающие дату и место покупки.

При не предоставлении документа, подтверждающего дату приобретения изделия, срок гарантии исчисляется с даты изготовления изделия.

Дата изготовления указана на паспортной идентификационной табличке, находящейся на задней стенке изделия

Ирригатор
Модель: PWF 1005 T
Пайдалану жөніндегі нұсқаулық

Сізге POLARIS сауда маркасының өнімін таңдағаныңыз үшін алғысымызды білдіреміз. Біздің өнімдеріміз сапа, функционалдылық пен дизайнның жоғары талаптарына сәйкес әзірленген. Сіз біздің фирмамыздың жаңа өнімін сатып алғаныңызға риза болатыныңызға сенімдіміз.

Аспапты пайдалануды бастар алдында Сіздің қауіпсіздігіңізге қатысты маңызды ақпараты бар осы нұсқаулықты, сондай-ақ аспапты дұрыс пайдалану және оны күту жөніндегі ұсыныстарды мұқият және толық оқып шығыңыз.

Нұсқаулықты кепілдік талонымен, кассалық чекпен, мүмкіндігінше, картон қораппен және орауыш материалмен бірге сақтап қойыңыз.

Мазмұны

1. ЖАЛПЫ АҚПАРАТ	16
2. ҚАУІПСІЗДІК ТУРАЛЫ ЖАЛПЫ ҰСЫНЫМДАР	16
3. ОСЫ АСПАП ҚАУІПСІЗДІГІ БОЙЫНША АРНАЙЫ НҰСҚАУЛАР	17
4. ПАЙДАЛАНУ САЛАСЫ	18
5. ЖИЫНТЫҚТАМА	18
6. АСПАПТЫҢ СИПАТТАМАСЫ	18
7. ЖҰМЫСҚА ДАЙЫНДЫҚ	20
8. АСПАПТЫ ПАЙДАЛАНУ	21
9. ТАЗАЛАУ ЖӘНЕ КҮТІМ	22
10. САҚТАУ ЖӘНЕ ТАСЫМАЛДАУ	23
11. ЕГЕР СІЗДЕ МӘСЕЛЕ ТУЫНДАҒАН БОЛСА	24
12. ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАРЫ	25
13. СЕРТИФИКАТТАУ ТУРАЛЫ АҚПАРАТ	25
14. КЕПІЛДІКТІ МІНДЕТТЕМЕЛЕР	26

1. ЖАЛПЫ АҚПАРАТ

Пайдалану жөніндегі осы нұсқаулық POLARIS ирригаторының, моделі PWF 1005 T (бұдан әрі мәтін бойынша – аспап) техникалық деректерімен, құрылымымен, пайдалану және сақтау ережелерімен танысуға арналған.

2. ҚАУІПСІЗДІК ТУРАЛЫ ЖАЛПЫ ҰСЫНЫМДАР

- Аспапты пайдалану «Тұтынушылардың электр қондырғыларын техникалық пайдалану ережелеріне» сәйкес жүргізілуі керек.
- Аспап тек қана тұрмыста пайдалануға арналған.
- Осы аспапты пайдалануды бастар алдында «Пайдалану жөніндегі нұсқаулықты» мұқият оқып шығыңыз.
- Аспапты іске қосар алдында әр кезде оны қарап байқап шығыңыз. Аспаптың және қуат беру адаптерінің зақымдануы бар болғанда, ешбір жағдайда адаптерді розеткаға қоспаңыз.
- Аспап және қуат беру адаптері олар ыстықтың, тура күн сәулелерінің және ылғалдың әсеріне ұшырамайтындай етіп сақталуы тиіс.
- Зарядта тұрған аспапты қадағалаусыз қалдырмаңыз! Егер сіз үй-жайдан шығып кетсеңіз, қуат беру адаптерін ыли желіден ажыратып қойыңыз.
- Осы аспап физикалық, жүйке немесе психикалық ауытқулары бар немесе тәжірибесі мен білімі жетіспейтін адамдарға, мұндай адамдарға олардың қауіпсіздігіне жауапты адамның осы құрылғыны пайдалануына қатысты қадағалау немесе нұсқау беру жағдайларын қоспағанда, пайдалануға арналмаған. Балаларға (8 жасқа дейін) олардың құралмен ойнауына жол бермеу үшін, оларды қадағалау қажет.
- Аспапты суға немесе басқа қандай болса да сұйықтыққа қоймаңыз.
- Назар аударыңыз! Құралды ванналар, шұңғылшалар немесе сумен толтырылған басқа ыдыстар маңында қуаттандырмаңыз.
- Құрылғыны тазалар алдында және оны қуат көзіне қосар алдында аспап толығымен кепкеніне көз жеткізуді сұраймыз.
- Желілік айырды тек қана айнұмалы ток көзіне (~) қосыңыз. Қосар алдында құралды желіде қолданылатын кернеуге арналған екеніне көз жеткізіңіз.
- **Кез келген кәте қосу Сізді кепілді қызмет көрсету құқығынан айырады.**
- Аспапты үшкір бұрыштарға соғылудан сақтаңыз. Пайдалану аяқталған кезде, құрал сынғанда немесе тазалау кезінде, оны үнемі желіден өшіріңіз.
- Сондай-ақ, құрылғыны желілік сымнан ұстап, желіден ажыратуға тыйым салынады. Құрылғыны желіден ажыратқан кезде желі айырынан ұстаңыз.
- Сымды ауыстыруды тек сол модельден ұқсас түпнұсқа сыммен жасауға болады, білікті мамандардан – сервистік орталықтың қызметкерлерінен кеңес алыңыз. Біліксіз жөндеу пайдаланушыға тікелей жауап төндіреді.
- Пайдаланудан кейін ешқашанда да электрлік қуат көзі желісін құралды айналдырып орамаңыз, себебі уақыт өте келе сымның сынуына әкелуі мүмкін. Сақтау уақытында сымды үнемі түзулеп жазыңыз.
- Аспапты жөндеу үшін, тек түпнұсқа қосалқы бөлшектер пайдаланылуы мүмкін.
- Аспапты құлағаннан кейін, егер зақымданудың көзге көрінетін белгілері бар болса, пайдаланбау керек. Аспап пайдаланар алдында білікті маманмен тексерілуі тиіс.
- Егер сіз аспапты пайдаланбасаңыз, оны үнемі желіден ажыратып қойыңыз.
- Желілік баусымның ыстық және үшкір беттермен жанасуына жол бермеңіз. Желілік баусым оқшауламасының зақымдануына жол бермеңіз.
- Құрылғы ауыстыруға болмайтын батареядан тұрады.
- Тек қана жиынтыққа кіретін саптамаларды пайдаланыңыз.
- Аспап жеткізілімі жиынтықтамасына кірмейтін аксессуарларды пайдалану Сізді кепілді қызмет көрсету құқығынан айырады.





Назар аударыңыз! Қызмет мерзімі аяқталғаннан кейін, аспапты тұрмыстық қалдықтармен бірге шығарып тастамаңыз. Одан әрі кәдеге жарату үшін, оны мамандандырылған пунктке тапсырыңыз. Сіз осылай қоршаған ортаны қорғауға көмектесесіз. Пайдаланылған аккумуляторлық батареяларды тұрмыстық қоқыспен тастамаңыз.

Батареяларды отқа тастамаңыз, себебі олар жарылуы мүмкін. Пайдаланылған аккумуляторлық батареялар жойылуы тиіс. Бұл аспапта батарея алынбайды, сондықтан талап жалпы барлық аспапқа қатысты.

Назар аударыңыз!

Кез келген сипаттағы ақаулықтар пайда болғанда POLARIS авторландырылған қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.

3. ОСЫ АСПАП ҚАУІПСІЗДІГІ БОЙЫНША АРНАЙЫ НУСҚАУЛАР

- Осы аспап емдік немесе медициналық құрал болып табылмайды. Бұл тұрмыстық мақсаттағы өнім. Пайдалану кезіндегі барлық көрсетімдер, қарсы көрсетімдер және ықтимал асқынулар жөнінде осы құрылғыны пайдалануды бастарға дейін медициналық персоналдан кеңес алыңыз.
- Ирригатор электромагниттік жабдыққа арналған қауіпсіздік, стандарттар талаптарына сәйкес келеді. Егер Сізде жүрекширатқыштар және басқа имплантталған құрылғылар жөнінде қандай да бір сұрақтарыңыз болса, ирригаторды пайдаланар алдында өзіңіздің дәрігеріңізбен немесе имплантталған құрылғылар өндірушілерінен кеңес алуды сұраймыз.
- Бұл өнім тістегі өңезді кетіруге және тісті күнделікті мұқият тазалауға арналған.
- Оны басқа мақсаттарда пайдаланбауды сұраймыз. Егер Сіз өзіңізді жайсыз сезінсеңіз немесе ауырысыңғанды сезінсеңіз, бұл өнімді пайдалануды тоқтатыңыз және дәрігерге жүгінііңіз.
- Егер сізде қандай бір медициналық проблемаларыңыз бар болса, ирригаторды пайдаланар алдында дәрігермен кеңесіңіз.
- Аспапты ыдыс жуатын машинада жумауды сұраймыз.
- Ирригатордың түпнұсқа емес қондырмаларын пайдаланбауды сұраймыз.
- Аспапты ауаның теріс температураларында сақтауға қатаң түрде болмайды.
- Іске қосылған ирригаторды қолдан түсірмеңіз және оны қатты беттерге қоймаңыз, өйткені жұмыс істеп тұрған аспап құлап, зақымдануы мүмкін.
- Аспап ағынын тілдің астына, құлаққа, мұрынға және басқа да нәзік аймақтарға бағыттамаңыз. Аспап қатты су ағынын туғызады, ол терінің және шырышты қабықшалардың бүтіндігін бұзуы мүмкін.
- Аспапты пайдаланар алдында ауыз қуысынан барлық бөгде заттарды (пирсинг, зергерлік әшекейлер және т. б.) алып қойыңыз
- Егер сіздің ауыз қуысыңызда ашық жаралар бар болса, ирригаторды пайдаланбаңыз.
- Тіс дәрігерінде кез келген араласуды өткізер алдында процедураларға дейін ирригаторды пайдалану мүмкіндігі туралы одан нақтылап алыңыз.
- Ирригаторды пайдаланған кезде алғашқы бірнеше күнде қызыл иектің болымсыз қанауы байқалуы мүмкін. Егер қан ағу жұмсақ режимде 1 апта пайдаланғаннан кейін жалғасатын болса, ирригаторды пайдалануды тоқтатыңыз және кеңес алу үшін тіс дәрігеріне жүгінііңіз.
- Аспап резервуарын таза ауыз судан басқа ешқандай сұйықтықтармен толтырмаңыз.
- Ирригаторды әр пайдаланудан кейін суға арналған резервуардан сұйықтық қалдықтарын ағызыңыз.
- Пайдалануда болған ирригаторды жылытылмайтын үй-жайда теріс температураларда сақтауға тыйым салынады.

4. ПАЙДАЛАНУ САЛАСЫ


- Аспап осы Нұсқаулыққа сәйкес тек қана тұрмыстық пайдалануға арналған. Аспап өнеркәсіптік және коммерциялық пайдалануға арналмаған.
- Өндіруші қате пайдалану немесе осы Пайдалану нұсқаулығында көзделмеген мақсатта нәтижесінде туындаған шығын үшін жауапкершілік алмайды.

5. ЖИЫНТЫҚТАМА

1. Аспап (корпус)	1 дана.
2. Ауысымдық классикалық саптамалар	2 дана.
3. Ортодонтық ауысымдық саптама	1 дана.
4. Пародонтологиялық ауысымдық саптама	1 дана.
5. Тілге арналған ауысымдық саптама	1 дана.
6. USB сым	1 дана.
7. Зарядтау адаптері	1 дана.
8. Жол тысқабы	1 дана.
9. Пайдалану жөніндегі нұсқаулық	1 дана.

6. АСПАПТЫҢ СИПАТТАМАСЫ

- Ирригатор ауыз қуысына күтім жасауға, тісаралық аралықтарды тазалауға, қысыммен берілетін судың шағын ағынымен өңезді кетіруге арналған. Сонымен қатар импланттар, брекetter, тіссауыттар, көпірлер бар болғанда гигиена сақтауға; қызылиекті уқалаудың көмегімен сауықтыруға арналған.

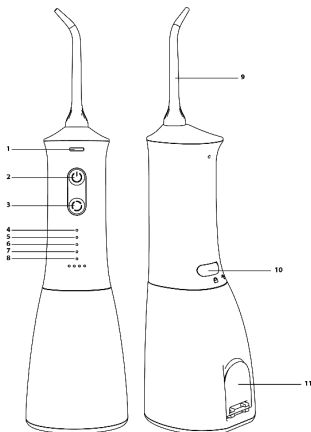

1. Саптаманы бекіту батырмасы
2. Қосу/өшіру түймесі
3. Су беру режимдері мен қарқындылығын ауыстыру түймесі
4. Soft режимінің индикаторы
5. Normal режимінің индикаторы
6. Strong режимінің индикаторы
7. Pulse режимінің индикаторы
8. Заряд деңгейінің индикаторы
9. Саптама
10. USB порт
11. Суға арналған резервуардың құю тесігі

Саптамалар

Базалық жиынтықтамада 5 қондырма:

- классикалық 2 дана,
- ортодонттық 1 дана,
- пародонтологиялық 1 дана.
- тілді тазалауға арналған 1 дана;



**Классикалық
саптама**



**Ортодонттық
саптама**



**Пародонтологиялық
саптама**




**Тіл тазалауға
арналған саптама**

Классикалық саптама

бактериялар мен тамақ бөлшектерінен тіс аралықтарын тазартады; жасанды құрылымдар болған кезде, тамақ қалдықтарын кетіруге жарамды.

Ортодонттық саптама

көпірлерді, жақшаларды, тәждерді, жасанды құрылымдардың барлық элементтерін тазалауға жарамды.

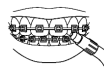

Пародонтологиялық саптама

имеет мягкий наконечник, используется для очищения десневого края.

Тіл тазалауға арналған саптама

бактерияларды, өңезді жояды, тыныс алуды балғындырады.



Назар аударыңыз! Қондырма әр пайдаланушы үшін қатаң жеке болуы тиіс. Қондырмаларды 6 ай үнемі пайдаланғаннан кейін ауыстыру ұсынылады.

Жұмыс режимдері және қарқындылық деңгейі

Жұмыс режимдерін ауыстыру режимдерді ауыстыру түймесін ретімен басу арқылы жүзеге асырылады. Белгілі бір уақыттан кейін әр таңдалған режимнің сөндірілуі автоматты түрде орын алады. Қажет болғанда, құрылғыны қосу/өшіру түймесін қайта басу арқылы мәжбүрлеп өшіруге болады.

1. Normal (қалыпты) режимі су берілуінің орташа қысымымен тіске күнделікті күтім жасауға, тісаралық аралықтарды тазалауға, қызыл иекті уқалауға арналған; қызыл иектері сау адамдар үшін.

2. Soft (жұмсақ) режимі – тістер мен қызыл иектерге жұмсақ әсер ету, сезімтал тістер мен қызыл иектерге ұсынылады; жаңадан бастаушылар үшін.

3. Strong (күшті) режимі – тістер мен қызыл иектерді қарқынды тазалау.

4. Pulse (импульстік) режимі – қызыл иек сызығы мен қызыл иек массажын тазалау үшін.

Сумен жабдықтау қарқындылығы деңгейлерін ауыстыру үшін режимдерді ауыстыру түймесін бірнеше секунд басып тұру керек. мысалы, қарқындылықты 4 деңгейге ауыстыру үшін саусағыңызды

түймеден босатпай, түймені басып тұрыңыз. Осылайша, сумен жабдықтау қарқындылығы деңгейінің индикаторы оң жаққа қарай жылжиды, ал судың қысымы өзгереді.

Құрылғының жұмысы кезінде де, оны қосқанға дейін де қажетті жұмыс режимін және сумен жабдықтау қарқындылығын орнатуға болады. Құрылғы сіз таңдаған жұмыс режимін есте сақтайды, содан кейін ол сол режимде болады.

Назар аударыңыз!

Аспап ~ 120 сек өткеннен кейін автоматты түрде сөнеді.



7. ЖҰМЫСҚА ДАЙЫНДЫҚ

1. Бүкіл қаптау материалды алып тастаңыз.
2. **Назар аударыңыз!** Бірінші рет пайдалану үшін құрылғыны толығымен зарядтаңыз (шамамен 3,5 сағат). Зарядтау кезінде құрылғыны пайдалануға **БОЛМАЙДЫ**.
3. **Ирригаторды құрастыру.** Ұштықты аспаптың жоғарғы бөлігіне сипатты шыртыл естілгенше орнатыңыз.



4. **Режимді таңдау** "Режимдерді ауыстыру" түймесін басыңыз
5. **Қарқындылықты таңдау** "Режимдерді ауыстыру" түймесін басып, ұстап тұрыңыз.
6. **Қосу.** Саптамасы бар құрылғыны аузыңызға әкеліп қуат түймесін басыңыз.
7. **Саптаманы ауыстыру.** Құрылғыны өшіріңіз Саптаманы құлыптау түймесін басып тұрып, саптаманы құрылғының корпусынан жоғары қарай тартыңыз

Ирригаторды қуаттандыру.

Адаптерде көрсетілген кернеудің желі кернеуіне сәйкес келетініне көз жеткізіңіз.

- USB кабелін адаптерге және құрылғының корпусындағы USB портына қосыңыз, содан кейін адаптерді желіге қосыңыз. Индикатор заряды біркелкі жыпылықтай бастайды.
- Құрылғыны 3-4 сағат ішінде зарядтаңыз. Алғашқы рет пайдаланғанда құрылғыны толығымен зарядтаңыз.
- Зарядтау барысында индикатор қызыл түспен жыпылықтайды. Құрылғы толығымен зарядталғанда – индикатор жыпылықтауын тоқтатады және үзіліссіз жасыл жарықпен жанып тұратын болады.
- Батареяның толық зарядталуынан кейін аспаптың үздіксіз жұмыс істеу уақыты шамамен 80 минут құрайды.
- Егер аспап жұмыс істеп тұрған кезде зарядтау индикаторы үнемі қызыл түспен жанып тұратын болса, бұл батарея зарядтауды керек етеді дегенді көрсетеді. Батареяны қайталап қуаттандыруды сұраймыз.

Аспапты дұрыс пайдаланғанда Сіз литий батареясының қызмет ету мерзімін ұзартасыз.

8. АСПАПТЫ ПАЙДАЛАНУ.

1. Суды резервуарға құятын тесік арқылы құйыңыз:

- суға арналған резервуардың қақпақшасын ашыңыз
- суға арналған резервуарды тігінен ұстаңыз және резервуарды суға толтырыңыз
- суға арналған резервуардың қақпақшасын жабыңыз



Назар аударыңыз! Осы кезде құрылғының өшірілгеніне көз жеткізіңіз

Резервуарға су құйған кезде аспап сөндірілген болуы керек.

Аспапты пайдалану үшін таза ағынды салқын немесе жылы су (40°C дейін) ұсынылады. Егер сіздердің өңірлеріңіздегі судың сапасы нашар болса, онда сүзгіленген суды пайдаланыңыз.



Ирригатордың сынуына жол бермеу үшін пайдалануға тыйым салынады:

- Құрамында қалқымалы бөлшектер бар заттар мен ерітінділерді (қайнатпалар, суспензиялар және т. б.)
- Құрамында май бар ерітінділерді
- Антисептикалық және спиртті ерітінділерді
- Тұзды ерітінділерді
- Ауызды шаюға арналған сұйықтықтарды, ирригаторға арналған арнайы ерітінділер мен шайғыштарды қоспағанда.



2. Аспапты іске қосу және сөндіру үшін сөндірудің қосу/өшіру түймесін басыңыз

Саптамасы бар құрылғыны аузыңызға әкеліп қуат түймесін басыңыз.



3. Режимді таңдау және ауыстырып-қосу режимдерді ауыстырып-қосу түймесін қысқа басумен жүзеге асырылады.

Ирригаторда тазалаудың 4 режимі бар. Аспапты алғашқы рет пайдаланғанда SOFT режимін таңдау ұсынылады. Бұл ирригациялық тазалауға бейімделуге және қызыл иектің қабынуы мен қанауына жол бермеуге көмектеседі.




Аспап Сіз соңғы рет пайдаланған жұмыс режимін жадта сақтап қалады және келесі пайдалануда ол осы режимде болады. Қажет болғанда, жұмыстың басқа режимін таңдаңыз.

4. Сумен жабдықтау қарқындылығы деңгейін өзгерту үшін "режимдерді ауыстыру" түймесін бірнеше секунд басып тұрыңыз. Егер сіз келесі 4-деңгейге ауысқыңыз келсе, индикатор оңға қарай жылжи бастағанша түймені басып тұрыңыз.

5. **Саптамаларды ауыстыру.** Құрылғыны өшіріңіз Саптаманы құлыптау түймесін басып тұрып, саптаманы құрылғының корпусынан жоғары қарай тартыңыз


- Тісті әр тазалау алдында ұштықты ағынды сумен жуып-шайыңыз.
- Пайдалану кезінде ирригатор су ағынының тоқтап қалуын болдырмау үшін, тік немесе сәл көлбеу болуы керек.
- Суға толған ирригаторды саптамасыз пайдаланбаңыз. Бұл оның сынуына әкелуі мүмкін.
- Резервуары сусыз болған құрылғыны іске қоспаңыз, су қалдықтарын ағызу және резервуарды құрғату қажет болған жағдайларды қоспағанда. Құрылғының сусыз жұмыс істеуі оның сынуына немесе аспаптың қызмет ету мерзімінің қысқаруына әкелуі мүмкін.

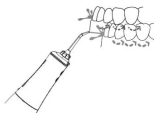


Ауыз қуысын тазалау процесі:

- шұңғылшаның үстіне еңкейіңіз және аспап ұштыған ауызға салыңыз
- аспап аузыңызда болғанда аспапты іске қосыңыз
- шашырауға жол бермей, бірақ судың ауыздан шұңғылшыға ағуына жол бере отырып, еріндеріңізді ышынара жабыңқыраңыз
- ұшын қызыл иек сызығына 90 градус бұрышпен бағыттаңыз.
- артқы тістерден бастаңыз, тісаралық аралықтарда тоқтап, қызыл иек сызығының бойымен жылжыңыз.

Тістің айналасындағы және тістер арасындағы барлық жерлер тазаланғанша жалғастырыңыз.

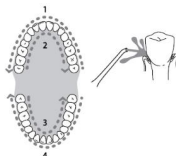

- Эргономикалық дизайн және 360-қа бұрылмалы ұштық су ағынын ауыз қуысының барлық аймақтарына жеңіл қолжетімді болуы үшін бақылауға мүмкіндік береді.
- Әсер етудің талап етілетін қарқындылығына байланысты саптамадан тіске дейінгі қашықтықты пайдаланушы өзі анықтайды
- Тістер арасындағы жерлер мен брекеттердің айналасында ерекше абайлық сақтаңыз.
- Ағынды тура пародонттық қалташаға бағыттамаңыз.

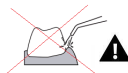


9. ТАЗАЛАУ ЖӘНЕ КҮТІМ

- Резервуардан су қалдықтарын ағызыңыз. Осыдан кейін құрылғыны қысқа уақытқа қосыңыз, ал қалған су тамшылары ұшы арқылы шығады. Резервуарды аптасына 1 рет температурасы 50оС-ден аспайтын сумен жақсылап жуу ұсынылады.



- Су ыдысын алу үшін төмендегі суретте көрсетілгендей суарғыштың жоғарғы жағын сол қолыңызбен ұстаңыз, ал оң қолыңызбен резервуарды оңға бұраңыз, содан кейін төмен қарай тартыңыз.

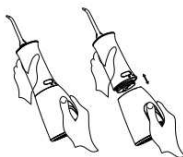

- Егер ұштықтарды ауыстыру қажет болса, осы модельге арналған түпнұсқалық ұштықтарды пайдалануды сұраймыз. 1 ұштықты пайдаланудың қсынылатын уақыты – 6 ай.
- Әр пайдаланғаннан ейін ұштықты және корпусы жылы ағынды сумен жуып-шаю керек. Қажет болған жағдайда бетті тазалау үшін жұмсақ мата мен сабынды пайдалануға болады.

Саптамалардың зарарсыздандырылуын оларды 5-10 минутқа аталған ерітінділердің біріне орналастыру жолымен жүргізуге болады: сутегінің 3% асқын тотығы, хлорексидиннің 1% ерітіндісі. Содан кейін қондырмаларды жылы сумен жуып-шайыңыз.

Сонымен қатар саптамалардың зарарсыздандырылуын ультракүлгін тазартқышта жүргізуге болады.



- Саптамалар, төмендегі суретте көрсетілгендей, суға арналған резервуарда сақталуы мүмкін.
- Ұштық пайдалану барысында деформацияланған жағдайда оны бірден ауыстыру қажет.
- Тазалау үшін органикалық еріткіштерді және қазақ материалдарды, сондай-ақ ирригатор жабынын бүлдіруі мүмкін болатын үшкір заттарды пайдалануға тыйым салынады.
- Аспапты ыдыс жуатын машинада жумауды сұраймыз.



10. САҚТАУ ЖӘНЕ ТАСЫМАЛДАУ

- Электр аспаптары қоршаған ауаның температурасы плюс 40°C-ден аспайтын, салыстырмалы ылғалдылығы 70%-дан аспайтын және қоршаған ортада электр аспаптар материалдарына теріс әсер ететін шаң, қышқылды және басқа да булар болмайтын жабық құрғақ және таза үй-жайда сақталады.
- Егер сіз аспапты ұзақ уақыт бойы пайдаланбайтын болсаңыз, батареяны толығымен қуаттандыруды, оны электр қуат көзінен ажыратыңыз және ирригаторды күн сәулесінің көзі жоқ жабық құрғақ үй-жайда сақтаңыз.
- Егер сіз аспапты бір апта және одан ұзақ пайдаланбауды жоспарласаңыз, суға арналған ыдысты ішінен және сыртынан құрғатыңыз.

ТАСЫМАЛДАУ

- Электр аспаптарды нақты түрдегі көлікте қолданылатын жүктерді тасымалдау ережелеріне сәйкес көліктің барлық түрлерімен тасымалдайды. Аспапты тасымалдағанда, зауыттық түпнұсқа қаптаманы пайдаланыңыз
- Аспаптардың тасымалдануы оларға атмосфералық жауын-шашын мен жегі орталардың тікелей әсер ету мүмкіндігін болдырмауы тиіс.

КӘДЕГЕ ЖАРАТУ БОЙЫНША ТАЛАПТАР

Ескертпе: Электр құралының пайдалану мерзімі аяқталғаннан кейін оны әдеттегі тұрмыстық қалдықтармен бірге тастамай, ресми жинау пунктіне кәдеге жаратуға жіберіңіз. Осылайша, Сіз қоршаған ортаны сақтауға көмектесесіз.

Бұйымдарды кәдеге жарату кезінде пайда болатын қалдықтар белгіленген тәртіппен және салалық нормативтік құжаттаманың қолданыстағы талаптары мен нормаларына сәйкес, оның ішінде СанЕЖН 2.1.7.1322-03 «Өндіріс және тұтыну қалдықтарын орналастыруға және залалсыздандыруға қойылатын гигиеналық талаптарға» сәйкес кейінгіде кәдеге жаратумен міндетті жинауға жатады

11. ЕГЕР СІЗДЕ МӘСЕЛЕ ТУЫНДАҒАН БОЛСА

Егер қандай болса да болымсыз мәселе туындайтын болса, әдетте оның пайда болуының себебі табылғанда, ол оңай шешілуі мүмкін.

МӘСЕЛЕ	ЫҚТИМАЛ СЕБЕБІ	ЫҚТИМАЛ ШЕШІМІ
Су аспаптан ақпайды	Ауа тығыны пайда болды	Ұшынан ауаны/суды ауыңызбен тартыңыз
	Саптамадағы су ағынының бітелуі	Саптама мен құрылғыдан суды шайқаңыз
		Саптаманы жаңасына ауыстырыңыз
Суға арналған резервуардан судың ағып кетуі	Тығыздағыш сақина босап кеткен	Сақинаны ауыстырыңыз, қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз
Аспап жұмыс істеген кезде судың қысымы әлсіз	Саптама бұзылған немесе бітелген	Саптаманы ауыстырыңыз
	Кіріктірілген аккумуляторлық батарея заряды төмен	Зарядтағышты қосыңыз және құрылғыға салынған батареяны толығымен зарядтаңыз
Толық зарядталғаннан кейін қысқа жұмыс уақыты	Зарядтау уақыты жеткіліксіз	Аспапты толығымен зарядтаңыз
	Аккумулятор істен шықты	Сервистік орталыққа жүгініңіз
Ұшы мен корпус арасындағы судың ағуы	Тығыздағыш сақинада мәселе бар	Сервистік орталыққа жүгініңіз
	Саптама соңына дейін салынбаған	Саптаманы шығарып, құрылғының шығатын жерінде бөгде заттардың бар-жоғын тексеріңіз. Бекіткіштің ерекше шертілуіне дейін саптаманы корпусқа дейін салыңыз.

Сіздің құралды пайдалану кезінде өрттің, электрлік токпен зақымдану немесе жарақат алу қаупінің, сонымен қатар оның сынуының алдын алу үшін осы құралмен жұмыс кезіндегі сақтықтың негізгі шараларын, сонымен қатар электрлік тұрмыстық техникамен жұмыс кезіндегі қауіпсіздік бойынша жалпы нұсқауларды сақтаңыз.



Назар аударыңыз! Егер Сіз жоғарыда сипатталған қадамдар көмегімен мәселені өз күшіңізбен шеше алмасаңыз, POLARIS өкілетті қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.

12. ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАРЫ

PUF 1005 T – POLARIS сауда маркасының ирригаторы

Адаптердің желілік кернеуі: ~ 100– 240В, ~50/60 Гц

Кернеуі: 5 В

Номинал қауыты: 2,8 Вт

Аспаптағы судың номинал қысымы: 206-827 кПа

Суға арналған резервуардың максималл көлемі: 350 мл

Судың бүлкілдеу жиілігі минутына 1400-1800 импульс

Автосөндірілу: 2 минут жұмыс істегеннен кейін

Зарядтау уақыты: 3-5 сағ

Толық зарядталған аккумуляторда жұмыс істеудің жиынтық уақыты 80 мин дейін.

Литий батареясы 1600 мАсағ

Ылғалға төзімділік IPX7

Қорғау сыныбы - II

Ескертпе: Өзгерістер мен жақсартуларды енгізудің үздіксіз процесінің салдарынан нұсқаулық пен өнім арасында кейбір айырмашылықтар байқалуы мүмкін. Өндіруші пайдаланушы осыған назар аударады деп үміттенеді.

13. СЕРТИФИКАТТАУ ТУРАЛЫ АҚПАРАТ

Бұйым КО ТР 004/2011 «Төмен вольтты құралдардың қауіпсіздігі туралы», КО ТР 020/2011 «Техникалық құралдардың электромагниттік үйлесімдігі», ЕАЭО ТР 037/2016 «Электротехника және радиоэлектроника бұйымдарында қауіпті заттардың қолданудағы шектеулер туралы» талаптардың сәйкестігін растау процедурасынан өткен және Кедендік Одақтың мүше мемлекеттері нарығында бұйымдарды ұстаудың бірыңғай белгісімен таңбаланады.

Сәйкестік сертификатының/декларациясының нөмірі және оның қолданылу мерзімі туралы ақпаратты Сіз POLARIS бұйымын сатып алған жерде немесе өндірушінің Уәкілетті өкілінен ала аласыз.



Бұйымның қызмет көрсету мерзімі: 3 жыл

Кепілдікті мерзімі: сатып алған күннен бастап 3 жыл

Дайындалған күні бұйымның артқы қабырғасындағы паспорттық сәйкестендіру тақтайшасында көрсетілген

Аккумуляторлық батарея (АКБ) шектеулі ресурсы бар және табиғи тозуға бейім компонент болып табылады.

АКБ-ға кепілдікті мерзім: сатып алған күннен бастап 6 ай.

Өткізу ережелері белгіленбеген.

Дайындаушы:

НИНБО ХЭНСФОРТ ОВЕРСИЗ ЭЙША ЛИМИТЕД

Мекенжайы: № 158 Доншан Лю, Хушан Чжидао, Цыси, Чжэцзян провинциясы, ҚХР

Manufacturer: NINGBO HANSFORT OVERSEAS ASIA LIMITED

No. 158 Dongshan Lu, Hushan Jiedao, Cixi City, Zhejiang Province, PRC

Зауытта:

ГУАНДУН РОМАН ТЕХНОЛОДЖИ КО., ЛТД, №.8, Кыюфинг Род, Боди Виладж, Чжан Мутуо Таун, Дунгуань Сити, Гуандун Провинсе, Қытай

At factory:

Guangdong Roman Technology Co., Ltd, No.8, Qifeng Road, Bodi Village, Zhang Mutou Town, Dongguan City, Guangdong Province, China

Қытайда өндірілген.

Өндірушінің РФ және Кедендік Одақтың мүше мемлекеттеріндегі Импорттаушысы және Уәкілетті өкілі: "ЭйДжиАй Электроникс" ЖШҚ, Ресей, 115419, Мәскеу қ., Орджоникидзе көшесі, 11-үй, 3-құрылыс, 4-қабат I-үй-жай 13-бөлме, Тел. +7 (495) 419-11-78
Бірыңғай анықтамалық қызметтің телефоны 8-800-700-11-78

14. КЕПІЛДІКТІ МІНДЕТТЕМЕЛЕР

Бұйым: Ирригатор

Модель: PWF 1005 T

Осы кепілдік бұйымды сатып алудың расталған күнінен бастап 36 ай бойы әрекет етеді және «Тұтынушылардың құқықтарын қорғау туралы» Кедендік одақтың мүше мемлекеттерінің Заңына сәйкес бұйымға кепілдік қызмет көрсетілуін білдіреді.

1. Өндірушінің кепілдік міндеттемелері «POLARIS» сауда белгісімен шығарылатын және кепілдік қызмет көрсету ұсынылатын елдерде өндіруші уәкілетті еткен елдерде сатып алынған барлық модельдерге таралады (сатып алу орнына тәуелсіз).
2. Бұйым пайдалану жөніндегі нұсқаулыққа және қауіпсіздік жөніндегі ережелер мен талаптарды сақтауға қатаң сәйкестікте пайдаланылуы тиіс.
3. Осы кепілдік тауарды тұтынушыға бергеннен кейін пайда болған келесі кемшіліктерге қатысты болмайды:
 - Химиялық, механикалық немесе өзге де әсер ету, бөгде заттардың, сұйықтықтардың, жәндіктердің және олардың тіршілік ету өнімдерінің бұйымның ішіне түсуінен;
 - Бұйымды оның тікелей міндетінен тыс пайдалануында болатын қате пайдаланылуы, сондай-ақ Пайдалану жөніндегі нұсқаулықтың және қауіпсіздік техникасы ережелерінің талаптарын бұза отырып, бұйымды орнату және пайдаланудан;
 - Құрамында минералды заттар көп мөлшерде болатын суды пайдалану салдарынан әк шөгіндісі, су тасы мен қақ шөгінділерінен.
 - Бұйымды ол арналмаған мақсаттарда пайдаланудан;
 - Қалыпты пайдалану, сонымен қатар функционалдық қасиеттеріне әсер етпейтін: сыртқы немесе ішкі беттің механикалық зақымдануы (майысулар, сызаттар, ескірулер), металл түсінің табиғи өзгеруі, оның ішінде құбылмалы және қара дақтардың пайда болуы, сондай-ақ жабынды зақымдалған жерлерде және металдың жабылмаған учаскелерінде металл жемірілуінен;
 - Өндеу бөлшектерінің, қондырмалар мен аксессуарлардың, шамдардың, батареялардың, қорғаныс экрандардың, қоқыс жинағыштардың, тығыздағыш элементтердің, белдіктердің, щеткалардың пайдалану мерзімі шектеулі басқа бөлшектердің және пайдалану барысында табиғи тозуға бейім бөлшектердің тозуы;
 - Авторландырылған сервис орталықтары* болып табылмайтын тұлғалар немесе ұйымдар өндірген бұйымды жөндеуінен;
 - Бұйымның тасымалдау кезіндегі, дұрыс пайдаланбау, сондай-ақ бұйымның конструкциясында көзделмеген модификациялармен немесе өз бетінше жөндеумен байланысты зақымдануларынан.
4. Егер бұйымда паспорттық сәйкестендіру тәктайшасы жоқ болса, немесе ондағы деректер жойылған не түзетілген болса, өндіруші кепілдікті міндеттемелер үшін жауапты болмайды.
5. Осы кепілдік тек қана жеке тұрмыстық қажеттіліктер үшін жарамды және де коммерциялық, өнеркәсіптік немесе кәсіби мақсаттар үшін пайдаланылатын бұйымдарға қолданылмайды.

Назар аударыңыз!! Дайындаушы POLARIS бұйымымен адамдарға, үй жануарларына, қоршаған ортаға тікелей немесе жанама келтірілген зиян немесе егер бұл бұйымды пайдалану және орнату ережелерін немесе шарттарын сақтамау, тұтынушының немесе үшінші тұлғалардың қасақана

немесе абайсыз әрекеттері нәтижесінде болған жағдайда мүлікке келтірілген зиян үшін жауапты болмайды.

POLARIS бұйымдарына техникалық қызмет көрсету, сапаны тексеру, кепілдік және кепілдік жөндеу бойынша барлық сұрақтар бойынша жақын жердегі POLARIS қызмет көрсету орталығына немесе сатушыға – POLARIS өкілетті дилеріне хабарласыңыз

POLARIS бұйымдарына кепілді жөндеуді тек POLARIS авторландырылған сервистік орталықтары жүзеге асырады.

*Компанияның сайтындағы авторландырылған сервистік орталықтарының мекенжайлары: www.polaris.ru

Кепілдік жөндеу кезінде бұйымды сатып алу күнін растау немесе заңда көзделген өзге де талаптарды ұсыну үшін Сізден сатып алу туралы құжаттарды сақтауды сұраймыз.

Мұндай құжаттар POLARIS толтырылған кепілдік талоны, кассалық чек немесе Сатушының түбіртегі, сатып алу күні мен орнын растайтын өзге де құжаттар болып табылуы мүмкін.

Бұйымды сатып алу күнін растайтын құжат ұсынылмаған кезде кепілдік мерзімі бұйым дайындалған күннен бастап есептеледі.

Дайындалған күні бұйымның артқы қабырғасындағы паспорттық сәйкестендіру тақтайшасында көрсетілген

