

polaris

since 1995



PETB 0303

Руководство по эксплуатации / Гарантия
Manual instruction / Guarantee

Электрическая зубная щетка
Модель РЕТВ 0303
Руководство по эксплуатации

Благодарим Вас за выбор продукции торговой марки POLARIS. Наши изделия разработаны в соответствии с высокими требованиями качества, функциональности и дизайна. Мы уверены, что Вы будете довольны приобретением нового изделия нашей фирмы.

Перед началом эксплуатации прибора внимательно прочитайте данное руководство, в котором содержится важная информация, касающаяся Вашей безопасности, а также рекомендации по правильному использованию прибора и уходу за ним.

Сохраните руководство вместе с гарантийным талоном, кассовым чеком, по возможности, картонной коробкой и упаковочным материалом.

Оглавление

1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ	3
2. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ.....	3
3. СПЕЦИАЛЬНЫЕ УКАЗАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ ДАННОГО ПРИБОРА	4
4. СФЕРА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ	5
5. КОМПЛЕКТАЦИЯ.....	5
6. ОПИСАНИЕ ПРИБОРА.....	5
7. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ.....	7
8. ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПРИБОРА.....	8
9. ЧИСТКА И УХОД.....	8
11. ТРЕБОВАНИЯ ПО УТИЛИЗАЦИИ	10
12. ЕСЛИ У ВАС ВОЗНИКЛА ПРОБЛЕМА	10
13. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ЗУБНОЙ ЩЕТКИ	11
14. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ.....	11
15. ИНФОРМАЦИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ	11
16. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	13

1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Настоящее руководство по эксплуатации предназначено для ознакомления с техническими данными, устройством, правилами эксплуатации и хранения электрической зубной щетки POLARIS, модель PETB 0303 (далее по тексту – прибор).

2. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

- Эксплуатация прибора должна производиться в соответствии с «Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей».
- Прибор предназначен исключительно для использования в быту.
- Перед началом использования этого прибора тщательно прочитайте руководство по эксплуатации.
- Каждый раз перед включением прибора осмотрите его. При наличии повреждений прибора и адаптера питания (в комплект не входит) ни в коем случае не включайте адаптер в розетку.
- Прибор и адаптер питания должны храниться так, чтобы они не попадали под воздействие жары, прямых солнечных лучей и влаги.
- Не оставляйте прибор на зарядке без надзора! Если Вы покидаете помещение, всегда отключайте адаптер питания от сети.
- Данный прибор не предназначен для использования людьми (включая детей), у которых есть физические, нервные или психические отклонения или недостаток опыта и знаний, за исключением случаев, когда за такими лицами осуществляется надзор или проводится их инструктирование относительно использования данного прибора лицом, отвечающим за их безопасность. Необходимо осуществлять надзор за детьми с целью недопущения их игр с прибором.
- Держите зарядную базу с адаптером питания подальше от воды. Не помещайте зарядную базу в воду или любую другую жидкость. 
- После очистки устройства и перед подключением его к источнику питания, пожалуйста, убедитесь, что зарядная база полностью высохла.
- Включайте прибор только в источник переменного тока (~). Перед включением убедитесь, что прибор рассчитан на напряжение, используемое в сети.
- **Любое ошибочное включение лишает Вас права на гарантийное обслуживание.**
- Предохраняйте прибор от ударов об острые углы. По окончании эксплуатации, чистке или поломке прибора всегда отключайте его от сети.
- Нельзя переносить прибор, держа его за сетевой провод. Запрещается также отключать прибор от сети, держа его за сетевой провод. При отключении прибора от сети держитесь за корпус адаптера.
- Подключайте прибор к сети только через адаптер питания прибора.
- Замену шнура и адаптера питания в сборе можно производить только на аналогичный оригинальный шнур и адаптер питания от такой же модели, проконсультируйтесь у квалифицированных специалистов - сотрудников сервисного центра. Неквалифицированный ремонт представляет прямую опасность для пользователя.
- После использования никогда не обматывайте провод электропитания вокруг прибора, так как со временем это может привести к излому провода. Всегда гладко расправляйте провод на время хранения.
- Для ремонта прибора могут быть использованы только оригинальные запасные части.
- Не следует использовать прибор после падения, если имеются видимые признаки повреждения. Перед использованием прибор должен быть проверен квалифицированным специалистом.
- Всегда отключайте электрическую зубную щетку из сети, если Вы не пользуетесь устройством.

- Не допускайте соприкосновения сетевого шнура с горячими и острыми поверхностями. Избегайте повреждения изоляции сетевого шнура.
- Используйте только насадки, входящие в комплект.
- Использование аксессуаров, не входящих в комплект поставки лишает Вас права на гарантийное обслуживание.



Внимание! После окончания срока службы не выбрасывайте прибор вместе с бытовыми отходами. Передайте его в специализированный пункт для дальнейшей утилизации. Этим Вы поможете защитить окружающую среду.



Внимание!

При возникновении неисправностей любого характера обращайтесь в Авторизованный сервисный центр POLARIS.

3. СПЕЦИАЛЬНЫЕ УКАЗАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ ДАННОГО ПРИБОРА

- Данный прибор не является лечебным или медицинским инструментом. Это продукт бытового назначения. Обо всех показаниях, противопоказаниях и возможных осложнениях при его использовании, пожалуйста, проконсультируйтесь с медицинским персоналом до начала использования этого устройства.
- Зубная электрическая щетка соответствует требованиям безопасности, стандартам для электромагнитного оборудования. Если у Вас есть какие-либо вопросы о кардиостимуляторах и других имплантированных устройствах, пожалуйста, перед использованием электрической зубной щетки проконсультируйтесь с Вашим врачом или производителями имплантированных устройств.
- Этот прибор предназначен только для чистки зубов, десен и языка.
- Пожалуйста, не используйте его для других целей. Если Вы чувствуете себя не комфортно или болезненно, пожалуйста, прекратите использовать этот прибор и обратитесь к врачу
- Если у вас есть какие-либо медицинские проблемы, пожалуйста, проконсультируйтесь с врачом перед использованием этой зубной щетки.
- Пожалуйста, прекратите использование зубной щетки, если деформированы насадки щетки.
- Пожалуйста, производите замену насадки щетки каждые три месяца.
- Пожалуйста, не мойте насадку щетки в посудомоечной машине.
- Пожалуйста, не используйте не оригинальные насадки щетки.
- Если зубная паста, которую Вы используете, содержит перексид, бикарбонат натрия или другой бикарбонат (часто встречающиеся ингредиенты в отбеливающей зубной пасте), рекомендуется тщательно промывать насадку щетки с мыльной пеной после ее использования каждый раз.
- Не выпускайте из рук включенную зубную щётку и не кладите её на твёрдые поверхности, поскольку работающий прибор может упасть и получить повреждения.
- Не допускается хранение прибора при отрицательной температуре воздуха, хранить только в отапливаемых помещениях.



Не устанавливайте металлические предметы на зарядную базу во время зарядки, чтобы избежать опасности и выхода прибора из строя.


4. СФЕРА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

- Прибор предназначен исключительно для бытового использования в соответствии с данным руководством. Прибор не предназначен для промышленного и коммерческого использования.
- Производитель не несет ответственности за ущерб, возникший в результате неправильного или непредусмотренного настоящим руководством использования.

5. КОМПЛЕКТАЦИЯ

1. Прибор	1 шт.
2. Насадка зубная, мягкая щетина	3 шт.
3. Магнитная подставка (зарядная база) со встроенным зарядным устройством	1 шт.
5. USB-провод для зарядной базы	1 шт.
6. Руководство по эксплуатации	1 шт.

6. ОПИСАНИЕ ПРИБОРА

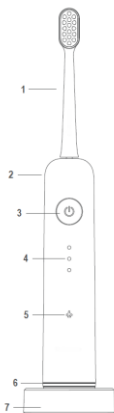

1. Насадка зубная
2. Корпус прибора (зубной щетки)
3. Кнопка вкл./выкл и переключатель режимов
4. Световые индикаторы режима работы
5. Индикатор* режима «полета» (защита от произвольного включения)
6. Световой индикатор заряда встроенной батареи
7. Магнитная подставка со встроенным зарядным устройством

* символ самолета

Режимы работы:

Переключение режимов работы, осуществляется **быстрым двойным** нажатием кнопки вкл/выкл (чтобы удобнее было переключать режимы, не убирая палец с кнопки, быстро с усилием нажимайте на неё. При этом, каждое нажатие будет сопровождаться звуковым сигналом).

В приборе предусмотрен таймер автоматического выключения.

Чтобы принудительно выключить прибор, нажмите кнопку вкл/выкл.

1. Режим Sensitive – «Бережная чистка зубов. Для чувствительных зубов и десен».

26 000 пульсаций/мин; таймер на 2 минуты.

Режим подходит для ежедневного применения.

2. Режим Clean – «Эффективное удаление зубного налета»

30 000 пульсаций /мин; таймер на 2 минуты

Рекомендуется применять не чаще 1 раза в неделю.

3. Режим Deep Clean – «Чистка с осветлением эмали»

33 000 пульсаций /мин; таймер на 2 минуты

Рекомендуется применять не чаще 1 раза в неделю.

4. Режим Gum care – «Уход за деснами»

40 000 пульсаций /мин; таймер на 2 минуты.

Режим подходит для ежедневного применения.

5. Режим Polish – «Полировка»

50 000 пульсаций /мин; таймер на 2 минуты


Рекомендуется применять не чаще 1 раза в неделю.

6. Режим White – «Отбеливание»

60 000 пульсаций /мин; таймер на 2 минуты.

Рекомендуется применять не чаще 1 раза в месяц.

Выбранный режим работы отображается на приборе следующими комбинациями светящихся светодиодов:

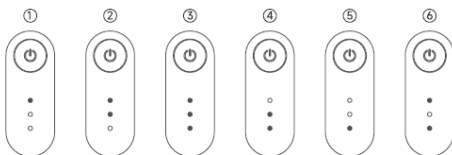

Режим «сна»: Если щетка находится в неподвижном состоянии в течение 5 секунд, она переходит в режим «сна». Щетка вновь активируется, если её поднять с поверхности (независимо от того, находилась ли она в вертикальном или в горизонтальном положении), наклонить или нажать кнопку вкл/выкл. При этом загорится нижний световой индикатор и световые индикаторы режима работы.

Режим «полета»: в данном режиме щетка не будет активироваться если её поднимать/наклонять и даже при нажатии на кнопку вкл/выкл (при нажатии кнопки вкл/выкл, на корпусе прибора загорится нижний световой индикатор и индикатор режима «полета»). Такой режим может пригодиться, если вы берете щетку с собой в дорогу и/или кладете её в сумку, где посторонние предметы могут случайно нажать на кнопку вкл/выкл.

Для активации данного режима, нажмите и удерживайте кнопку вкл/выкл ~~на 3 секунды~~, пока символ "самолет" не начнет мигать зеленым светом. Для разблокировки щетки, также нажмите и удерживайте кнопку вкл/выкл ~~3 секунды~~.

7. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

1. Удалите весь упаковочный материал.
2. Убедитесь, что напряжение, указанное на приборе, соответствует напряжению в сети.
3. Сборка электрической зубной щетки.
Установите насадку щетки на верхнюю часть прибора.
Не применяйте слишком много усилий при креплении насадки на приборе.
Между корпусом прибора и насадкой должен оставаться небольшой зазор.
4. Зарядка электрической зубной щетки.

Прибор, при выходе с завода, имеет некоторый остаточный заряд встроенной аккумуляторной батареи.

Пожалуйста, используйте этот остаточный заряд перед первой полноценной зарядкой (разрядите прибор до интенсивного мигания нижнего индикатора). Если нижний индикатор постоянно мигает и прибор при этом не стоит на зарядной базе, это указывает на то, что встроенная батарея разряжена и требует зарядки. Пожалуйста полностью зарядите батарею. Не убирайте прибор на хранение с разряженной встроенной батареей.

Прибор находится НЕ на магнитной подставке со встроенным зарядным устройством

Световой индикатор (6):

- светится постоянным голубым (синим) цветом: заряд батареи выше 20%
- мигает 1 раз в секунду: заряд батареи равен или ниже 20%
- мигает 1 раз в 0.5 секунды: батарея полностью разряжена, устройство в ближайшее время выключится.

Прибор находится НА магнитной подставке со встроенным зарядным устройством

Световой индикатор (6):


- плавно мигает примерно 1 раз в секунду голубым (синим) цветом: батарея заряжается
 - светит постоянным голубым (синим) цветом: батарея полностью заряжена.
- При правильной эксплуатации прибора, Вы увеличите срок службы встроенной литиевой батареи;

Чтобы зарядить встроенную батарею, поставьте корпус (ручку) зубной щетки на магнитную подставку со встроенным зарядным устройством:-

Подключите подставку к адаптеру питания (не входит в комплект поставки) с помощью провода USB-C,

После того, как Вы подключите магнитную подставку, со встроенным зарядным устройством, и с разряженной зубной щеткой в сеть, должно пройти минимум 30 минут, чтобы щетка включилась. Спустя час, щетка будет готова к работе. Но мы рекомендуем использовать зубную щетку с полностью заряженной батареей. Это увеличит срок использования прибора.

1. Перед каждой чисткой зубов промывайте щетину щетки проточной водой, затем нанесите необходимое количество зубной пасты.

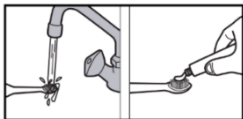

2. Зубная щетка имеет шесть режимов чистки. При первом использовании зубной щетки рекомендуется выбирать режим SENSITIVE.
3. По окончании чистки, тщательно прополощите рот водой, затем промойте зубную щетку. Это позволит удалить бактерии и оставшуюся зубную пасту.

8. ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПРИБОРА



Щетка запоминает последний использованный Вами режим работы и при последующем использовании зубной щетки она будет находится в этом режиме. Для выбора другого – переключите режим на дисплее.




Зубная щетка по окончании 2 мин автоматически выключается сама. Это позволяет чистить зубы не более 2 мин – времени, рекомендованного стоматологами.

Щетка должна быть наклонена под углом примерно 45° в полости рта для того, чтобы качественно выполнить процесс чистки зубов. Рекомендуем мысленно разделить ротовую полость на 4 части, каждую часть необходимо чистить примерно 30 сек, затем переместить щетку в другую часть.

Для удобства контроля этого времени, щетка будет кратковременно (примерно на 1 секунду) прерывать свою работу каждые 30 секунд.

По истечении 2 минут, щетка автоматически остановит свою работу.

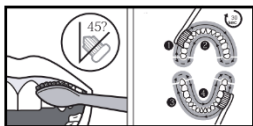

Устройство управляется одной кнопкой. Переключение режимов работы осуществляется двойным кратким нажатием кнопки вкл/выкл.



Рекомендуем менять насадку зубной щетки 1 раз в 3 месяца.




После зарядки встроенной батареи до 100%, щетка проработает без подзарядки до 120 минут.

9. ЧИСТКА И УХОД

- После каждого использования необходимо промыть насадку и ручку щетки тёплой проточной водой. При необходимости можете использовать мягкую ткань и мыло для очистки поверхности.

Запрещается использовать для чистки органические растворители и абразивные материалы, а также острые предметы, которые могут повредить покрытие щетки. После каждого использования снимите насадку щетки. Тщательно очистите верхнюю часть ручки и штифт, чтобы удалить остаток зубной пасты. Далее дайте щетке высохнуть. Это существенно увеличит срок службы прибора.

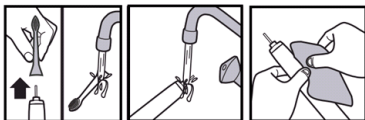

- Если требуется произвести замену насадки, пожалуйста, используйте оригинальные насадки для данной модели щетки.




Пожалуйста, не мойте насадки щетки, ручку (корпус прибора), зарядную базу в посудомоечной машине

10. ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА

- Электроприборы хранятся в закрытом сухом и чистом помещении при температуре окружающего воздуха не выше плюс 40°C с относительной влажностью не выше 70% и отсутствии в окружающей среде пыли, кислотных и других паров, отрицательно влияющих на материалы электроприборов.
- Если Вы не будете использовать электрическую зубную щетку в течение длительного времени, пожалуйста зарядите батарею примерно на половину ёмкости, отключите ее от источника электропитания и храните щетку в закрытом сухом помещении без источника солнечного света.



Не допускается хранение прибора при отрицательной температуре воздуха, хранить только в отапливаемых помещениях.

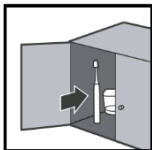

Транспортировка

Электроприборы транспортируют всеми видами транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на транспорте конкретного вида. При перевозке прибора используйте оригинальную заводскую упаковку

Транспортирование приборов должно исключать возможность непосредственного воздействия на них атмосферных осадков и агрессивных сред.

11. ТРЕБОВАНИЯ ПО УТИЛИЗАЦИИ

Примечание: По окончании срока эксплуатации электроприбора не выбрасывайте его вместе с обычными бытовыми отходами, а передайте в официальный пункт сбора на утилизацию. Таким образом, Вы поможете сохранить окружающую среду.

Отходы, образующиеся при утилизации изделий, подлежат обязательному сбору с последующей утилизацией в установленном порядке и в соответствии с действующими требованиями и нормами отраслевой нормативной документации, в том числе в соответствии с СанПиНом 2.1.7.1322-03 «Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления.»

12. ЕСЛИ У ВАС ВОЗНИКЛА ПРОБЛЕМА

Если возникает какая-либо небольшая проблема, она обычно может быть легко решена, когда найдена причина ее возникновения.

ПРОБЛЕМА	ВОЗМОЖНАЯ ПРИЧИНА	ВОЗМОЖНОЕ РЕШЕНИЕ
Вибрация насадки зубной щетки становится слабее	Соединение между насадкой и ручкой щетки слишком плотное	Снимите насадку щетки, а затем установите её заново таким образом, чтобы между насадкой и корпусом оставался зазор ~1мм
После полной зарядки зубной щетки продолжительностью времени работы от батареи очень короткое	Пожалуйста, убедитесь, что щетка размещается вертикально на зарядном устройстве, в противном случае нет должного соединения с источником тока зарядки.	Установите щетку вертикально на зарядную базу. Осмотрите контакты на базе и щетке, при необходимости очистите их. Если проблема не была решена, возможно, пришел конец срока службы аккумуляторной батареи. Обратитесь в сервисный центр для проведения диагностики работы прибора.
После долгого периода неиспользования зубной щетки и включения её в сеть, индикация включения не светится, как раньше	Долгий период неиспользования зубной щетки (6 месяцев и более)	После долгого периода неиспользования зубной щетки, батарея может разрядиться, после включения щетки на зарядку, батарее требуется ~30 мин для того, чтобы щетка возобновила прежний активный режим работы
Зубная щетка не работает	Встроенная батарея разряжена Щетка находится в режиме «полет»	- Зарядите встроенную аккумуляторную батарею - Отключите режим «полет» путем удержания в нажатом положении, в течение 3 секунд, кнопки вкл/выкл

Щетка не заряжается	Закончился срок службы встроенной аккумуляторной батареи Неисправен провод USB-C или адаптер питания	Щетка должна быть утилизирована согласно требованиям по утилизации Замените провод и/или адаптер питания на аналогичный
---------------------	---	--



Во избежание риска пожара, поражения электрическим током или получения травмы при использовании вашего прибора, а также его поломки, строго соблюдайте основные меры предосторожности при работе с данным прибором, а также общие указания по безопасности при работе с электрической бытовой техникой.

Внимание! Если с помощью описанных выше шагов Вы не можете устранить проблему своими силами, обратитесь, пожалуйста, в Авторизованный сервисный центр POLARIS.

13. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ЗУБНОЙ ЩЕТКИ

1. Чистите зубы каждое утро и каждый вечер в течение 2 минут.
2. Чистите зубы через 20 мин после еды. Это позволит защитить эмаль Ваших зубов.
3. Используйте режим SENSITIVE (первый) для чистки полости рта с чувствительными деснами.
4. Используйте зубную нить для удаления остатков пищи из межзубного пространства.
5. Регулярно посещайте стоматолога для обследования полости рта, и профессиональной чистки зубов. Эта процедура позволит удалить зубной налет и зубной камень, что сохранит здоровье ваших зубов.

14. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

PETB 0303 – Электрическая зубная щетка торговой марки POLARIS

Рабочее напряжение: 7.4 В

Номинальная мощность: 6 Вт

Зарядная база

Выход: 5V DC, 1A

Переключение режимов: сенсорное

Режим отображения: LED подсветка

Время зарядки: ~2.5 ч

Время работы без подзарядки: 120 мин

Литиевая батарея 900 mA/h

Влагостойкость IPX7

Класс защиты – III.

Примечание: Вследствие постоянного процесса внесения изменений и улучшений, между инструкцией и изделием могут наблюдаться некоторые различия. Актуальную версию Руководства по эксплуатации, Вы можете найти на сайте www.polaris.ru

15. ИНФОРМАЦИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ

Продукция прошла процедуру подтверждения соответствия требованиям ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств», ТР ЕАЭС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и

радиоэлектроники» и маркируется единым знаком обращения продукции на рынке государств-членов Таможенного Союза.

Информацию о номере сертификата/декларации соответствия и сроке его действия Вы можете получить в месте приобретения изделия POLARIS или у Уполномоченного представителя изготовителя.



Срок службы изделия: 3 года

Гарантийный срок: 3 года со дня покупки

Дата изготовления указана на изделии.

Правила реализации не установлены.

Изготовитель: НИНБО ХЭНСФОРТ ОВЕРСИЗ ЭЙША ЛИМИТЕД

Адрес: № 158 Доншан Лю, Хушан Чжидао, Цыси, Провинция Чжэцзян, КНР

Manufacturer: NINGBO HANSFORT OVERSEAS ASIA LIMITED

No. 158 Dongshan Lu, Hushan Jiedao, Cixi City, Zhejiang Province, PRC

На заводе:

ГУАНДУН РОМАН ТЕХНОЛОДЖИ КО., ЛТД, №.8, Кьюфинг Род, Боди Вилладж, Чжан Мутуо Таун, Дунгуань Сити, Гуандун Провинсе, Китай

At factory:

Guangdong Roman Technology Co., Ltd, No.8, Qifeng Road, Bodi Village, Zhang Mutou Town, Dongguan City, Guangdong Province, China

Импортер: ООО "ЭйДжиАй Электроникс", Россия, 115419, г.Москва, улица Орджоникидзе, д. 11, строение 3, этаж 4 помещение/комната 13, Тел. +7 (495) 419-12-56

Уполномоченный представитель изготовителя в РФ и государствах-членах Таможенного Союза:

ООО "ЭйДжиАй Электроникс", Россия, 115419, г.Москва, улица Орджоникидзе, д. 11, строение 3, этаж 4 помещение/комната 13, Тел. +7 (495) 419-12-56

Телефон единой справочной службы: 8-800-700-11-78

16. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Изделие: Электрическая зубная щетка

Модель: РЕТВ 0303

Настоящая гарантия действует в течение 36 месяцев с подтвержденной даты приобретения изделия и подразумевает гарантийное обслуживание изделия в соответствии с Законами Государств – членов Таможенного Союза «О защите прав потребителей».

Гарантийные обязательства изготовителя распространяются на все модели, выпускаемые под торговой маркой «POLARIS» и приобретенные у уполномоченных изготовителем продавцов, в странах, где предоставляется гарантийное обслуживание (независимо от места покупки).

Изделие должно использоваться в строгом соответствии с руководством по эксплуатации и соблюдением правил и требований по безопасности.

Настоящая гарантия не распространяется на недостатки, возникшие после передачи товара потребителю вследствие:

Химического, механического или иного воздействия, попадания посторонних предметов, жидкостей, насекомых и продуктов их жизнедеятельности внутрь изделия;

Неправильной эксплуатации, заключающейся в использовании изделия не по его прямому назначению, а также установки и эксплуатации изделия с нарушением требований Руководства по эксплуатации и правил техники безопасности;

Отложения известкового осадка, водного камня и накипи из-за использования воды с высоким содержанием минеральных веществ.

Использования изделия в целях, для которых оно не предназначено;

Нормальной эксплуатации, а также естественного износа, не влияющие на функциональные свойства: механические повреждения внешней или внутренней поверхности (вмятины, царапины, потертости), естественные изменения цвета металла, в т.ч. появление радужных и темных пятен, а также - коррозии на металле в местах повреждения покрытия и непокрытых участках металла;

Износа деталей отделки, насадок и аксессуаров, ламп, батарей, защитных экранов, фильтров, накопителей мусора, уплотнительных элементов, ремней, щеток и иных деталей с ограниченным сроком использования и деталей, подверженных естественному износу в процессе эксплуатации;

Ремонта изделия, произведенного лицами или организациями, не являющимися Авторизованными сервисными центрами*;

Повреждений изделия при транспортировке, некорректного его использования, а также в связи с непредусмотренной конструкцией изделия модификациями или самостоятельным ремонтом.

Повреждения ручки зубной щетки, возникшей при замене насадки насадками других фабрик.

Изготовитель не несет гарантийные обязательства, если на изделии отсутствует паспортная идентификационная табличка, либо данные в ней стерты или исправлены.

Настоящая гарантия действительна только для изделий, используемых для личных бытовых нужд, и не распространяется на изделия, которые используются для коммерческих, промышленных или профессиональных целей.

Внимание!! Изготовитель не несет ответственности за возможный вред, прямо или косвенно причиненный изделием POLARIS людям, домашним животным,

окружающей среде, или ущерб имуществу в случае, если это произошло в результате несоблюдения правил или условий эксплуатации и установки изделия, умышленных или неосторожных действий потребителя или третьих лиц.

По всем вопросам, связанным с техническим обслуживанием, проверкой качества, гарантийным и постгарантийным ремонтом изделий POLARIS обращайтесь в ближайший Авторизованный сервисный центр POLARIS или к продавцу – уполномоченному дилеру POLARIS

Гарантийный ремонт изделий POLARIS осуществляют только Авторизованные сервисные центры POLARIS.

*Адреса Авторизованных сервисных центров на сайте Компании: www.polaris.ru

Для подтверждения даты приобретения изделия при гарантийном ремонте или предъявления иных предусмотренных законом требований просим Вас сохранять документы о покупке.

Таковыми документами могут являться заполненный гарантийный талон POLARIS, кассовый чек или квитанция Продавца, иные документы, подтверждающие дату и место покупки.

При не предоставлении документа, подтверждающего дату приобретения изделия, срок гарантии исчисляется с даты изготовления изделия.

Дата изготовления указана на паспортной идентификационной табличке, находящейся на задней стенке изделия.

Электрлік тіс щеткасы
PETB 0303 моделі
Пайдалану жөніндегі нұсқаулық

Сізге POLARIS сауда маркасының өнімін таңдағаныңыз үшін алғысымызды білдіреміз. Біздің бұйымдарымыз сапа, функционалдылық пен дизайнның жоғары талаптарына сәйкес әзірленген. Сіз біздің фирмамыздың жаңа өнімін сатып алғаныңызға риза болатыңызға сенімдіміз.

Аспапты пайдалануды бастар алдында Сіздің қауіпсіздігіңізге қатысты маңызды ақпараты бар осы нұсқаулықты, сондай-ақ аспапты дұрыс пайдалану және оны күту жөніндегі ұсыныстарды мұқият және толықтай оқып шығыңыз.

Нұсқаулықты кепілдік талонымен, кассалық чекпен, мүмкіндігінше, картон қораппен және орауыш материалмен бірге сақтап қойыңыз.

Мазмұны

1. ЖАЛПЫ АҚПАРАТ.....	2
2. ҚАУІПСІЗДІК БОЙЫНША ЖАЛПЫ НҰСҚАУЛАР.....	2
3. ОСЫ АСПАП ҚАУІПСІЗДІГІ БОЙЫНША АРНАЙЫ НҰСҚАУЛАР.....	3
4. ПАЙДАЛАНУ АЯСЫ.....	4
5. ЖИЙІНТЫҚТАМА.....	4
6. АСПАП СИПАТЫ.....	4
7. ЖҰМЫСҚА ДАЙЫНДЫҚ.....	6
8. АСПАПТЫ ПАЙДАЛАНУ.....	7
9. ТАЗАЛАУ ЖӘНЕ КҮТІМ.....	7
11. КӨДЕГЕ ЖАРАТУ БОЙЫНША ТАЛАПТАР.....	9
12. ЕГЕР СІЗДЕ МӘСЕЛЕ ТУЫНДАҒАН БОЛСА.....	9
13. ТІС ЩЕТКАСЫН ПАЙДАЛАНУ ЖӨНІНДЕГІ ҰСЫНЫМДАР.....	10
14. ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАРЫ.....	10
15. СЕРТИФИКАТТАУ ТУРАЛЫ АҚПАРАТ.....	10
16. КЕПІЛДІК МІНДЕТТЕМЕЛЕРІ.....	12

1. ЖАЛПЫ АҚПАРАТ

Пайдалану жөніндегі осы нұсқаулық POLARIS электрлік тіс щеткасының, PETB 0303 моделі (бұдан әрі мәтін бойынша – аспап) техникалық деректерімен, құрылымымен, пайдалану және сақтау ережелерімен танысуға арналған.

2. ҚАУІПСІЗДІК БОЙЫНША ЖАЛПЫ НҰСҚАУЛАР

- Аспапты пайдалану «Тұтынушылардың электр қондырғыларын техникалық пайдалану ережелеріне» сәйкес жүргізілуі керек.
- Аспап тек қана тұрмыста пайдалануға арналған.
- Осы аспапты пайдалануды бастар алдында «Пайдалану жөніндегі нұсқаулықты» мұқият оқып шығыңыз.
- Аспапты іске қосар әр кезде, оны қарап тексеріп шығыңыз. Егер аспап пен қуат адаптеріне зақым келсе (жинаққа кірмейді), ешқандай жағдайда адаптерді розеткаға қоспаңыз.
- Аспап және қуат беру адаптері олар ыстықтың, тура күн сәулелерінің және ылғалдың әсеріне ұшырамайтындай етіп сақталуы тиіс.
- Зарядта тұрған аспапты қадағалаусыз қалдырмаңыз! Егер сіз үй-жайдан шығып кетсеңіз, қуат беру адаптерін ылғи желіден ажыратып қойыңыз.
- Бұл құрал физикалық, жүйке немесе психикалық ауытқулары бар немесе тәжірибе мен білімнің жеткіліксіздігі бар адамдардың (балаларды қоса алғанда) пайдалануына арналмаған, мұндай адамдарға қадағалау жүзеге асырылатын немесе олардың қауіпсіздігіне жауап беретін адамның осы құралды пайдалануына қатысты оларға нұсқау беретін жағдайларды қоспағанда. Балалардың аспаппен ойнауына жол бермеу мақсатында қадағалауды жүзеге асыру қажет.
- Қорек адаптері бар зарядтау базасын судан алыс ұстаңыз. Қуаттандыру базасын суға немесе басқа сұйықтыққа салмаңыз.
- Құрылғыны тазалағаннан кейін және оны қуат көзіне қосар алдында қуаттандыру базасы толығымен кепкеніне көз жеткізуді сұраймыз.
- Аспапты тек айнымалы ток көзіне (~) қосыңыз. Қосар алдында аспапты желіде қолданылатын кернеуге арналған екеніне көз жеткізіңіз.
- **Кез келген қате қосу Сізді кепілдікті қызмет көрсету құқығынан айырады.**
- Құралды өткір бұрыштарға соғылудан сақтаңыз. Пайдалану аяқталған кезде, құрал сынғанда немесе тазалау кезінде, оны үнемі желіден өшіріп отырыңыз.
- Аспапты желілік баусымынан ұстап тасымалдауға болмайды. Сондай-ақ аспапты желілік баусымынан ұстап, оны желіден ажыратуға тыйым салынады. Аспапты желіден ажыратқанда оны адаптер корпусынан ұстаңыз.
- Аспапты желіге тек қана аспаптың қуат адаптері арқылы қосыңыз.
- Қуаттандыруға арналған баусымды және адаптерді ауыстыруды тек дәл осы үлгінің ұқсас түпнұсқа жинағына ғана жүргізу керек, сервистік орталықтың білікті маман-қызметкерлерінен кеңес алыңыз. Біліксіз жөндеу пайдаланушы үшін тікелей қауіп төндіреді.
- Пайдаланудан кейін ешқашанда да электрлік қуат көзі желісін құралды айналдырып орамаңыз, себебі уақыт өте келе сымның сынуына әкелуі мүмкін. Сақтау уақытында сымды үнемі түзулеп ораңыз.
- Аспапты жөндеу үшін тек түпнұсқа қосалқы бөлшектер пайдаланылуы мүмкін.
- Аспапты құлағаннан кейін, егер зақымданудың көзге көрінетін белгілері бар болса, пайдаланбау керек. Аспап пайдаланар алдында білікті маманмен тексерілуі тиіс.
- Егер Сіз электр тіс щеткасын пайдаланбасаңыз, құрылғыны әрқашан желіден ажыратып қойыңыз.
- Желілік баусымның ыстық және үшкір беттермен жанасуына жол бермеңіз. Желілік баусым оқшауламасының зақымдануына жол бермеңіз.
- Тек қана жиынтыққа кіретін саптамаларды пайдаланыңыз.
- Аспап жеткізілімі жиынтықтамасына кірмейтін аксессуарларды пайдалану Сізді кепілдікті қызмет көрсету құқығынан айырады.





RoHS

Назар аударыңыз! Қызмет мерзімі аяқталғаннан кейін, аспапты тұрмыстық қалдықтармен бірге тастамаңыз. Одан әрі кәдеге жарату үшін, оны арнайы пунктке тапсырыңыз. Осы арқылы сіз қоршаған ортаны қорғауға көмектесесіз.



Назар аударыңыз!

Кез келген сипаттағы ақаулықтар пайда болғанда POLARIS авторланған сервистік орталығына хабарласыңыз.

3. ОСЫ АСПАП ҚАУІПСІЗДІГІ БОЙЫНША АРНАЙЫ НҮСҚАУЛАР

- Осы аспап емдік немесе медициналық құрал болып табылмайды. Бұл тұрмыстық мақсаттағы өнім. Пайдалану кезіндегі барлық көрсетімдер, қарсы көрсетімдер және ықтимал асқынулар жөнінде осы құрылғыны пайдалануды бастарға дейін медициналық персоналдан кеңес алыңыз.
- Электрлік тіс щеткасы электромагниттік жабдыққа арналған қауіпсіздік, стандарттар талаптарына сәйкес келеді. Егер Сізде жүрекширатқыштар және басқа имплантталған құрылғылар жөнінде қандай да бір сұрақтарыңыз болса, электрлік тіс щеткасын пайдаланар алдында өзіңіздің дәрігеріңізбен немесе имплантталған құрылғылар өндірушілерінен кеңес алуды сұраймыз.
- Бұл аспап тек қана тістерді, қызыл иекті және тілді тазалауға арналған.
- Оны басқа мақсаттарда пайдаланбауды сұраймыз. Егер Сіз өзіңізді жайсыз сезінсеңіз немесе ауырсынғанды сезінсеңіз, бұл өнімді пайдалануды тоқтатыңыз және дәрігерге жүгініңіз.
- Егер сізде қандай бір медициналық проблемаларыңыз бар болса, осы тіс щеткасын пайдаланар алдында дәрігермен кеңесуді сұраймыз.
- Егер щетка қондырмалары деформацияланған болса, тіс щеткасын пайдалануды тоқтатуды сұраймыз.
- Щетка қондырмасын әр үш ай сайын ауыстыруды сұраймыз.
- Щетка қондырмасын ыдыс жуатын машинада жумауды сұраймыз.
- Щетканың түпнұсқа емес қондырмаларын пайдаланбауды сұраймыз.
- Егер Сіз пайдаланатын тіс паста құрамында пероксид, натрий бикарбонаты немесе басқа бикарбонат (ағартқыш тіс пастада жиі кездесетін ингредиенттер) бар болса, щетка қондырмасын сабынды сумен оны пайдаланған әр кезден кейін мұқият жуып-шаю ұсынылады.
- Іске қосылған тіс щеткасын қолдан түсірмеңіз және оны қатты беттерге қоймаңыз, өйткені жұмыс істеп тұрған аспап құлап, зақымдануы мүмкін.
- Аспапты ауаның теріс температурасында сақтауға болмайды, тек қана жылытылатын үй-жайларда сақтау керек.



Аспаптың қауіптілігі мен істен шығуын болдырмау үшін, зарядтау кезінде металл заттарды зарядтау базасына қоймаңыз.


4. ПАЙДАЛАНУ АЯСЫ

- Аспап осы нұсқаулыққа сәйкес тек қана тұрмыстық пайдалануға арналған. Аспап өнеркәсіптік және коммерциялық пайдалануға арналмаған.
- Өндіруші қате пайдалану немесе осы Пайдалану нұсқаулығында көзделмеген мақсатта нәтижесінде туындаған шығын үшін жауапкершілік алмайды.

5. ЖИЫНТЫҚТАМА

- | | |
|---|---------|
| 1. Аспап | 1 дана. |
| 2. Тіс саптамасы, жұмсақ қылшық | 3 дана. |
| 3. Зарядтау құрылғысы кіріктірілген магниттік төсем зарядтау базасы | 1 дана. |
| 5. Зарядтау базасына арналған USB-сым | 1 дана. |
| 6. Пайдалану жөніндегі нұсқаулық | 1 дана. |

6. АСПАП СИПАТЫ

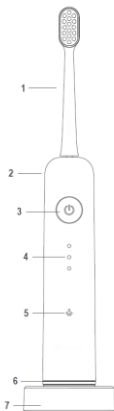

1. Тіс саптамасы
2. Аспап (тіс щеткасының) корпусы
3. Қосу/өшіру түймесі және режимдерді ауыстырып-қосқыш
4. Жұмыс режимінің жарық индикаторлары
5. «Ұшу» режимінің индикаторы* (ерікті қосудан қорғау)
6. Кіріктірілген батарея зарядының индикаторы
7. Кіріктірілген зарядтау құрылғысы бар магниттік төсем

* ұшақ символы

Жұмыс режимдері:

Жұмыс режимдерін ауыстыру қосу/өшіру түймесін **екі рет жылдам басу** арқылы жүзеге асырылады (саусағыңызды түймеден шығармай режимдерді ауыстыруды ыңғайлы ету үшін оны тез басыңыз. Бұл жағдайда әр басу дыбыстық сигналмен бірге жүреді).

Аспап автоматты өшіру таймері бар.

Аспапты мәжбүрлеп өшіру үшін, Қосу/Өшіру түймесін басыңыз.

1. Sensitive режимі – «Тісті ұқыпты тазалау». Сезімтал тістер мен қызылиек үшін» режимі.

26 000 пульсация/мин; таймер 2 минут.

Режим күнделікті пайдалануға жарамды.

2. Clean режимі – «Тіс қағын тиімді кетіру»

30 000 пульсация /мин; таймер 2 минут

Аптасына 1 реттен артық пайдаланбау ұсынылады.

3. Deep Clean режимі – «Тазалау және эмальды мөлдірлету»

33 000 пульсация /мин; таймер 2 минут

Аптасына 1 реттен артық пайдаланбау ұсынылады.

4. Gum care режимі – «Қызылиек күтімі»

40 000 пульсация/мин; таймер 2 минут.

Режим күнделікті пайдалануға жарамды.

5. Polish режимі – «Жылтырату»

50 000 пульсация/мин; таймер 2 минут


Аптасына 1 реттен артық пайдаланбау ұсынылады.

6. White режимі – «Ағарту»

60 000 пульсация/мин; таймер 2 минут.

Айына 1 реттен артық пайдаланбау ұсынылады.

Таңдалған жұмыс режимі аспапта келесі жарықдиодты комбинациялармен көрсетіледі:

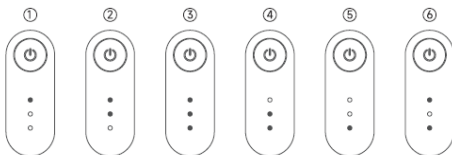

«Ұйқы» режимі: Егер щетка 5 секунд бойы қозғалыссыз тұрса, щетка «ұйқы» режиміне өтеді. Щетка бетінен көтерілгенде (тік немесе көлденең күйде болғанына қарамай), еңкейтілгенде немесе Қосу/Өшіру түймесін басқанда, қайта іске қосылады. Бұл ретте төменгі жарық индикаторы және жұмыс режимінің жарық индикаторлары жанады.

«Ұшу» режимі: бұл «ұшу» режимінде егер щетка көтерілсе/еңкейсе, тіпті Қосу/Өшіру түймесін басқанда да іске қосылмайды (Қосу/Өшіру түймесін басқанда, аспап корпусында төменгі жарық индикаторы және «ұшу» режимінің индикаторы жанады). Егер сіз щетканы өзіңізбен бірге алып жүрсеңіз және/немесе оны сөмкеге салсаңыз, бұл режим пайдалы болуы мүмкін, онда бөгде заттар кездейсоқ қосу/өшіру түймесін басуы мүмкін.

Бұл режимді іске қосу үшін «ұшақ» белгісі жасыл шамды жыпылықтай бастағанша қосу/өшіру түймесін басып, **3 секунд** ұстап тұрыңыз. Щетканың бұғатын ашу үшін Қосу/Өшіру түймесін басып, **3 секунд** ұстап тұрыңыз.

7. ЖҰМЫСҚА ДАЙЫНДЫҚ

1. Бүкіл қаптау материалын алып тастаңыз.
2. Аспапта көрсетілген кернеу желі кернеуіне сәйкес келетініне көз жеткізіңіз.
3. Электрлік тіс щеткасын құрастыру.
Щетка саптамасын аспаптың жоғарғы жағына орнатыңыз.
Саптаманы аспапқа бекіту кезінде, тым көп күш қолданбаңыз. Аспап корпусы мен саптаманың арасында кішкене алшақтық болуы керек.
4. Электрлік тіс щеткасын зарядтау.

Зауыттан шыққан кезде, аспапта кіріктірілген аккумулятордың қалдық заряды болады.

Бірінші толық зарядтау алдында осы қалдық зарядты пайдаланыңыз (аспапты төменгі жарық қатты жыпылықтағанша зарядсыздандырыңыз).

Егер төменгі индикатор үнемі жыпылықтаса және аспап зарядтау базасында тұрмаса, бұл кіріктірілген батареяның заряды таусылғанын және зарядтауды қажет ететіндігін көрсетеді. Батареяны толық зарядтаңыз. Кіріктірілген батареясы таусылған аспапты сақтауға қоймаңыз.

Аспап кіріктірілген зарядтау құрылғысы бар магниттік төсемде емес

Жарық индикаторы (6):

- тұрақты көгілдір (көк) түспен жарқырайды: батарея заряды 20%-дан жоғары
- секундына 1 рет жыпылықтайды: батарея заряды 20%-ға тең немесе одан төмен
- 0.5 секундта 1 рет жыпылықтайды: батарея толық таусылды, аспап жақын арада өшеді.

Аспап кіріктірілген зарядтағышы бар магниттік төсемде орналасқан

Жарық индикаторы (6):


- көгілдір (көк) түспен секундына шамамен 1 рет жыпылықтайды: батарея зарядталады
 - тұрақты көгілдір (көк) түспен жарқырайды: батарея толық зарядталған.
- Егер аспап дұрыс жұмыс істесе, сіз кіріктірілген литий батареясының қызмет ету мерзімін ұзартасыз;

Кіріктірілген батареяны зарядтау үшін тіс щеткасының корпусын (тұтқасын) кіріктірілген зарядтағышпен магниттік тірекке қойыңыз:

USB-C сымы арқылы төсемді қуат адаптеріне қосыңыз (жеткізу жиынтығына кірмейді)

Магниттік төсемді кіріктірілген зарядтағышпен және бос тіс щеткасымен желіге қосқаннан кейін, щетканы қосу үшін кем дегенде 30 минут кетуі керек. Бір сағаттан кейін щетка дайын болады. Бірақ біз толық зарядталған батареясы бар тіс щеткасын пайдалануды ұсынамыз. Бұл аспапты пайдалану мерзімін ұзартады.

1. Тісті әр тазалар алдында қылшықтарды ағынды сумен жуып-шайыңыз, содан кейін тіс пастасының қажетті мөлшерін жағыңыз.

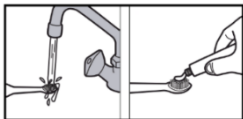

2. Тіс щеткасында алты тазалау режимі бар. Тіс щеткасын алғашқы пайдаланғанда SENSITIVE режимін таңдау ұсынылады.
3. Тазалауды аяқтағаннан кейін ауызды сумен мұқият шайыңыз, содан кейін тіс щеткасын жуып-шайыңыз. Бұл бактерияларды және қалған тіс пастасын кетіруге мүмкіндік береді.

8. АСПАПТЫ ПАЙДАЛАНУ




Щетка Сіз соңғы рет пайдаланған жұмыс режимін жадта сақтап қалады және тіс щеткасын келесі пайдалануда ол осы режимде болады. Басқаны таңдау үшін – дисплейде режимді ауыстырып-қосыңыз.



2 мин аяқталғаннан кейін тіс щеткасы автоматты түрде өздігінен өшеді. Бұл тісті 2 мин асырмай – стоматологтар ұсынған уақыт тазалуға мүмкіндік береді.

Тістерді тазалау процесін сапалы орындау үшін. щетканы ауыз қуысында шамамен 45° бұрышпен еңкейту керек. Ауыз қуысын ойша 4 бөлікке бөлуді ұсынамыз, әр бөлікті шамамен 30 сек тазалап, содан кейін щетканы басқа бөлікке жылжыту қажет. Осы уақытты басқарудың ыңғайлылығы үшін, щетка әр 30 секунд сайын жұмысын қысқа уақытқа (шамамен 1 секунд) тоқтатады.

2 минуттан кейін щетка автоматты түрде жұмысын тоқтатады.

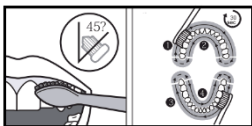

Құрылғы бір түймемен басқарылады. Жұмыс режимдерін ауыстырып қосу / өшіру түймесін екі рет басу арқылы жүзеге асырылады.



Тіс щеткасы қондырмасын 3 айда 1 рет ауыстыруды ұсынамыз.




Кіріктірілген батареяны 100%-ға дейін зарядтаған соң, щетка бір зарядта 120 минутқа дейін жұмыс істейді.

9. ТАЗАЛАУ ЖӘНЕ КҮТІМ.

- Әр пайдаланғаннан кейін қондырманы және щетка тұтқасын жылы ағынды сумен жуып-шаю керек. Қажет болған жағдайда, бетті тазалау үшін жұмсақ мата мен сабынды пайдалануға болады.

Тазалау үшін органикалық еріткіштерді және қазақ материалдарды, сондай-ақ щетка жабынын бүлдіруі мүмкін болатын үшкір заттарды пайдалануға тыйым салынады. Әр пайдаланғаннан кейін щетка қондырмасын шешіп алыңыз. Тіс пастасы қалдығын кетіру үшін тұтқаның жоғарғы бөлігін және сұққышты мұқият тазалаңыз. Содан кейін щетка кебуіне мүмкіндік беріңіз. Бұл аспаптың қызмет ету мерзімін едәуір арттырады.

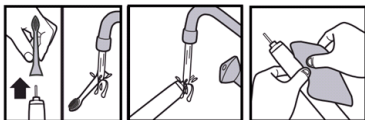

- Егер қондырманы ауыстыру қажет болса, щетканың осы моделіне арналған түпнұсқалық қондырмаларды пайдалануды сұраймыз.




Ыдыс жуғыш машинада щетка саптамаларын, тұтқаны (аспап корпусын), зарядтау негізін жууға болмайды

10. САҚТАУ ЖӘНЕ ТАСЫМАЛДАУ

- Электр аспаптары қоршаған ауаның температурасы плюс 40°C-ден аспайтын, салыстырмалы ылғалдылығы 70%-дан аспайтын және қоршаған ортада электр аспаптар материалдарына теріс әсер ететін шаң, қышқылды және басқа да булар болмайтын жабық құрғақ және таза үй-жайда сақталады.
- Егер Сіз электрлік тіс щеткасын ұзақ уақыт бойы пайдаланбайтын болсаңыз, батареяны толығымен қуаттандыруды, оны электр қуат көзінен ажыратуды және щетканы күн сәулесінің көзі жоқ жабық құрғақ үй-жайда сақтауды сұраймыз.



Аспапты ауаның теріс температурасында сақтауға болмайды, тек қана жылытылатын үй-жайларда сақтау керек.

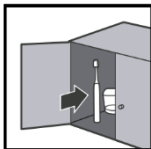

Тасымалдау

Электр аспаптарды нақты түрдегі көлікте қолданылатын жүктерді тасымалдау ережелеріне сәйкес көліктің барлық түрлерімен тасымалдайды. Аспапты тасымалдағанда зауыттық түпнұсқа қаптаманы пайдаланыңыз

Аспаптардың тасымалдануы оларға атмосфералық жауын-шашын мен жегі орталардың тікелей әсер ету мүмкіндігін болдырмауы тиіс.

11. КӘДЕГЕ ЖАРАТУ БОЙЫНША ТАЛАПТАР

Ескерту: Электр аспаптың пайдалану мерзімі аяқталғаннан кейін оны әдеттегі тұрмыстық қалдықтармен бірге тастамай, ресми жинау пунктіне кәдеге жаратуға жіберіңіз. Осылайша Сіз қоршаған ортаны сақтауға көмектесесіз.

Бұйымдарды кәдеге жарату кезінде пайда болатын қалдықтар белгіленген тәртіппен және салалық нормативтік құжаттаманың қолданыстағы талаптары мен нормаларына сәйкес, оның ішінде СанЕжН 2.1.7.1322-03 «Өндіріс және тұтыну қалдықтарын орналастыруға және залалсыздандыруға қойылатын гигиеналық талаптарға» сәйкес кейінгіде кәдеге жаратумен міндетті жинауға жатады

12. ЕГЕР СІЗДЕ МӘСЕЛЕ ТУЫНДАҒАН БОЛСА

Егер қандай болса да болымсыз мәселе туындайтын болса, әдетте оның пайда болуының себебі табылғанда, ол оңай шешілуі мүмкін.

МӘСЕЛЕ	ЫҚТИМАЛ СЕБЕБІ	ЫҚТИМАЛ ШЕШІМІ
Тіс щеткасының дірілі әлсірей түседі	Щетканың саптамасы мен щетканың корпусы арасындағы қосылыс тым тығыз	Қылқалам саптамасын алыңыз, содан кейін оны саптама мен корпус арасында ~1мм бос орын болатындай етіп қайта орнатыңыз
Тіс щеткасын толық зарядтағаннан кейін батареяның қызмет ету мерзімі қысқара түседі	Өтінеміз, щетканың зарядтау құрылғысына тігінен қойылғанына көз жеткізіңіз, кері жағдайда зарядтау тоғының көзіне дұрыс қосылыс болмайды.	Щетканы тігінен қуаттандыру базасына орнатыңыз. Контактілерді негізде және щеткаларда тексеріңіз, қажет болған жағдайда, оларды тазалаңыз. Егер мәселе шешілмесе, батареяның қызмет ету мерзімі аяқталуы мүмкін. Құрылғының жұмысын диагностикалау үшін сервистік орталыққа хабарласыңыз.
Тіс щеткасын ұзақ уақыт пайдаланбағаннан кейін және оны желіге қосқан соң, қуат индикациясы бұрынғыдай жанбайды	Щетканы ұзақ уақыт (6 ай және одан ұзақ) пайдаланбау	Тіс щеткасын ұзақ уақыт пайдаланбағаннан кейін, батарея заряды таусылуы мүмкін, щетканы зарядтауға қосқаннан кейін, щетканы бұрынғы белсенді жұмыс режимін қалпына келтіру үшін, батареяға ~30 минут қажет
Тіс щеткасы жұмыс істемейді	Кіріктірілген батарея қуаты таусылған Щетка «ұшу» режимінде тұр	• Кіріктірілген аккумуляторлық батареяны зарядтаңыз • «Ұшу» режимін қосу/өшіру түймесін басып, 3 секунд ұстап тұру арқылы өшіріңіз

Щетка зарядталмайды	Кіріктірілген аккумуляторлық батареяның қызмет ету мерзімі аяқталды USB-C сымы немесе корек адаптері ақаулы	Щетка кәдеге жарату жөніндегі талаптарға сәйкес кәдеге жаратылуы тиіс Сымды және/немесе қуат адаптерін ұқсас сыммен ауыстырыңыз
------------------------	--	--



Сіздің құралды пайдалану кезінде өрттің, электрлік токпен зақымдану немесе жарақат алу қаупінің, сонымен қатар оның сынуының алдын алу үшін осы құралмен жұмыс кезіндегі сақтықтың негізгі шараларын, сонымен қатар электрлік тұрмыстық техникамен жұмыс кезіндегі қауіпсіздік бойынша жалпы нұсқауларды сақтаңыз.

Назар аударыңыз! Егер Сіз жоғарыда сипатталған қадамдар көмегімен мәселені өз күшіңізбен шеше алмасаңыз, POLARIS өкілетті қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.

13. ТІС ЩЕТКАСЫН ПАЙДАЛАНУ ЖӨНІНДЕГІ ҰСЫНЫМДАР

1. Күн сайын таңертең және кешқұрым 2 минут бойы тістеріңізді тазалаңыз.
2. Тісті тамақ ішкеннен кейін 20 мин соң тазалаңыз. Бұл Сіздің тістеріңіздің эмалін қорғайды.
3. Сезімтал қызыл иекпен ауыз қуысын тазарту үшін, SENSITIVE (бірінші) режимін қолданыңыз.
4. Тіс аралық кеңістіктен тамақ қалдықтарын кетіру үшін жіпті пайдаланыңыз.
5. Ауыз қуысын тексерту үшін және тісті кәсіби тазалу үшін стоматологқа үнемі барып тұрыңыз. Бұл процедура тіс қағы мен тіс тастарын кетіреді, бұл сіздің тістеріңіздің саулығын сақтайды.

14. ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАРЫ

PETB 0303 – бұл POLARIS сауда маркасының электр тіс щеткасы

Жұмыс кернеуі: 7.4 В

Номиналды қуаты: 6 Вт

Зарядтау базасы

Шығыс: 5V DC, 1A

Режимдерді ауыстырып-қосу: сенсорлық

Көрсету режимі: LED жарық

Зарядтау уақыты: ~2.5 сағ

Зарядсыз жұмыс істеу уақыты: 120 мин

Литий батареясы 900 mA/h

Ылғалға төзімділік IPX7

Қорғау сыныбы – III.

Ескерту: Өзгерістер мен жақсартуларды енгізудің үздіксіз процесінің салдарынан нұсқаулық пен өнім арасында кейбір айырмашылықтар байқалуы мүмкін. Пайдалану жөніндегі нұсқаулықтың өзекті нұсқасын Сіз www.polaris.ru сайтынан таба аласыз.

15. СЕРТИФИКАТТАУ ТУРАЛЫ АҚПАРАТ

Бұйым КО ТР 004/2011 «Төмен вольтты құралдардың қауіпсіздігі туралы», КО ТР 020/2011 «Техникалық құралдардың электромагниттік үйлесімдігі», ЕАЭО ТР 037/2016 «Электротехника және радиоэлектроника бұйымдарында қауіпті заттардың қолданудағы шектеулер туралы» талаптардың сәйкестігін растау процедурасынан өткен және Кедендік Одақтың мүше мемлекеттері нарығында бұйымдарды ұстаудың бірыңғай белгісімен таңбаланады.

Сәйкестік сертификатының/декларациясының нөмірі және оның қолданылу мерзімі туралы ақпаратты Сіз POLARIS бұйымын сатып алған жерде немесе өндірушінің Уәкілетті өкілінен ала аласыз.



Бұйымның қызмет көрсету мерзімі: 3 жыл

Кепілдікті мерзімі: сатып алған күннен бастап 3 жыл

Өндірілген күні бұйымда көрсетілген.

Өткізу ережелері белгіленбеген.

Дайындаушы: НИНБО ХЭНСФОРТ ОВЕРСИЗ ЭЙША ЛИМИТЕД

Мекенжайы: № 158 Доншан Лю, Хушан Чжидао, Цыси, Чжэцзян провинциясы, ҚХР

Manufacturer: NINGBO HANSFORT OVERSEAS ASIA LIMITED

No. 158 Dongshan Lu, Hushan Jiedao, Cixi City, Zhejiang Province, PRC

Зауытта:

ГУАНДУН РОМАН ТЕХНОЛОДЖИ КО., ЛТД, №.8, Кьюфинг Род, Боди Вилладж, Чжан Мутуо Таун, Дунгуань Сити, Гуандун Провинсе, Қытай

At factory:

Guangdong Roman Technology Co., Ltd, No.8, Qifeng Road, Bodi Village, Zhang Mutou Town, Dongguan City, Guangdong Province, China

Импорттаушы: «ЭйДжиАй Электроникс" ЖШҚ, 115419, Мәскеу қ., Орджоникидзе көшесі, 11-үй, 3-құрылыс, 4-қабат 13-бөлме/үй-жай, Тел. +7 (495) 419-12-56

Өндірушінің РФ-ғы және Кеден Одағы мүше мемлекеттеріндегі Уәкілетті өкілі:

«ЭйДжиАй Электроникс" ЖШҚ, 115419, Мәскеу қ., Орджоникидзе көшесі, 11-үй, 3-құрылыс, 4-қабат 13-бөлме/үй-жай, Тел. +7 (495) 419-12-56

Бірыңғай анықтама қызметінің телефоны: 8-800-700-11-78

16. КЕПІЛДІК МІНДЕТТЕМЕЛЕРІ

Бұйым: Электрлік тіс щеткасы

Модель: РЕТВ 0303

Осы кепілдік бұйымды сатып алудың расталған күнінен бастап 36 ай бойы әрекет етеді және «Тұтынушылардың құқықтарын қорғау туралы» Кедендік одаққа мүше мемлекеттерінің Заңына сәйкес бұйымға кепілді қызмет көрсетуінің білдіреді.

Өндірушінің кепілдік міндеттемелері «POLARIS» сауда белгісімен шығарылатын және кепілдік қызмет көрсету ұсынылатын елдерде өндіруші уәкілетті еткен елдерде сатып алынған барлық модельдерге таралады (сатып алу орнына тәуелсіз).

Бұйым пайдалану жөніндегі нұсқаулыққа және қауіпсіздік жөніндегі ережелер мен талаптарды сақтауға қатаң сәйкестікте пайдаланылуы тиіс.

Осы кепілдік тауарды тұтынушыға бергеннен кейін пайда болған келесі кемшіліктерге қатысты болмайды:

Химиялық, механикалық немесе өзге де әсер ету, бөгде заттардың, сұйықтықтардың, жәндіктердің және олардың тіршілік ету өнімдерінің бұйымның ішіне түсуінен;

Бұйымды оның тікелей міндетінен тыс пайдалануында болатын қате пайдаланылуы, сондай-ақ Пайдалану жөніндегі нұсқаулықтың және қауіпсіздік техникасы ережелерінің талаптарын бұза отырып, бұйымды орнату және пайдаланудан;

Құрамында минералды заттар көп мөлшерде болатын суды пайдалану салдарынан әк шөгіндісі, су тасы мен қақ шөгінділерінен.

Бұйымды ол арналмаған мақсаттарда пайдаланудан;

Қалыпты пайдалану, сонымен қатар функционалдық қасиеттеріне әсер етпейтін: сыртқы немесе ішкі бетінің механикалық зақымдануы (майысулар, сызаттар, ескірулер), металл түсінің табиғи өзгеруі, оның ішінде құбылмалы және қара дақтардың пайда болуы, сондай-ақ жабынды зақымдалған жерлерде және металдың жабылмаған учаскелерінде металл жемірілуінен;

Өңдеу бөлшектерінің, саптамалар мен аксессуарлардың, шамдардың, батареялардың, қорғаныс экрандардың, қокыс жинағыштардың, тығыздағыш элементтердің, белдіктердің, щеткалардың пайдалану мерзімі шектеулі басқа бөлшектердің және пайдалану барысында табиғи тозуға бейім бөлшектердің тозуынан;

Авторланған сервистік орталықтары* болып табылмайтын тұлғалар немесе ұйымдар өндірген бұйымды жөндеуіне;

Бұйымның тасымалдау кезіндегі, дұрыс пайдаланбау, сондай-ақ бұйымның конструкциясында көзделмеген модификациялармен немесе өз бетінше жөндеумен байланысты зақымдануларынан.

Саптаманы басқа фабрикалардың саптамаларына ауыстырғанда тіс щеткасы тұтқасының пайда болған бүлінуі.

Егер бұйымда паспорттық сәйкестендіру тақтайшасы болмаса немесе ондағы деректер өшірілген немесе түзетілген болса, өндірушіге кепілдікті міндеттеме жүктелмейді.

Осы кепілдік тек қана жеке тұрмыстық қажеттіліктер үшін жарамды және де коммерциялық, өнеркәсіптік немесе кәсіби мақсаттар үшін пайдаланылатын бұйымдарға қолданылмайды.

Назар аударыңыз!! Дайындаушы POLARIS бұйымымен адамдарға, үй жануарларына, қоршаған ортаға тікелей немесе жанама келтірілген зиян немесе егер бұл бұйымды пайдалану және орнату ережелерін немесе шарттарын сақтамау,

тұтынушының немесе үшінші тұлғалардың қасақана немесе абайсыз әрекеттері нәтижесінде болған жағдайда мүлікке келтірілген зиян үшін жауапты болмайды.

POLARIS бұйымдарына техникалық қызмет көрсету, сапаны тексеру, кепілдік және кепілдік жөндеу бойынша барлық сұрақтар бойынша жақын жердегі POLARIS қызмет көрсету орталығына немесе сатушыға – POLARIS өкілетті дилеріне хабарласыңыз

POLARIS бұйымдарына кепілді жөндеуді тек POLARIS авторландырылған сервистік орталықтары жүзеге асырады.

*Компанияның сайтындағы авторландырылған сервистік орталықтарының мекенжайлары: www.polaris.ru

Кепілдік жөндеу кезінде бұйымды сатып алу күнін растау немесе заңда көзделген өзге де талаптарды ұсыну үшін Сізден сатып алу туралы құжаттарды сақтауды сұраймыз.

Мұндай құжаттар POLARIS толтырылған кепілдік талоны, кассалық чек немесе Сатушының түбіртегі, сатып алу күні мен орнын растайтын өзге де құжаттар болып табылуы мүмкін.

Бұйымды сатып алу күнін растайтын құжат ұсынылмаған кезде, кепілдік мерзімі бұйым дайындалған күннен бастап есептеледі.

Дайындалған күні бұйымның артқы қабырғасындағы паспорттық сәйкестендіру тақтайшасында көрсетілген.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН / WARRANTY CARD	
Изделие / Item	Модель / Item no.
Серийный № / Serial no.	
Дата продажи / Date of purchase	
Фирма-продавец / Seller	
Подпись продавца / Seller's signature	
Печать продавца / Seller's stamp	
Покупатель / Buyer	
Адрес / Address	
Телефон / Telephone no.	