


polaris

since 1995

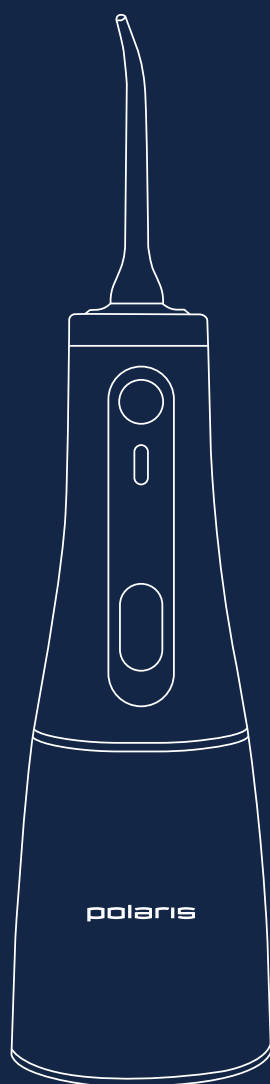

PWF 0305T Smart Display

Руководство по эксплуатации / Гарантия
Manual instruction / Guarantee

Ирригатор
Модель PWF 0305T Smart Display
Руководство по эксплуатации

Благодарим Вас за выбор продукции торговой марки POLARIS. Наши изделия разработаны в соответствии с высокими требованиями качества, функциональности и дизайна. Мы уверены, что Вы будете довольны приобретением нового изделия нашей фирмы.

Перед началом эксплуатации прибора внимательно прочитайте данное руководство, в котором содержится важная информация, касающаяся Вашей безопасности, а также рекомендации по правильному использованию прибора и уходу за ним.

Сохраните руководство вместе с гарантийным талоном, кассовым чеком, по возможности, картонной коробкой и упаковочным материалом.

Оглавление

1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ.....	3
2. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ.....	3
3. СПЕЦИАЛЬНЫЕ УКАЗАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ ДАННОГО ПРИБОРА.....	4
4. СФЕРА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ.....	5
5. КОМПЛЕКТАЦИЯ.....	5
6. ОПИСАНИЕ ПРИБОРА.....	5
7. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ.....	7
8. ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПРИБОРА.....	8
9. ЧИСТКА И УХОД.....	10
10. ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА.....	11
11. ТРЕБОВАНИЯ ПО УТИЛИЗАЦИИ.....	11
12. ЕСЛИ У ВАС ВОЗНИКЛА ПРОБЛЕМА.....	12
13. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ.....	12
14. ИНФОРМАЦИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ.....	13
15. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА.....	14

1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Настоящее руководство по эксплуатации предназначено для ознакомления с техническими данными, устройством, правилами эксплуатации и хранения ирригатора POLARIS, модель PWF 0305T Smart Display (далее по тексту – прибор).

2. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

- Эксплуатация прибора должна производиться в соответствии с «Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей».
- Прибор предназначен исключительно для использования в быту.
- Перед началом использования этого прибора тщательно прочитайте руководство по эксплуатации.
- Каждый раз перед включением прибора осмотрите его. При наличии повреждений прибора и зарядного провода ни в коем случае не подключайте провод к источнику питания.
- Прибор и зарядный провод должны храниться так, чтобы они не попадали под воздействие жары, прямых солнечных лучей и влаги.
- Не оставляйте прибор на зарядке без надзора! Если Вы покидаете помещение, всегда отключайте зарядный провод от сети.
- Данный прибор не предназначен для использования людьми (включая детей), у которых есть физические, нервные или психические отклонения или недостаток опыта и знаний, за исключением случаев, когда за такими лицами осуществляется надзор или проводится их инструктирование относительно использования данного прибора лицом, отвечающим за их безопасность. Необходимо осуществлять надзор за детьми с целью недопущения их игр с прибором.
- Не помещайте прибор в воду или любую другую жидкость.
- Внимание! Не осуществляйте зарядку прибора вблизи ванн, раковин или других емкостей, заполненных водой.
- После очистки устройства и перед подключением его к источнику питания, пожалуйста, убедитесь, что прибор полностью высох.
- Включайте сетевую вилку только в источник переменного тока (~). Перед включением убедитесь, что прибор рассчитан на напряжение, используемое в сети.
- **Любое ошибочное включение лишает Вас права на гарантийное обслуживание.**
- Предохраняйте прибор от ударов об острые углы. По окончании эксплуатации, чистке или поломке прибора всегда отключайте его от сети.
- Запрещается также отключать прибор от сети, держа его за сетевой провод. При отключении прибора от сети держитесь за сетевую вилку.
- Замену шнура можно производить только на аналогичный оригинальный шнур от такой же модели, проконсультируйтесь у квалифицированных специалистов - сотрудников сервисного центра. Неквалифицированный ремонт представляет прямую опасность для пользователя.
- Для ремонта прибора могут быть использованы только оригинальные запасные части.
- Не следует использовать прибор после падения, если имеются видимые признаки повреждения. Перед использованием прибор должен быть проверен квалифицированным специалистом.
- Всегда отключайте прибор из сети, если вы не пользуетесь устройством.
- Не допускайте соприкосновения сетевого шнура с горячими и острыми поверхностями. Избегайте повреждения изоляции сетевого шнура.
- Используйте только насадки, входящие в комплект.
- Использование аксессуаров, не входящих в комплект поставки лишает Вас права на гарантийное обслуживание.



Внимание! После окончания срока службы не выбрасывайте прибор вместе с бытовыми отходами. Передайте его в специализированный пункт для дальнейшей утилизации. Этим Вы поможете защитить окружающую среду. Использованные аккумуляторные батареи не выбрасывайте с бытовым мусором. Не бросайте батареи в огонь, так как они могут



взрываться. Использованные аккумуляторные батареи должны быть утилизированы. В данном приборе батарея не съёмная, поэтому требование относится ко всему прибору целиком.

Внимание!

При возникновении неисправностей любого характера обращайтесь в Авторизованный сервисный центр POLARIS.

3. СПЕЦИАЛЬНЫЕ УКАЗАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ ДАННОГО ПРИБОРА

- Данный прибор не является лечебным или медицинским инструментом. Это продукт бытового назначения. Обо всех показаниях, противопоказаниях и возможных осложнениях при его использовании, пожалуйста, проконсультируйтесь с медицинским персоналом до начала использования этого устройства.
- Ирригатор соответствует требованиям безопасности, стандартам для электромагнитного оборудования. Если у Вас есть какие-либо вопросы о кардиостимуляторах и других имплантированных устройствах, пожалуйста, проконсультируйтесь с Вашим врачом или производителями имплантированных устройств перед использованием ирригатора.
- Этот прибор предназначен для удаления зубного налета и тщательной чистки зубов ежедневно. Пожалуйста, не используйте его для других целей. Если Вы чувствуете себя не комфортно или болезненно, пожалуйста, прекратите использовать этот прибор и обратитесь к врачу.
- Если у вас есть какие-либо медицинские проблемы, пожалуйста, проконсультируйтесь с врачом перед использованием ирригатора.
- Пожалуйста, не мойте прибор в посудомоечной машине.
- Пожалуйста, не используйте не оригинальные насадки ирригатора.
- Категорически не допускается хранить прибор при отрицательных температурах воздуха.
- Не выпускайте из рук включенный ирригатор и не кладите его на твёрдые поверхности, поскольку работающий прибор может упасть и получить повреждения.
- Не направляйте струю прибора под язык, в ухо, в нос или другие деликатные зоны. Прибор генерирует мощную водную струю, которая может нарушить целостность кожи и слизистых оболочек.
- Перед использованием прибора удалите из полости рта все инородные предметы (пирсинг, ювелирные украшения и т.д.)
- Не используйте ирригатор, если у Вас есть открытые раны в полости рта.
- Перед проведением любых вмешательств у стоматолога, уточните у него о возможности до процедур использовать ирригатор.
- Во время применения ирригатора в первые несколько дней может наблюдаться незначительная кровоточивость десен. Если кровоточивость продолжится через 1 неделю применения на мягком режиме, прекратите пользоваться ирригатором и обратитесь за консультацией к стоматологу.
- Не заполняйте резервуар прибора никакими жидкостями, кроме чистой питьевой воды или специальных ополаскивающих жидкостей для ирригатора.
- После использования ирригатора слейте остатки жидкости из резервуара для воды.
- Бывший в использовании ирригатор запрещается хранить в неотапливаемом помещении при отрицательных температурах.


4. СФЕРА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

- Прибор предназначен исключительно для бытового использования в соответствии с данным Руководством. Прибор не предназначен для промышленного и коммерческого использования.
- Производитель не несет ответственности за ущерб, возникший в результате неправильного или непредусмотренного настоящим руководством использования.
- Ирригатор предназначен для ухода за полостью рта, для чистки межзубных промежутков, удаления налета; для соблюдения гигиены при наличии имплантов, брекетов, коронок, мостов; для оздоровления десен с помощью массажа.

5. КОМПЛЕКТАЦИЯ

1. Прибор (корпус)	1 шт.
2. Сменные классические насадки	2 шт.
3. Сменная насадка ортодонтическая	1 шт.
4. Сменная насадка пародонтологическая	1 шт.
5. Сменная насадка для языка	1 шт.
6. USB провод	1 шт.
7. Дорожный чехол	1 шт.
8. Руководство по эксплуатации	1 шт.

6. ОПИСАНИЕ ПРИБОРА

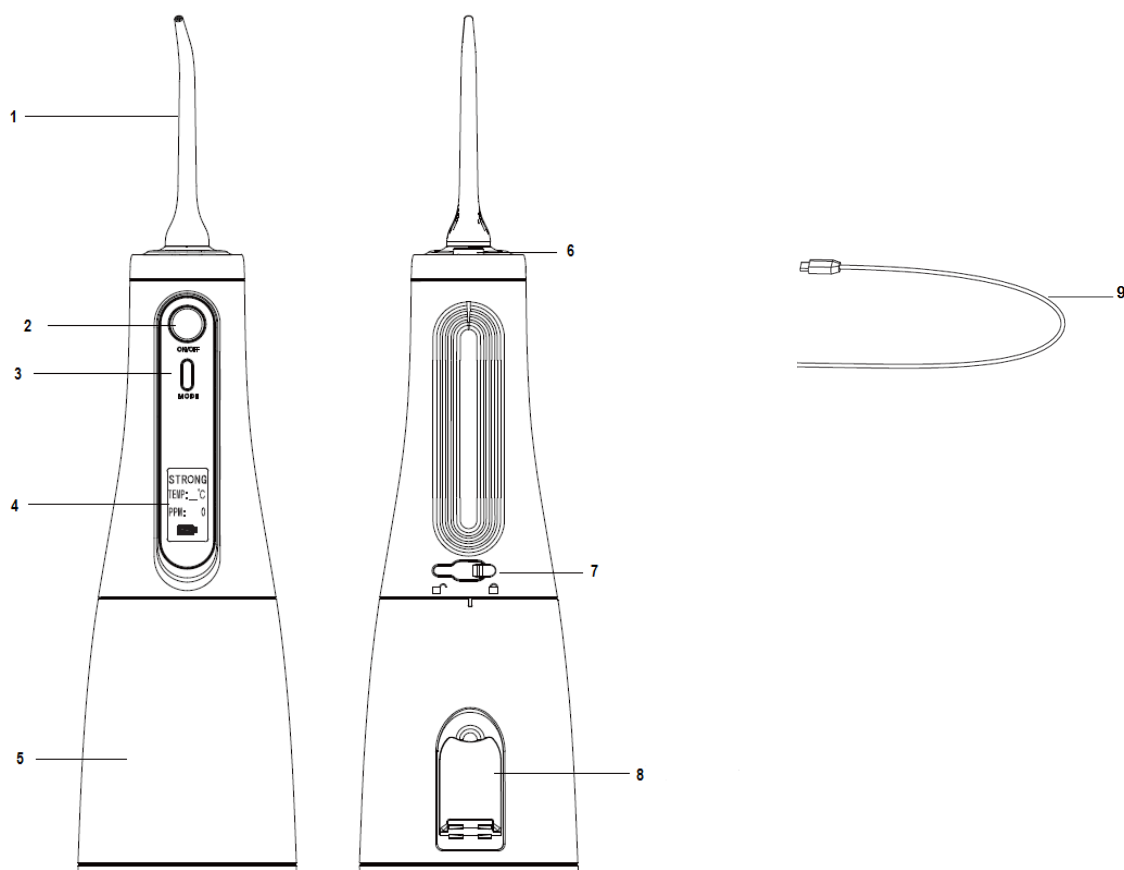


1. Сменная насадка
2. Кнопка вкл./выкл
3. Кнопка переключения режимов
4. LCD-дисплей
5. Резервуар для воды
6. Кнопка фиксатора насадки
7. USB-C порт
8. Заливное отверстие резервуара для воды
9. USB кабель

Насадки


В базовой комплектации 5 насадок:
 классические 2 шт,
 ортодонтическая 1шт,
 пародонтологическая 1шт.
 для чистки языка 1шт.



Насадка классическая * 2 шт.

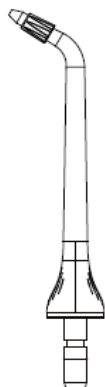

Насадка ортодонтическая

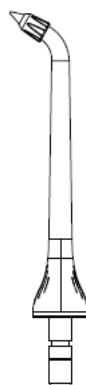


Насадка пародонтологическая




Насадка для чистки языка

Классическая насадка очищает межзубные промежутки от бактерий и частиц пищи; подходит для удаления остатков пищи при наличии искусственных конструкций.

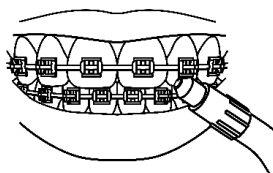

Ортодонтическая насадка подходит для чистки мостов, брекетов, коронок, для всех элементов искусственных конструкций.

Пародонтологическая насадка имеет мягкий наконечник, используется для очищения десневого края.

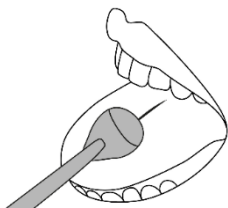

Насадка для чистки языка
удаляет бактерии, налет, освежает дыхание.

Внимание! Насадка должна быть строго индивидуальной для каждого пользователя. На насадках есть кольца разных цветов, чтобы различать насадки разных пользователей. Рекомендуется менять насадки после 6 месяцев регулярного пользования.

Режимы работы:

Включите ирригатор, нажав кнопку вкл/выкл (2).

Переключение режимов работы осуществляется последовательным нажатием кнопки переключения режимов (3). Активация режима, происходит нажатием кнопки вкл/выкл (2).

Выключение прибора происходит автоматически через 2 минуты. При необходимости, а также после окончания воды в контейнере, выключите подачу воды принудительно повторным нажатием кнопки вкл/выкл (2),

1. Режим Strong (сильный) – режим с максимальным давлением подачи воды для глубокой очистки полости рта от остатков пищи и налета для людей со здоровыми деснами.
2. Режим Normal (нормальный) со средним давлением подачи воды для ежедневного ухода за зубами, чистки межзубных промежутков, массажа десен; для людей со здоровыми деснами.
3. Режим Soft (мягкий) – мягкое воздействие на зубы и десны, рекомендован для чувствительных зубов и десен; для начинающих пользователей.
4. Режим Pulse (импульсный) – режим для чистки десневых карманов и массажа десен.
5. Режим Child (детский) – мягкий режим с минимальным давлением воды. Подходит для использования детьми старше 8 лет под руководством взрослых.


Внимание!

Прибор автоматически отключится по истечении примерно 120-125 сек.



7. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

1. Удалите весь упаковочный материал.
2. Сборка ирригатора. Установите наконечник на верхней части прибора до характерного щелчка.

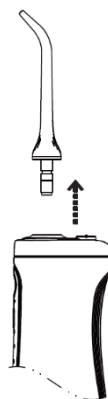

Для того, чтобы снять наконечник, нажмите кнопку (6) на приборе, далее вытяните наконечник из рукоятки.



Внимание! Не нажимайте кнопку фиксатора насадки во время работы ирригатора.

3. Зарядка ирригатора.

Убедитесь, что напряжение, указанное на приборе, соответствует напряжению сети.


- Подключите USB кабель (9) к адаптеру (в комплект не входит) и источнику питания и порту USB (7) на корпусе прибора. Загорится OLED-дисплей с индикацией заряда аккумулятора.
- Зарядите устройство в течение 6-7 часов.
При первом использовании полностью зарядите устройство.
- Время работы ирригатора после полной зарядки аккумулятора составляет примерно 50 -100 минут в зависимости от режима.

При правильной эксплуатации прибора Вы увеличите срок службы литиевой батареи;

8. ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПРИБОРА.

1. Залейте воду в резервуар через заливное отверстие (8), для этого:

- откройте крышку резервуара для воды
- расположите резервуар для воды горизонтально и наполните его водой
- закройте крышку резервуара для воды.

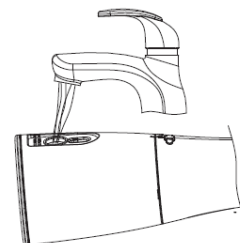

Во время залива воды в резервуар, прибор должен быть выключен.

Для использования прибора рекомендуется чистая проточная прохладная или теплая вода (до 40°C). Если качество воды в вашем регионе плохое, то используйте отфильтрованную воду.



Во избежание поломки ирригатора запрещается использовать:

- Вещества и растворы, содержащие взвешенные частицы (отвары, суспензии и т.п.)
- Маслосодержащие растворы
- Антисептические и спиртовые растворы
- Солевые растворы
- Жидкости для полоскания рта, кроме специальных растворов и ополаскивателей для ирригатора.

2. Для включения прибора нажмите кнопку вкл./выкл (2), на экране отобразится приветствие и текущие режимы работы ирригатора (режим работы / температура воды / качество воды (PPM) и оставшийся заряд аккумулятора).



Показатель PPM обозначает жесткость воды.

Используйте воду до 170 PPM.

3. Выбор (переключение) режима осуществляется коротким нажатием кнопки переключения режимов (3).



После выбора режима работы и для начала подачи воды, необходимо нажать кнопку вкл./выкл (2)


Прибор запоминает последний использованный Вами режим работы и при последующем использовании он будет находиться в этом же режиме. При необходимости выберите другой режим работы.

- Перед каждой чисткой зубов промывайте наконечник проточной водой.
- Ирригатор имеет 5 режимов чистки. При первом использовании прибора рекомендуется выбирать режим SOFT или CHILD. Это поможет адаптироваться к ирригационной чистке и избежать риска воспаления и кровоточивости десен.
- Во время использования, ирригатор должен находиться в положении вертикально или небольшом наклоне, чтобы предотвратить остановку потока воды.
- Не используйте заполненный водой ирригатор без насадки. Это может привести к его поломке.
- Не включайте устройство без воды в резервуаре, кроме тех случаев, когда нужно слить остатки воды и осушить резервуар. Работа устройства без воды может привести к его поломке или сокращению срока службы прибора.




4. Процесс чистки полости рта:

- наклонитесь над раковиной и поместите наконечник прибора в рот

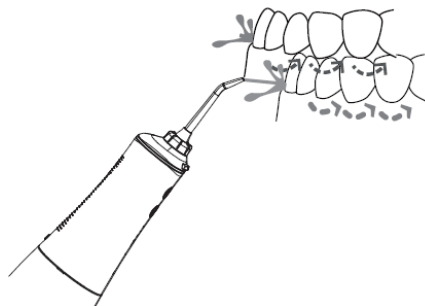


- включите прибор, когда насадка находится во рту
- частично прикройте губы, чтобы предотвратить брызги, но позвольте воде течь изо рта в раковину
- направьте кончик на линию десен под углом 90 градусов.
- начните с задних зубов, двигайтесь вдоль линии десен, задерживаясь у межзубных промежутков. Продолжайте до тех пор, пока все области вокруг и между зубами не будут очищены.

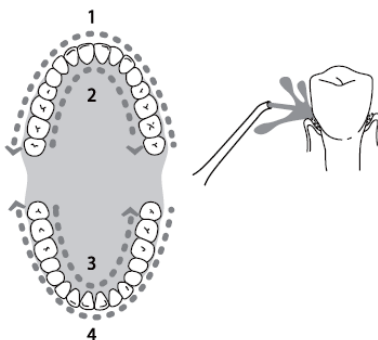

- Эргономичный дизайн и поворотный на 360 наконечник позволяют контролировать поток воды для легкого доступа ко всем зонам полости рта.

- расстояние от насадки до зуба определяется пользователем самостоятельно, исходя из требуемой интенсивности воздействия
- !** Будьте особенно осторожны в области между зубов и вокруг брекетов.

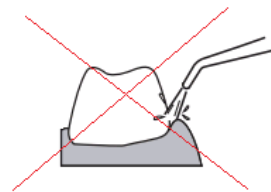


- Не направляйте струю непосредственно в пародонтальный карман.
- По окончании сеанса использования сразу сливайте воду, не допускайте застоя воды в резервуаре. После слива воды включите ирригатор на 2-3 секунды с пустым резервуаром, чтобы удалить из него остатки воды.

Запрещается блокировать выход воды из насадки во время работы прибора. Это может привести к выходу прибора из строя.

9. ЧИСТКА И УХОД

- Слейте остатки воды из резервуара. После этого включите прибор и оставшиеся капли воды выйдут через наконечник. Рекомендуется хорошо промывать резервуар 1 раз в неделю водой с температурой не выше 50°C.
- Для того, чтобы снять резервуар для воды, левой рукой держите верхнюю часть ирригатора, как показано на рисунке ниже, а правой рукой поверните резервуар влево и вниз.

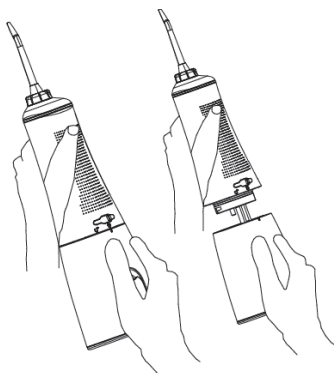


- Если требуется произвести замену наконечника, пожалуйста, используйте оригинальные насадки для данной модели. Рекомендуемое время использования 1 наконечника – 6 месяцев.
- После каждого использования необходимо промыть наконечник и корпус тёплой проточной водой. При необходимости можете использовать мягкую ткань и мыло для очистки поверхности.

Дезинфекцию насадок можно проводить путем помещения их на 5-10 минут в один из перечисленных растворов: 3% раствор перекиси водорода, 1% раствор хлоргексидина. После этого промойте насадки теплой водой.

Также дезинфекцию насадок можно проводить в ультрафиолетовом очистителе.

При использовании водопроводной воды, необходимо регулярно промывать прибор с насадкой от водного камня и отложений раствором лимонной кислоты. Разведите 1 ч.л. кислоты в 200 мл тёплой кипячёной воды, залейте раствор в резервуар ирригатора и включите прибор, направляя струю в раковину до опустошения резервуара. Протрите прибор и насадку снаружи мягкой тканью, смоченной тем же раствором. После этого промойте резервуар и поверхность прибора чистой водой. Регулярность промывки зависит от жёсткости используемой воды, но рекомендуется не реже, чем раз в 6 месяцев.

- Насадки могут храниться в резервуаре для воды, как показано на рисунке ниже.

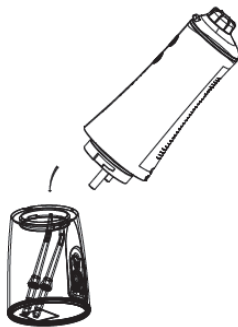

- В случае если наконечник деформирован в процессе использования, то необходимо сразу произвести его замену.
- Запрещается использовать для чистки органические растворители и абразивные материалы, а также острые предметы, которые могут повредить покрытие ирригатора.
- Пожалуйста, не мойте прибор в посудомоечной машине.

10. ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА

- Электроприборы хранятся в закрытом сухом и чистом помещении при температуре окружающего воздуха не выше плюс 40°C с относительной влажностью не выше 70% и отсутствии в окружающей среде пыли, кислотных и других паров, отрицательно влияющих на материалы электроприборов.
- Если вы не будете использовать прибор в течение длительного времени, пожалуйста, зарядите батарею полностью, отключите ее от источника электропитания и храните ирригатор в закрытом сухом отапливаемом помещении без доступа солнечного света.
- Если вы не планируете использовать прибор в течение недели и дольше, просушите емкость для воды изнутри и снаружи.



Вышукказанные действия по эксплуатации, чистке и хранению ирригатора согласно исследованиям Лаборатории Качества, Polaris продлевают срок службы приборов.

Транспортировка

Электроприборы транспортируют всеми видами транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на транспорте конкретного вида. При перевозке прибора используйте оригинальную заводскую упаковку

Транспортирование приборов должно исключать возможность непосредственного воздействия на них атмосферных осадков и агрессивных сред.

11. ТРЕБОВАНИЯ ПО УТИЛИЗАЦИИ

Примечание: По окончании срока эксплуатации электроприбора не выбрасывайте его вместе с обычными бытовыми отходами, а передайте в официальный пункт сбора на утилизацию. Таким образом, Вы поможете сохранить окружающую среду.

Отходы, образующиеся при утилизации изделий, подлежат обязательному сбору с последующей утилизацией в установленном порядке и в соответствии с действующими требованиями и нормами отраслевой нормативной документации, в том числе в соответствии с СанПиНом 2.1.7.1322-03 «Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления.»

12. ЕСЛИ У ВАС ВОЗНИКЛА ПРОБЛЕМА

Если возникает какая-либо небольшая проблема, она обычно может быть легко решена, когда найдена причина ее возникновения.

ПРОБЛЕМА	ВОЗМОЖНАЯ ПРИЧИНА	ВОЗМОЖНОЕ РЕШЕНИЕ
Вода не вытекает из прибора	Уплотнительное кольцо в основе сменной насадки повреждено, и сменная насадка не может быть установлена должным образом	Обратитесь в сервисный центр для замены уплотнительного кольца
Утечка воды у основания насадки	Ослаблено уплотнительное кольцо	Заменить насадку
Слабый напор воды при работе прибора	Низкое напряжение	Полностью зарядить прибор
Прибор не включается	Низкое напряжение	Полностью зарядить прибор
При включении прибора из насадки не идет вода	- В резервуаре для воды нет воды - Устройство слишком сильно наклонено при использовании - В сменной насадке скопилась грязь	- Очистите фильтр - Промойте резервуар для воды - Используйте прибор в вертикальном положении - Выключите и снова включите прибор - Обратитесь в сервисный центр
Прибор не показывает температуру и качество воды (PPM)	Вода не касается датчика воды.	Необходимо полностью наполнить бачок для воды или наклонить ирригатор так, чтобы вода полностью коснулась датчика воды.



Во избежание риска пожара, поражения электрическим током или получения травмы при использовании вашего прибора, а также его поломки, строго соблюдайте основные меры предосторожности при работе с данным прибором, а также общие указания по безопасности при работе с электрической бытовой техникой.

Внимание! Если с помощью описанных выше шагов Вы не можете устранить проблему своими силами, обратитесь, пожалуйста, в Авторизованный сервисный центр POLARIS.

13. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

PWF 0305T Smart Display – Ирригатор торговой марки POLARIS

Напряжение: 3,7 В

Номинальная мощность: 7,4 Вт

Номинальное давление воды в приборе: 206-1000 кПа

Объем резервуара для воды: 350 мл
Частота пульсации воды (макс) 1 800 импульсов в минуту
Максимальное время работы при полном резервуаре: 120±2 сек.
Автоотключение: через 2 минуты работы
Время зарядки: 6-7 ч
Суммарное время работы при полностью заряженном аккумуляторе до 100 мин (макс)
Емкость литиевой батареи 2000 мАч
Влагостойкость IPX7
Класс защиты – III

Примечание: Вследствие постоянного процесса внесения изменений и улучшений, между инструкцией и изделием могут наблюдаться некоторые различия. Актуальную версию Руководства по эксплуатации, Вы можете найти на сайте www.polaris.ru

14. ИНФОРМАЦИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ

Продукция прошла процедуру подтверждения соответствия требованиям ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств», ТР ЕАЭС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники» и маркируется единым знаком обращения продукции на рынке государств-членов Таможенного Союза.

Информацию о номере сертификата/декларации соответствия и сроке его действия Вы можете получить в месте приобретения изделия POLARIS или у Уполномоченного представителя изготовителя.



Срок службы изделия: 3 года

Гарантийный срок: 3 года со дня покупки

Дата изготовления указана на паспортной идентификационной табличке, находящейся на задней стенке изделия.

Аккумуляторная батарея (АКБ) является компонентом с ограниченным ресурсом и подверженным естественному износу. Гарантийный срок на АКБ: 6 месяцев со дня покупки.

Правила реализации не установлены.

Изготовитель:

НИНБО ХЭНСФОРТ ОВЕРСИЗ ЭЙША ЛИМИТЕД

Адрес: № 158 Доншан Лю, Хушан Чжидао, Цыси, Провинция Чжэцзян, КНР

Manufacturer: NINGBO HANSFORT OVERSEAS ASIA LIMITED

No. 158 Dongshan Lu, Hushan Jiedao, Cixi City, Zhejiang Province, PRC

На заводе:

Стермэй Индастриал Лимитед, Рум 5206, 8 оффис Билдинг, ЧангАн Ванке Сентер, №1 ЧангКуинг Саус Род, ДжинКсиа Коммьюнити, ЧангАн Таун, Доггуан, Гуангдонг, Китай

At factory:

Stermay Industrial Limited, Room 5206, the 8th office Building, ChangAn Vanke Center, NO.1 ChangQing South Road, JinXia Community, ChangAn Town, Dongguan, Guangdong, China

Произведено в Китае.

Импортер и Уполномоченный представитель изготовителя в РФ и государствах-членах Таможенного Союза: ООО "ЭйДжиАй Электроникс", Россия, 115419, г. Москва, улица Орджоникидзе, д. 11, строение 3, этаж 4 помещение I комната 13, Тел. +7 (495) 419-11-78
Телефон единой справочной службы 8-800-700-11-78

15. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Изделие: Ирригатор

Модель: PWF 0305T Smart Display

Настоящая гарантия действует в течение 36 месяцев с подтвержденной даты приобретения изделия и подразумевает гарантийное обслуживание изделия в соответствии с Законами Государств – членов Таможенного Союза «О защите прав потребителей».

1. Гарантийные обязательства изготовителя распространяются на все модели, выпускаемые под торговой маркой «POLARIS» и приобретенные у уполномоченных изготовителем продавцов, в странах, где предоставляется гарантийное обслуживание (независимо от места покупки).

2. Изделие должно использоваться в строгом соответствии с руководством по эксплуатации и соблюдением правил и требований по безопасности.

3. Настоящая гарантия не распространяется на недостатки, возникшие после передачи товара потребителю вследствие:

- Химического, механического или иного воздействия, попадания посторонних предметов, жидкостей, насекомых и продуктов их жизнедеятельности внутрь изделия;
- Неправильной эксплуатации, заключающейся в использовании изделия не по его прямому назначению, а также установки и эксплуатации изделия с нарушением требований Руководства по эксплуатации и правил техники безопасности;
- Отложения известкового осадка, водного камня и накипи из-за использования воды с высоким содержанием минеральных веществ.
- Использования изделия в целях, для которых оно не предназначено;
- Нормальной эксплуатации, а также естественного износа, не влияющие на функциональные свойства: механические повреждения внешней или внутренней поверхности (вмятины, царапины, потертости), естественные изменения цвета металла, в т.ч. появление радужных и темных пятен, а также - коррозии на металле в местах повреждения покрытия и непокрытых участках металла;
- Износа деталей отделки, насадок и аксессуаров, ламп, батарей, защитных экранов, фильтров, накопителей мусора, уплотнительных элементов, ремней, щеток и иных деталей с ограниченным сроком использования и подверженных естественному износу в процессе эксплуатации;
- Ремонта изделия, произведенного лицами или организациями, не являющимися Авторизованными сервисными центрами*;
- Повреждений изделия при транспортировке, некорректного его использования, а также в связи с непредусмотренной конструкцией изделия модификациями или самостоятельным ремонтом.

4. Изготовитель не несет гарантийные обязательства, если на изделии отсутствует паспортная идентификационная табличка, либо данные в ней стерты или исправлены.

5. Настоящая гарантия действительна только для изделий, используемых для личных бытовых нужд, и не распространяется на изделия, которые используются для коммерческих, промышленных или профессиональных целей.

Внимание!! Изготовитель не несет ответственности за возможный вред, прямо или косвенно причиненный изделием POLARIS людям, домашним животным, окружающей среде, или ущербу имуществу в случае, если это произошло в результате несоблюдения правил или условий эксплуатации и установки изделия, умышленных или неосторожных действий потребителя или третьих лиц.

По всем вопросам, связанным с техническим обслуживанием, проверкой качества, гарантийным и постгарантийным ремонтом изделий POLARIS обращайтесь в ближайший Авторизованный сервисный центр POLARIS или к продавцу – уполномоченному дилеру POLARIS

Гарантийный ремонт изделий POLARIS осуществляют только Авторизованные сервисные центры POLARIS.

*Адреса Авторизованных сервисных центров на сайте Компании: www.polaris.ru

Для подтверждения даты приобретения изделия при гарантийном ремонте или предъявления иных предусмотренных законом требований просим Вас сохранять документы о покупке.

Таковыми документами могут являться заполненный гарантийный талон POLARIS, кассовый чек или квитанция Продавца, иные документы, подтверждающие дату и место покупки.

При не предоставлении документа, подтверждающего дату приобретения изделия, срок гарантии исчисляется с даты изготовления изделия.

Дата изготовления указана на паспортной идентификационной табличке, находящейся на задней стенке изделия

Ирригатор
Моделі PWF 0305T Smart Display
Пайдалану жөніндегі нұсқаулық

Сізге POLARIS сауда маркасының өнімін таңдағаныңыз үшін алғысымызды білдіреміз. Біздің өнімдеріміз сапа, функционалдылық пен дизайнның жоғары талаптарына сәйкес әзірленген. Сіз біздің фирмамыздың жаңа өнімін сатып алғаныңызға риза болатыңызға сенімдіміз.

Аспапты пайдалануды бастар алдында Сіздің қауіпсіздігіңізге қатысты маңызды ақпараты бар осы нұсқаулықты, сондай-ақ құралды дұрыс пайдалану және оны күту жөніндегі ұсыныстарды мұқият және толықтай оқып шығыңыз.

Нұсқаулықты кепілдік талонымен, кассалық чекпен, мүмкіндігінше, картон қораппен және орауыш материалмен бірге сақтап қойыңыз.

Мазмұны

1.	ЖАЛПЫ АҚПАРАТ	17
2.	ҚАУІПСІЗДІК БОЙЫНША ЖАЛПЫ НҰСҚАУЛАР	17
3.	ОСЫ АСПАП ҚАУІПСІЗДІГІ БОЙЫНША АРНАЙЫ НҰСҚАУЛАР	18
4.	ПАЙДАЛАНУ САЛАСЫ	18
5.	ЖИЫНТЫҚТАМА	19
6.	АСПАПТЫҢ СИПАТТАМАСЫ	19
7.	ЖҰМЫСҚА ДАЙЫНДЫҚ	21
8.	АСПАПТЫ ПАЙДАЛАНУ	22
9.	ТАЗАЛАУ ЖӘНЕ КҮТІМ	24
10.	САҚТАУ ЖӘНЕ ТАСЫМАЛДАУ	25
11.	КӘДЕГЕ ЖАРАТУ БОЙЫНША ТАЛАПТАР	25
12.	ЕГЕР СІЗДЕ МӘСЕЛЕ ТУЫНДАҒАН БОЛСА	25
13.	ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАРЫ	26
14.	СЕРТИФИКАТТАУ ТУРАЛЫ АҚПАРАТ	27
15.	КЕПІЛДІКТІ МІНДЕТТЕМЕЛЕР	28

1. ЖАЛПЫ АҚПАРАТ

Пайдалану жөніндегі осы нұсқаулық POLARIS ирригаторының, моделі PWF 0305T Smart Display (бұдан әрі мәтін бойынша – аспап) техникалық деректерімен, құрылымымен, пайдалану және сақтау ережелерімен танысуға арналған.

2. ҚАУІПСІЗДІК БОЙЫНША ЖАЛПЫ НҰСҚАУЛАР

- Аспаптың пайдаланылуы «Тұтынушылардың электр қондырғыларын техникалық пайдалану ережелеріне» сәйкес жүргізілуі керек.
- Аспап тек қана тұрмыста пайдалануға арналған.
- Осы аспапты пайдалануды бастар алдында «Пайдалану жөніндегі нұсқаулықты» мұқият оқып шығыңыз.
- Аспапты іске қосар алдында әр кезде оны қарап байқап шығыңыз. Аспаптың және қуат беру адаптерінің зақымдануы бар болғанда ешбір жағдайда адаптерді розеткаға қоспаңыз.
- Аспап және қуат беру адаптері олар ыстықтың, тура күн сәулелерінің және ылғалдың әсеріне ұшырамайтындай етіп сақталуы тиіс.
- Қуаттанып тұрған аспапты қадағалаусыз қалдырмаңыз! Егер сіз үй-жайдан шығып кетсеңіз, қуат беру адаптерін ылғи желіден ажыратып қойыңыз.
- Бұл құрал физикалық, жүйке немесе психикалық ауытқулары бар немесе тәжірибе мен білімнің жеткіліксіздігі бар адамдардың (балаларды қоса алғанда) пайдалануына арналмаған, мұндай адамдарға қадағалау жүзеге асырылатын немесе олардың қауіпсіздігіне жауап беретін адамның осы құралды пайдалануына қатысты оларға нұсқау беретін жағдайларды қоспағанда. Балалардың аспаппен ойнауына жол бермеу мақсатында қадағалауды жүзеге асыру қажет.
- Аспапты суға немесе басқа қандай болса да сұйықтыққа қоймаңыз.
- Назар аударыңыз! Құралды ванналар, шұңғылшалар немесе сумен толтырылған басқа ыдыстар маңында қуаттандырмаңыз.
- Құрылғыны тазалар алдында және оны қуат көзіне қосар алдында аспап толығымен кепкеніне көз жеткізуді сұраймыз.
- Желілік айырды тек қана айнымалы ток көзіне (~) қосыңыз. Қосар алдында құралды желіде қолданылатын кернеуге арналған екеніне көз жеткізіңіз.
- **Кез келген қате қосу Сізді кепілдікті қызмет көрсету құқығынан айырады.**
- Құралды өткір бұрыштарға соғылудан сақтаңыз. Пайдалану аяқталған кезде, құрал сынғанда немесе тазалау кезінде оны үнемі желіден өшіріңіз.
- Сондай-ақ аспапты желілік бауысманнан ұстап сөндіруге тыйым салынады. Аспапты желіден ажыратқанда желілік айырдан ұстаңыз.
- Баусымды дәл осындай модельдің ұқсас түпнұсқа бауысымына ауыстыруға болады, білікті мамандар - сервистік орталық қызметкерлерінен кеңес алыңыз. Біліксіз жөндеу пайдаланушы үшін тікелей қауіп төндіреді.
- Аспапты жөндеу үшін тек түпнұсқа қосалқы бөлшектер пайдаланылуы мүмкін.
- Аспапты құлағаннан кейін, егер зақымданудың көзге көрінетін белгілері бар болса, пайдаланбау керек. Аспап пайдаланар алдында білікті маманмен тексерілуі тиіс.
- Егер сіз аспапты пайдаланбасаңыз, оны үнемі желіден ажыратып қойыңыз.
- Желілік баусымның ыстық және үшкір беттермен жанасуына жол бермеңіз. Желілік баусым оқшауламасының зақымдануына жол бермеңіз.
- Тек қана жиынтыққа кіретін қондырмаларды пайдаланыңыз.
- Аспап жеткізілімі жиынтықтамасына кірмейтін аксессуарларды пайдалану Сізді кепілдікті қызмет көрсету құқығынан айырады.



Назар аударыңыз! Қызмет мерзімі аяқталғаннан кейін құралды тұрмыстық қалдықтармен бірге шығарып тастамаңыз. Оны одан әрі кәдеге жаратуға арналған мамандырылған пунктке тапсырыңыз. Сіз осылай қоршаған ортаны қорғауға көмектесе аласыз. Пайдаланылған аккумуляторлық батареяларды тұрмыстық қоқыспен тастамаңыз. Батареяларды отқа



тастамаңыз, себебі олар жарылуы мүмкін. Пайдаланылған аккумуляторлық батареялар жойылуы тиіс. Бұл құралды батарея алынбалы есеп, сондықтан да талап жалпы барлық құралға қатысты.

Назар аударыңыз!

Кез келген сипаттағы ақаулықтар пайда болғанда POLARIS Авторизацияланған қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.

3. ОСЫ АСПАП ҚАУІПСІЗДІГІ БОЙЫНША АРНАЙЫ НҰСҚАУЛАР

- Осы аспап емдік немесе медициналық құрал болып табылмайды. Бұл тұрмыстық мақсаттағы өнім. Пайдалану кезіндегі барлық көрсетімдер, қарсы көрсетімдер және ықтимал асқынулар жөнінде осы құрылғыны пайдалануды бастарға дейін медициналық персоналдан кеңес алыңыз.
- Ирригатор электрмагниттік жабдыққа арналған қауіпсіздік, стандарттар талаптарына сәйкес келеді. Егер Сізде жүрекширатқыштар және басқа имплантталған құрылғылар жөнінде қандай да бір сұрақтарыңыз болса, ирригаторды пайдаланар алдында өзіңіздің дәрігеріңізбен немесе имплантталған құрылғылар өндірушілерінен кеңес алуды сұраймыз.
- Бұл өнім тістегі өңезді кетіруге және тісті күнделікті мұқият тазалауға арналған. Оны басқа мақсаттарда пайдаланбауды сұраймыз. Егер Сіз өзіңізді жайсыз сезінсеңіз немесе ауырсынғанды сезінсеңіз, бұл өнімді пайдалануды тоқтатыңыз және дәрігерге жүгініңіз.
- Егер сізде қандай бір медициналық проблемаларыңыз бар болса, ирригаторды пайдаланар алдында дәрігермен кеңесіңіз.
- Аспапты ыдыс жуатын машинада жумауды сұраймыз.
- Ирригатордың түпнұсқа емес қондырмаларын пайдаланбауды сұраймыз.
- Аспапты ауаның теріс температураларында сақтауға қатаң түрде болмайды.
- Іске қосылған ирригаторды қолдан түсірмеңіз және оны қатты беттерге қоймаңыз, өйткені жұмыс істеп тұрған аспап құлап, зақымдануы мүмкін.
- Аспап ағынын тілдің астына, құлаққа, мұрынға және басқа да нәзік аймақтарға бағыттамаңыз. Аспап қатты су ағынын туғызады, ол терінің және шырышты қабықшалардың бүтіндігін бұзуы мүмкін.
- Аспапты пайдаланар алдында ауыз қуысынан барлық бөгде заттарды (пирсинг, зергерлік әшекейлер және т. б.) алып қойыңыз
- Егер сіздің ауыз қуысыңызда ашық жаралар бар болса, ирригаторды пайдаланбаңыз.
- Тіс дәрігерінде кез келген араласуды өткізер алдында процедураларға дейін ирригаторды пайдалану мүмкіндігі туралы одан нақтылап алыңыз.
- Ирригаторды пайдаланған кезде алғашқы бірнеше күнде қызыл иектің болымсыз қанауы байқалуы мүмкін. Егер қан ағуы жұмсақ режимде 1 апта пайдаланғаннан кейін жалғасатын болса, ирригаторды пайдалануды тоқтатыңыз және кеңес алу үшін тіс дәрігеріне жүгініңіз.
- Аспап резервуарын таза ауыз судан басқа ешқандай сұйықтытармен толтырмаңыз.
- Ирригаторды әр пайдаланудан кейін суға арналған резервуардан сұйықтық қалдықтарын ағызыңыз.
- Пайдалануда болған ирригаторды жылытылмайтын үй-жайда теріс температураларда сақтауға тыйым салынады.

4. ПАЙДАЛАНУ САЛАСЫ


- Аспап осы Нұсқаулыққа сәйкес тек қана тұрмыстық пайдалануға арналған. Аспап өнеркәсіптік және коммерциялық пайдалануға арналмаған.
- Өндіруші қате пайдалану немесе осы Пайдалану нұсқаулығында көзделмеген мақсатта нәтижесінде туындаған шығын үшін жауапкершілік алмайды.

- Ирригатор ауыз қуысына күтім жасау, тісаралық аралықтарды тазалауға, өңезді кетіруге арналған; импланттар, брекеттер, тыс қаптамалары, мосттар бар болғанда гигиена сақтауға; укалаудың көмегімен қызыл иекті сауықтыруға арналған.

5. ЖИЫНТЫҚТАМА

1. Аспап(корпус)	1 дана.
2. Ауыстырмалы классикалық қондырмалар	2 дана.
3. Ауыстырмалы ортодонттық қондырма	1 дана.
4. Тілге арналған ауыстырмалы қондырма	1 дана.
5. USB сым	1 дана.
6. Зарядтаудың адаптері	1 дана.
7. Жол тысқабы	1 дана.
8. Пайдалану жөніндегі нұсқаулық	1 дана.

6. АСПАПТЫҢ СИПАТТАМАСЫ

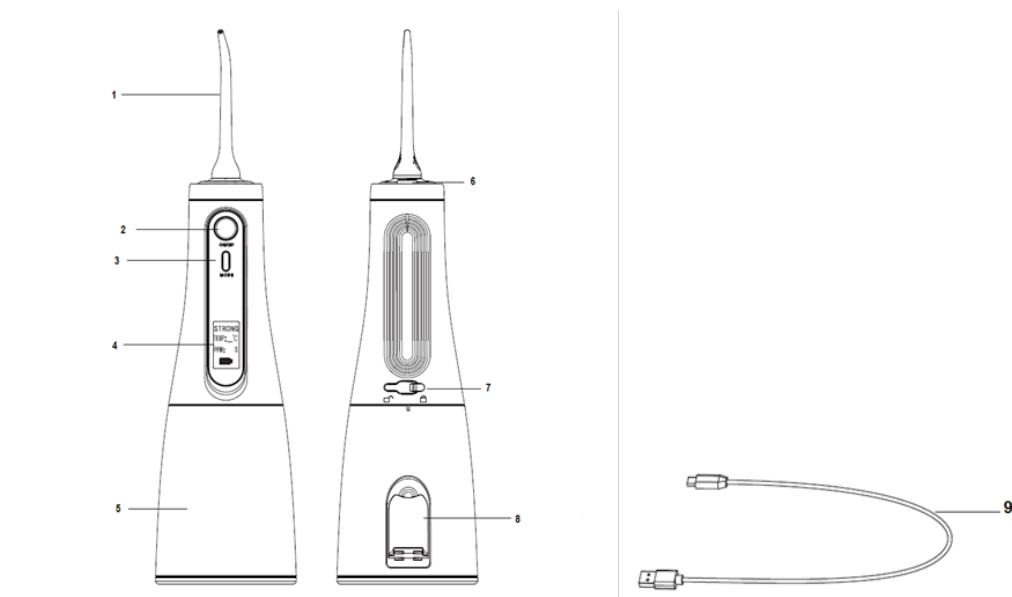


1. Ауыстырмалы қондырма
2. Қос./сөнд. батырмасы
3. Режимдерді ауыстырып-қосу батырмасы
4. LCD дисплей
5. Суға арналған резервуар
6. Қондырманы бекіту батырмасы
7. USB порт
8. Суға арналған резервуардың құю тесігі
9. USB кәбіл


Қондырмалар

Базалық жиынтықтамада 5 қондырма:
классикалық 2 дана,
ортодонттық 1 дана,

тілді тазалауға арналған 1 дана.

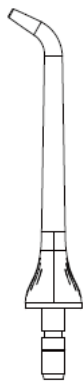

**Қондырма
классикалық * 2 дана**

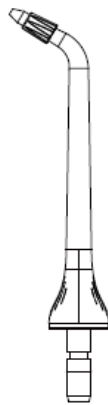

**Қондырма
ортодонттық**




**Қондырма
периодонтальды**




**Қондырма
тілді тазалауға арналған**

Классикалық қондырма тісаралық аралықтарды бактериялар мен тамақ қалдықтарынан тазалай жасанды құрылымдар бар болғанда тамақ қалдықтарын кетіру үшін жарамды.

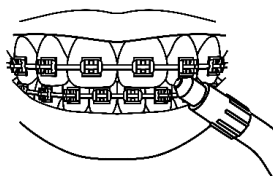

Ортодонттық қондырма көпірлерді, брекеттерді, тіс қаптамаларын, жасанды құрылымдардың барлық элементтерін тазалауға жарамды.

Пародонт щеткасының жұмсақ ұшы бар және тіс тінін тазалау үшін қолданылады. жиектер.

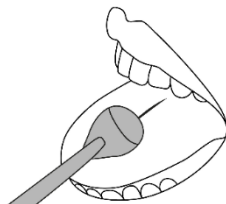

Тілді тазалауға арналған қондырма бактерияларды, өңезді жояды, тыныс алуды балғындырады.

Назар аударыңыз! Қондырма әр пайдаланушы үшін қатаң жеке болуы тиіс. Саңылауларда әртүрлі пайдаланушылардың саңылауларын ажырату үшін арнайы белгілер бар. Қондырмаларды 6 ай үнемі пайдаланғаннан кейін ауыстыру ұсынылады.

Жұмыс істеу режимдері:

Қосу/өшіру түймесін (2) басу арқылы ирригаторды қосыңыз.

Жұмыс режимдерін ауыстыру режимді ауыстыру түймесін (3) ретімен басу арқылы жүзеге асырылады. Режим қосу/өшіру түймесін (2) басу арқылы іске қосылады. Құрылғы 2 минуттан кейін автоматты түрде өшеді. Қажет болса немесе ыдыстағы су таусылғаннан кейін қосу/өшіру түймесін (2) қайтадан басу арқылы су беруді мәжбүрлеп өшіріңіз.

1. Strong (мықты) режимі – су берілуінің максимал қысымымен қызыл иектері сау адамдардың ауыз қуысын тамақ қалдықтарынан және өңезден тазалауға арналған.

2. Normal (қалыпты) режимі су берілуінің орташа қысымымен тіске күнделікті күтім жасауға, тісаралық аралықтарды тазалауға, қызыл иекті уқалауға арналған; қызыл иектері сау адамдар үшін.
3. Soft (жұмсақ) режимі – тістер мен қызыл иекке жұмсақ әрекет ету, сезімтал тістер мен қызыл иекі арналған; жаңа бастаған пайдаланушылар үшін.
4. Pulse (импульстік) режимі – қызыл иек қалталарын тазалауға және қызыл иекті уқалауға арналған режим.
5. Child (балалар) режимі – судың мүмкіндігінше төмен қысымы бар жұмсақ режим. 8 жастан асқан балаларға ересектердің басшылығымен пайдалануға жарамды.


Назар аударыңыз!

Аспап шамамен 120-125 сек өткеннен кейін автоматты түрде сөнеді.



7. ЖҰМЫСҚА ДАЙЫНДЫҚ

1. Бүкіл қаптау материалды алып тастаңыз.
2. Ирригаторды құрастыру. Ұштықты аспаптың жоғарғы бөлігіне сипатты шыртыл естілгенше орнатыңыз.

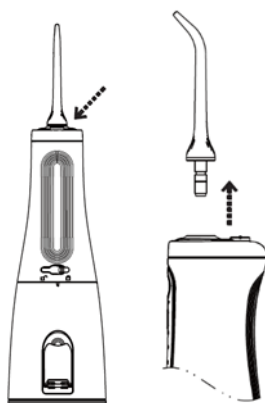

Ұштықты шешіп алу үшін аспаптың батырманы (6) басыңыз, содан кейін ұштықты тұтқадан суырып алыңыз.



Назар аударыңыз! Ирригатор жұмыс істеп тұрған кезде қондырманы бекіту батырмасын баспаңыз.

3. Ирригаторды қуаттандыру.


Аспапта көрсетілген кернеу желі кернеуіне сәйкес келетініне көз жеткізіңіз.

- USB кәбілді (9) адаптерге (жинақта жоқ) және аспап корпусындағы USB портына (7) қосыңыз, содан кейін адаптерді желіге қоосыңыз. Аккумулятор зарядының индикациясы бар OLED дисплей жанады.
- Құрылғыны 6-7 сағат ішінде зарядтаңыз.
Алғашқы рет пайдаланғанда құрылғыны толығымен зарядтаңыз.

- Аккумуляторды толық зарядталуынан кейін аспаптың үздіксіз жұмыс істеу уақыты шамамен 50-100 минут құрайды режиміне байланысты.
- Аспапты дұрыс пайдаланғанда Сіз литий батареясының қызмет ету мерзімін ұзартасыз;

8. АСПАПТЫ ПАЙДАЛАНУ

1. Суды резервуарға құятын тесік (8) арқылы құйыңыз, бұл үшін:
 - суға арналған резервуардың қақпақшасын ашыңыз
 - суға арналған резервуарды көлденеңінен ұстаңыз және оны суға толтырыңыз
 - суға арналған резервуардың қақпақшасын жабыңыз

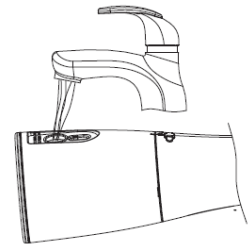

Резервуарға су құйған кезде аспап сөндірілген болуы керек.

Аспапты пайдалану үшін таза ағынды салқын немесе жылы су (40°C дейін) ұсынылады. Егер сіздердің өңірлеріңіздегі судың сапасы нашар болса, онда сүзгіленген суды пайдаланыңыз.

Ирригатордың сынуына жол бермеу үшін пайдалануға тыйым салынады:

- Құрамында қалқымалы бөлшектер бар заттар мен ерітінділерді (қайнатпалар, суспензиялар және т. б.)
- Құрамында май бар ерітінділерді
- Антисептикалық және спиртті ерітінділерді
- Тұзды ерітінділерді
- Ауызды шаюға арналған сұйықтықтарды, ирригаторға арналған арнайы ерітінділер мен шайғыштарды қоспағанда.

2. Аспапты іске қосу үшін қос./сөнд. батырмасын (2) басыңыз, экранда сәлемдесу көрсетіледі және ирригатор жұмысының ағымдағы режимдері көрсетіледі (жұмыс режимі / судың температурасы / судың сапасы (PPM) және аккумулятордың қалған заряды).



PPM индикаторы судың кермектігін көрсетеді.
170 PPM дейін суды пайдаланыңыз.

3. Режимді таңдау (ауыстырып-қосу) режимдерді ауыстырып-қосу батырмасын (3) қысқа басумен жүзеге асырылады.



Жұмыс режимін таңдағаннан кейін және суды беруді бастау үшін қос./сөнд. батырмасын (2) басу қажет

Аспап Сіз соңғы рет пайдаланған жұмыс режимін жадта сақтап қалады және келесі пайдалануда дәл ол осы режимде болады. Қажет болса, жұмыстың басқа режимін таңдаңыз.

Тісті әр тазалау алдында ұштықты ағынды сумен жуып-шайыңыз.


- Ирригаторда тазалаудың 5 режимі бар. Аспапты алғашқы рет пайдаланғанда SOFT немесе CHILD режимін таңдау ұсынылады. Бұл ирригациялық тазалауға бейімделуге және қызыл иектің қабынуы мен қанауына жол бермеуге көмектеседі.
- Пайдалану кезінде ирригатор, су ағысының тоқтауына жол бермеу үшін, тік жайғасымда немесе азғантай көлбеуде болуы керек.




- Суға толған ирригаторды қондырмасыз пайдаланбаңыз. Бұл оның сынуына әкелуі мүмкін.
- Резервуары сусыз болған құрылғыны іске қоспаңыз, су қалдықтарын ағызу және резервуарды құрғату қажет болған жағдайларды қоспағанда. Құрылғының сусыз жұмыс істеуі оның сынуына немесе аспаптың қызмет ету мерзімінің қысқаруына әкелуі мүмкін.

4. Ауыз қуысын тазалау процесі:

- шұңғылшаның үстіне еңкейіңіз және аспап ұштыған ауызға салыңыз

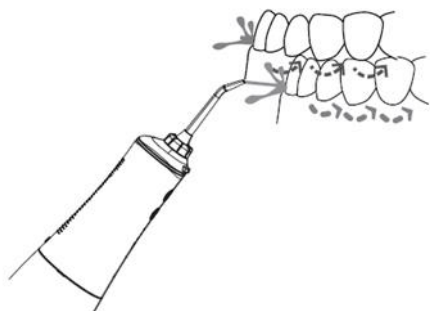

- аспап аузыңызда болғанда аспапты іске қосыңыз
- шашырауға жол бермей, бірақ судың ауыздан шұңғылшыға ағуына жол бере отырып, еріндеріңізді ышынара жабыңқыраңыз
- ұшын қызыл иек сызығына 90 градус бұрышпен бағыттаңыз.
- артқы тістерден бастаңыз, тісаралық аралықтарда тоқтап, қызыл иек сызығының бойымен жылжыңыз. Тістің айналасындағы және тістер арасындағы барлық жерлер тазаланғанша жалғастырыңыз.

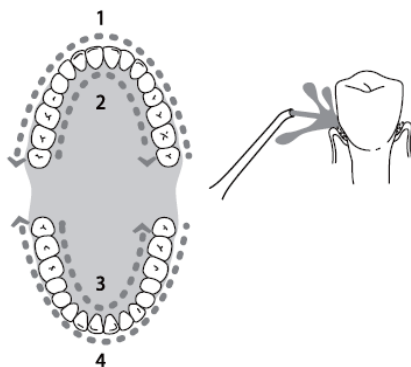

- Эргономикалық дизайн және 360-қа бұрымалы ұштық су ағынын ауыз қуысының барлық аймақтарына жеңіл қолжетімді болуы үшін бақылауға мүмкіндік береді.

- эсер етудің талап етілетін қарқындылығына байланысты қондырмадан тіске дейінгі қашықтықты пайдаланушы өзі анықтайды


Тістер арасындағы жерлер мен брекеттердің айналасында ерекше абайлық сақтаңыз.

- Ағынды тура пародонттық қалташаға бағыттамаңыз.

- Пайдалану сеансы аяқталғаннан кейін бірден суды


ағызыңыз, резервуарда судың тұрып қалуына жол бермеңіз. Суды ағызғаннан кейін ирригаторды бос резервуармен, одан су қалдығын жою үшін, 2-3 секундқа іске қосыңыз.

Аспап жұмыс істеп тұрған кезде судың қондырмадан шығуын бұғаттауға тыйым салынады. Бұл аспаптың істен шығуына әкелуі мүмкін.

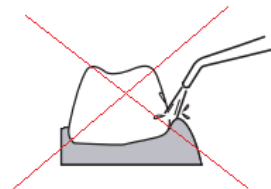


9. ТАЗАЛАУ ЖӘНЕ КҮТІМ

- Резервуардан су қалдықтарын ағызыңыз. Осыдан кейін аспапты іске қосыңыз, ал су тамшылары ұштық арқылы шығады. Резервуарды аптасына 1 рет температурасы 50°C-ден аспайтын сумен жақсылап жуу ұсынылады.
- Суға арналған резервуарды шешіп алу үшін, сол қолмен ирригатордың жоғарғы бөлігін, төмендегі суретте көрсетілгендей, ұстап, оң қолмен резервуарды солға қарай бұраңыз.

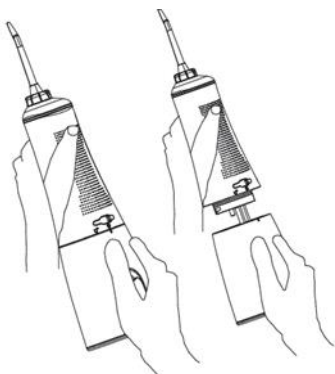

- Егер ұштықтарды ауыстыру қажет болса, осы модельге арналған түпнұскалық ұштықтарды пайдалануды сұраймыз. 1 ұштықты пайдаланудың қынылатын уақыты – 6 ай.
- Әр пайдаланғаннан кейін ұштықты және корпусы жылы ағынды сумен жуып-шаю керек. Қажет болған жағдайда бетті тазалау үшін жұмсақ мата мен сабынды пайдалануға болады. Қондырмалардың зарарсыздандырылуын оларды 5-10 минутқа аталған ерітінділердің біріне орналастыру жолымен жүргізуге болады: сутегінің 3% асқын тотығы, хлоргексидиннің 1% ерітіндісі. Содан кейін қондырмаларды жылы сумен жуып-шайыңыз. Сонымен қатар қондырмалардың зарарсыздандырылуын ультракүлгін тазартқышта жүргізуге болады. Суқыбыр суын пайдаланғанда қондырмасы бар аспапты лимон қышқылының ерітіндісімен су тасы мен түзілімдерден үнемі жуып-шаю қажет. 1 шай қасық қышқылды 200мл жылы қайнаған суға араластырыңыз, ерітіндіні ирригатор резервуарына құйыңыз және, ағысты резервуар босағанша шұңғылшаға бағыттап отырып, аспапты іске қосыңыз. Аспапты және қондырманы дәл сол ерітіндіге шylanған жұмсақ матамен сүртіп алыңыз. Осыдан кейін резервуарды және аспап корпусын таза сумен жуып-шайыңыз. Жуып-шаюдың реттілігі пайдаланылатын су кермектігіне байланысты, алайда кемінде 6 айда бір реттен кем емес ұсынылады.
- Қондырмалар, төмендегі суретте көрсетілгендей, суға арналған резервуарда сақталуы мүмкін.

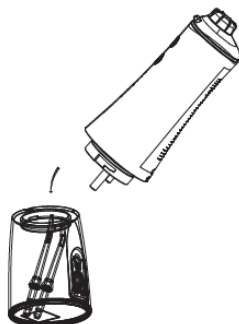



- Ұштық пайдалану барысында деформацияланған жағдайда оны бірден ауыстыру қажет.
- Тазалу үшін органикалық еріткіштерді және қазақ материалдарды, сондай-ақ ирригатор жабынын бүлдіруі мүмкін болатын үшкір заттарды пайдалануға тыйым салынады.
- Аспапты ыдыс жуатын машинада жумауды сұраймыз.

10. САҚТАУ ЖӘНЕ ТАСЫМАЛДАУ

- Электр аспаптары қоршаған ауаның температурасы плюс 40°C-ден аспайтын, салыстырмалы ылғалдылығы 70%-дан аспайтын және қоршаған ортада электр аспаптар материалдарына теріс әсер ететін шаң, қышқылды және басқа да булар болмайтын жабық құрғақ және таза үй-жайда сақталады.
- Егер сіз аспапты ұзақ уақыт бойы пайдаланбайтын болсаңыз, батареяны толығымен қуаттандырыңыз, оны электр қуат көзінен ажыратыңыз және ирригаторды күн сәулесі кірмейтін жабық жылытылатын құрғақ үй-жайда сақтаңыз.
- Егер сіз аспапты бір апта және одан ұзақ пайдаланбауды жоспарласаңыз, суға арналған ыдысты ішінен және сыртынан құрғатыңыз.



Ирригаторды пайдалану, тазалау және сақтау жөніндегі жоғары көрсетілген әрекеттер, Polaris Сапа Зертханасының зерттеулеріне сәйкес, аспаптың қазмет ету мерзімін ұзартады.

Тасымалдау

Электр аспаптарды нақты түрдегі көлікте қолданылатын жүктерді тасымалдау ережелеріне сәйкес көліктің барлық түрлерімен тасымалдайды. Аспапты тасымалдағанда зауыттық тұпнұсқа ораманы пайдаланыңыз

Аспаптардың тасымалдануы оларға атмосфералық жауын-шашын мен жегі орталардың тікелей әсер ету мүмкіндігін болдырмауы тиіс.

11. КӘДЕГЕ ЖАРАТУ БОЙЫНША ТАЛАПТАР

Ескерту: Электр аспаптың пайдалану мерзімі аяқталғаннан кейін оны әдеттегі тұрмыстық қалдықтармен бірге тастамай, ресми жинау пунктіне кәдеге жаратуға жіберіңіз. Осылайша Сіз қоршаған ортаны сақтауға көмектесесіз.

Бұйымдарды кәдеге жарату кезінде пайда болатын қалдықтар белгіленген тәртіппен және салалық нормативтік құжаттаманың қолданыстағы талаптары мен нормаларына сәйкес, оның ішінде СанЕжН 2.1.7.1322-03 «Өндіріс және тұтыну қалдықтарын орналастыруға және залалсыздандыруға қойылатын гигиеналық талаптарға» сәйкес кейінгіде кәдеге жаратумен міндетті жинауға жатады

12. ЕГЕР СІЗДЕ МӘСЕЛЕ ТУЫНДАҒАН БОЛСА

Егер қандай болса да болымсыз мәселе туындайтын болса, әдетте оның пайда болуының себебі табылғанда, ол оңай шешілуі мүмкін.

МӘСЕЛЕ	ЫҚТИМАЛ СЕБЕБІ	ЫҚТИМАЛ ШЕШІМІ
Су аспаптан ақпайды	• Ауыстырмалы қондырма негізіндегі тығыздағыш сақина бұзылған және ауыстырмалы қондырма тиісті түрде орнатылуы мүмкін емес	• Тығыздағыш сақинаны ауыстыру үшін сервистік орталыққа жүгініңіз
Ұштық негізінде судың ағып шығуы	• Тығыздағыш сақина босап кеткен	• Ұштықты ауыстыру
Аспап жұмыс істеген кезде судың қысымы әлсіз	• Төмен кернеу	• Аспапты толығымен зарядтаңыз
Аспап іске қосылмайды	• Төмен кернеу	• Аспапты толығымен зарядтаңыз
Аспапты іске қосқанда қондырмадан су ақпайды	• Суға арналған резервуарда су жоқ • Пайдаланған кезде құрылғы тым қатты еңкейтілген • Ауыстырмалы қондырмада лас жиналып қалған	• Сүзгіні тазалаңыз • Суға арналған резервуарды жуып-шайыңыз • Аспапты тік жайғасымда пайдаланыңыз • Аспапты сөндіріңіз және қайта қосыңыз • Сервистік орталыққа жүгініңіз
Аспап судың температурасын және сапасын (PPM) көрсетпейді	• Су судың датчигіне тимейді.	• Су судың датчигіне толығымен тиюі үшін суға арналған бакты толығымен толтыру немесе ирригаторды еңкейту керек.



Сіздің құралды пайдалану кезінде өрттің, электрлік токпен зақымдану немесе жарақат алу қаупінің, сонымен қатар оның сынуының алдын алу үшін осы құралмен жұмыс кезіндегі сақтықтың негізгі шараларын, сонымен қатар электрлік тұрмыстық техникамен жұмыс кезіндегі қауіпсіздік бойынша жалпы нұсқауларды сақтаңыз.

Назар аударыңыз! Егер Сіз жоғарыда сипатталған қадамдар көмегімен мәселені өз күшіңізбен шеше алмасаңыз, POLARIS өкілетті қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.

13. ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАРЫ

PWF 0305T Smart Display – POLARIS сауда маркасының ирригаторы

Кернеуі: 3,7 В

Номинал қауты: 7,4 Вт

Аспаптағы судың номинал қысымы: 206-1000 кПа

Суға арналған резервуардың көлемі: 350 мл

Судың бүлкілдеу жиілігі (макс) минутына 1 800 импульс

Толық резервуарда жұмыс істеудің максимал уақыты: 120±2 сек.

Автосөндірілу: 2 минут жұмыс істегеннен кейін

Зарядталу уақыты: 6-7 сағ

Толық зарядталған аккумуляторда жұмыс істеудің жиынтық уақыты 100 мин дейін
Литий батареяның сыйымдылығы 2000 мАсағ
Былғаға төзімділігі IPX7
Қорғау класы - III

Ескерту: Өзгерістер мен жақсартуларды енгізудің үздіксіз процесінің салдарынан нұсқаулық пен өнім арасында кейбір айырмашылықтар байқалуы мүмкін. Пайдаланушы осыған назар аударады деп өндіруші үміттенеді.

14. СЕРТИФИКАТТАУ ТУРАЛЫ АҚПАРАТ

Бұйым КО ТР 004/2011 «Төмен вольтты құралдардың қауіпсіздігі туралы», КО ТР 020/2011 «Техникалық құралдардың электромагниттік үйлесімдігі», ЕАЭО ТР 037/2016 «Электротехника және радиоэлектроника бұйымдарында қауіпті заттардың қолданудағы шектеулер туралы» талаптардың сәйкестігін растау процедурасынан өткен және Кедендік Одақтың мүше мемлекеттері нарығында бұйымдарды ұстаудың бірыңғай белгісімен таңбаланады.

Сәйкестік сертификатының/декларациясының нөмірі және оның қолданылу мерзімі туралы ақпаратты Сіз POLARIS бұйымын сатып алған жерде немесе өндірушінің Уәкілетті өкілінен ала аласыз.



Бұйымның қызмет көрсету мерзімі: 3 жыл

Кепілдік мерзім: сатып алған күннен бастап 3 жыл

Дайындалған күні бұйымның артқы қабырғасындағы паспорттық сәйкестендіру тақтайшасында көрсетілген.

Аккумуляторлық батарея (АКБ) шектеулі ресурсы бар және табиғи тозуға бейім компонент болып табылады. АКБ-ға кепілдікті мерзім: сатып алған күннен бастап 6 ай.

Өткізу ережелері белгіленбеген.

Өндіруші:

НИНБО ХЭНСФОРТ ОВЕРСИЗ ЭЙША ЛИМИТЕД

Мекенжайы: № 158 Доншан Лю, Хушан Чжидао, Цыси, Чжэцзян провинциясы, ҚХР

Manufacturer: NINGBO HANSFORT OVERSEAS ASIA LIMITED

No. 158 Dongshan Lu, Hushan Jiedao, Cixi City, Zhejiang Province, PRC

Зауытта:

Стермэй Индастриал Лимитед, Рум 5206, 8 оффис Билдинг, ЧангАн Ванке Сентер, №1 ЧангКуинг Саус Род, ДжинКсиа Коммьюнити, ЧангАн Таун, Доггуан, Гуангдонг, Қытай

At factory:

Stermay Industrial Limited, Room 5206, the 8th office Building, ChangAn Vanke Center, NO.1 ChangQing South Road, JinXia Community, ChangAn Town, Dongguan, Guangdong, China

Қытайда өндірілген.

Өндірушінің РФ және Кедендік Одақтың мүше мемлекеттеріндегі Импорттаушысы және

Уәкілетті өкілі: "ЭйДжиАй Электроникс" ЖШҚ, Ресей, 115419, Мәскеу қ., Орджоникидзе көшесі, 11-үй, 3-құрылыс, 4-қабат I -үй-жай 13-бөлме, Тел. +7 (495) 419-11-78

Бірыңғай анықтамалық қызметтің телефоны 8-800-700-11-78

15. КЕПІЛДІКТІ МІНДЕТТЕМЕЛЕР

Бұйым: Ирригатор

Модель: PWF 0305T Smart Display

Осы кепілдік бұйымды сатып алудың расталған күнінен бастап 36 ай бойы әрекет етеді және «Тұтынушылардың құқықтарын қорғау туралы» Кедендік одақтың мүше мемлекеттерінің Заңына сәйкес бұйымға кепілдік қызмет көрсетілуін білдіреді.

1. Өндірушінің кепілдікті міндеттемелері «POLARIS» сауда маркасымен шығарылатын және өндіруші уәкілеттік берген сатушылардан, кепілдік қызмет көрсетілетін елдерде (сатып алу орнына қарамастан) сатып алынған барлық үлгілерге қолданылады.

2. Бұйым пайдалану жөніндегі нұсқаулыққа және қауіпсіздік жөніндегі ережелер мен талаптарды сақтауға қатаң сәйкестікте пайдаланылуы тиіс.

3. Осы кепілдік тауарды тұтынушыға бергеннен кейін пайда болған келесі кемшіліктерге қатысты болмайды:

- Химиялық, механикалық немесе өзге де әсер ету, бөгде заттардың, сұйықтықтардың, жәндіктердің және олардың тіршілік ету өнімдерінің бұйымның ішіне түсуінен;
- Бұйымды оның тікелей міндетінен тыс пайдалануында болатын қате пайдаланылуы, сондай-ақ Пайдалану жөніндегі нұсқаулықтың және қауіпсіздік техникасы ережелерінің талаптарын бұза отырып, бұйымды орнату және пайдаланудан;
- Құрамында минералды заттар көп мөлшерде болатын суды пайдалану салдарынан әк шөгіндісі, су тасы мен қақ шөгінділерінен.
- Бұйымды ол арналмаған мақсаттарда пайдаланудан;
- Қалыпты пайдалану, сонымен қатар функционалдық қасиеттеріне әсер етпейтін: сыртқы немесе ішкі беттің механикалық зақымдануы (майысулар, сызаттар, ескірулер), металл түсінің табиғи өзгеруі, оның ішінде құбылмалы және қара дақтардың пайда болуы, сондай-ақ жабынды зақымдалған жерлерде және металдың жабылмаған учаскелерінде металл жемірілуінен;
- Өңдеу бөлшектерінің, қондырмалар мен аксессуарлардың, шамдардың, батареялардың, қорғаныс экрандардың, коқыс жинағыштардың, тығыздағыш элементтердің, белдіктердің, щеткалардың пайдалану мерзімі шектеулі басқа бөлшектердің және пайдалану барысында табиғи тозуға бейім бөлшектердің тозуы;
- Авторизацияланған сервис орталықтары* болып табылмайтын тұлғалар немесе ұйымдар өндірген бұйымды жөндеуіне;
- Бұйымның тасымалдау кезіндегі, дұрыс пайдаланбау, сондай-ақ бұйымның конструкциясында көзделмеген модификациялармен немесе өз бетінше жөндеумен байланысты зақымдануларынан.

4. Егер бұйымда паспорттық сәйкестендіру тақтайшасы жоқ болса, немесе ондағы деректер жойылған не түзетілген болса, өндіруші кепілдікті міндеттемелер үшін жауапты болмайды.

5. Осы кепілдік тек қана жеке тұрмыстық қажеттіліктер үшін жарамды және де коммерциялық, өнеркәсіптік немесе кәсіби мақсаттар үшін пайдаланылатын бұйымдарға қолданылмайды.

Назар аударыңыз!! Өндіруші POLARIS бұйымымен адамдарға, үй жануарларына, қоршаған ортаға тікелей немесе жанама келтірілген зиян немесе егер бұл бұйымды пайдалану және орнату ережелерін немесе шарттарын сақтамау, тұтынушының немесе үшінші тұлғалардың қасақана немесе абайсыз әрекеттері нәтижесінде болған жағдайда мүлікке келтірілген зиян үшін жауапты болмайды.

POLARIS бұйымдарына техникалық қызмет көрсету, сапаны тексеру, кепілдік және кепілдік жөндеу бойынша барлық сұрақтар бойынша жақын жердегі POLARIS қызмет көрсету орталығына немесе сатушыға – POLARIS өкілетті дилеріне хабарласыңыз

POLARIS бұйымдарына кепілді жөндеуді тек POLARIS Авторизацияланған сервистік орталықтары жүзеге асырады.

*Авторизацияланған сервистік орталықтардың мекенжайлары Компания сайтында: www.polaris.ru

Кепілдік жөндеу кезінде бұйымды сатып алу күнін растау немесе заңда көзделген өзге де талаптарды ұсыну үшін сізден сатып алу туралы құжаттарды сақтауды сұраймыз.

Мұндай құжаттар POLARIS толтырылған кепілдік талоны, кассалық чек немесе Сатушының түбіртегі, сатып алу күні мен орнын растайтын өзге де құжаттар болып табылуы мүмкін.

Бұйымды сатып алу күнін растайтын құжат ұсынылмаған кезде кепілдік мерзімі бұйым дайындалған күннен бастап есептеледі.

Дайындалған күні бұйымның артқы қабырғасындағы паспорттық сәйкестендіру тақтайшасында көрсетілген

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН / WARRANTY CARD	
Изделие / Item	Модель / Item no.
Серийный № / Serial no.	
Дата продажи / Date of purchase	
Фирма-продавец / Seller	
Подпись продавца / Seller's signature	
Печать продавца / Seller's stamp	
Покупатель / Buyer	
Адрес / Address	
Телефон / Telephone no.	

